



STORZ & BICKEL



Crafty+

de

en

fr

es

it

nl

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D'EMPLOI

MODO DE EMPLEO

ISTRUZIONI PER L'USO

GEBRUIKSAANWIJZING

| | | | |
|----|--|--------|-----|
| de | GEBRAUCHSANWEISUNG Vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und aufbewahren. | Seite | 4 |
| en | INSTRUCTIONS FOR USE Read carefully before using the device and save these instructions. | page | 38 |
| fr | MODE D'EMPLOI Avant d'utiliser l'appareil, lire attentivement cette notice et la conserver précieusement. | page | 69 |
| es | MODO DE EMPLEO Antes de la puesta en servicio leer atentamente estas instrucciones y guardarlas. | página | 104 |
| it | ISTRUZIONI PER L'USO Prima della messa in funzione dell'apparecchio, leggerle e conservarle con attenzione. | pagina | 137 |
| nl | GEBRUIKSAANWIJZING Vóór de ingebruikname aandachtig lezen en bewaren. | pagina | 171 |

Crafty+

by STORZ & BICKEL

| | |
|---|--------------|
| Inhaltsverzeichnis | Seite |
| 1 Produktübersicht CRAFTY+ | 7 |
| 1.1 Lieferumfang | 7 |
| 1.2 Funktionselemente | 9 |
| 1.3 Service | 9 |
| 2 Zu Ihrer Sicherheit | 10 |
| 2.1 Symbole | 10 |
| 2.2 Zeichenerklärung | 10 |
| 2.3 Grundlegende Regeln | 12 |
| 2.4 Sicherheitshinweise | 13 |
| 2.4.1 Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag | 13 |
| 2.4.2 Verletzungsgefahr durch Verbrennung / Dämpfe | 13 |
| 2.4.3 Verletzungsgefahr durch verschiedene Ursachen | 14 |
| 3 Zweckbestimmung | 14 |
| 4 Pflanzenübersicht | 14 |
| 5 Einflussfaktoren beim Verdampfen | 15 |
| 6 Inbetriebnahme und Bedienung | 16 |
| 6.1 Auspacken | 16 |
| 6.2 Netzanschluss | 16 |
| 6.3 Laden des Akkus | 16 |
| 6.4 Befüllen der Füllkammer | 17 |
| 6.5 Aufheizen | 17 |
| 6.5.1 Werkseinstellungen | 17 |
| 6.5.2 Basis-Temperatur | 18 |
| 6.5.3 Booster-Temperatur | 18 |
| 6.5.4 Superbooster-Temperatur | 18 |

| | |
|---|--------------|
| Inhaltsverzeichnis | Seite |
| 6.6 Anwendung | 19 |
| 6.7 Ende der Anwendung | 19 |
| 6.8 Automatische Abschaltung | 20 |
| 6.9 Aufbewahrung | 20 |
| 7 Reinigen | 21 |
| 7.1 Kühleinheit | 21 |
| 7.1.1 Produktübersicht | 21 |
| 7.1.2 Zerlegen | 21 |
| 7.1.3 Reinigen | 23 |
| 7.1.4 Zusammenbau | 23 |
| 7.2 Siebe | 24 |
| 7.3 Füllkammer | 24 |
| 7.3.1 Ausbau des unteren Siebs | 24 |
| 7.3.2 Reinigen | 24 |
| 7.3.3 Einbau des unteren Siebs | 24 |
| 7.4 Verdampfer und USB-C Kabel | 24 |
| 8. STORZ & BICKEL Web App | 25 |
| 8.1 Werkseinstellungen | 25 |
| 8.2 Verbindungsaufbau des Verdampfers mit einem Smartphone | 25 |
| 8.3 Menüpunkte der STORZ & BICKEL Web App | 25 |
| 8.4 Temperatureinstellung mit der STORZ & BICKEL Web App | 26 |
| 8.5 Reset auf Werkseinstellungen | 27 |
| 9 Optionales Zubehör | 31 |
| 9.1 Kräutermühle | 30 |
| 9.2 Füllhilfe | 30 |
| 9.2.1 Befüllen der Füllhilfe | 30 |
| 9.2.2 Befüllen der Füllkammer mit der Füllhilfe | 30 |

de

en

fr

es


it

nl

| | |
|---|--------------|
| Inhaltsverzeichnis | Seite |
| 9.3 Dosierkapseln (zur Einmalbenutzung) und Magazin..... | 31 |
| 9.3.1 Befüllen der Dosierkapseln | 32 |
| 9.3.2 Befüllen des Magazins mit Dosierkapseln | 32 |
| 9.3.3 Einsetzen der Dosierkapsel in die Füllkammer..... | 32 |
| 10 Störungen | 34 |
| 10.1 Mögliche Störungen / Fehlerbehebung..... | 34 |
| 10.2 Nach Störungen | 34 |
| 10.3 Entsorgung | 34 |
| 11 Technische Daten | 35 |
| 12 Erfüllung der gesetzlichen und normativen Anforderungen | 35 |
| 13 Gewährleistung, Haftung | 36 |
| 13.1 Gewährleistung | 36 |
| 13.2 Haftung..... | 36 |
| 13.3 Urheberrechtliche Bestimmungen..... | 37 |

1 PRODUKTÜBERSICHT CRAFTY+

1.1 Lieferumfang

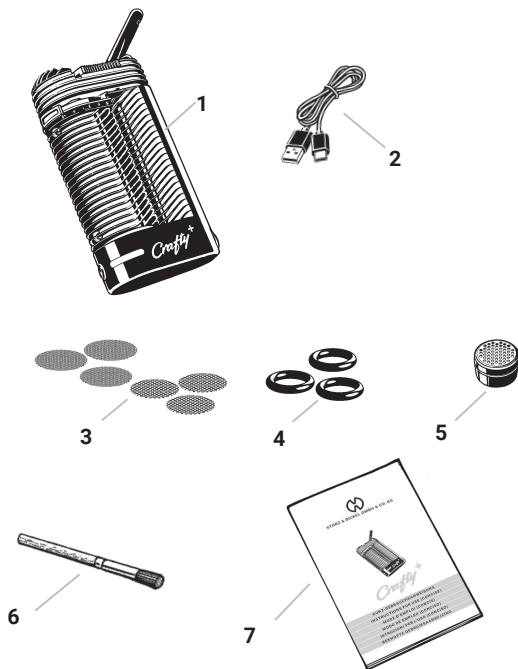

1 CRAFTY+ Verdampfer

2 1 St. USB-C Kabel

3 3 St. Normalieb, klein

3 St. Grobsieb, klein

4 3 St. Bodendichtring, klein

5 1 St. Dosierkapsel

6 1 St. Reinigungspinsel

7 1 St. Kurz-Gebrauchsanweisung

de

en

fr


es

it

nl

1 PRODUKTÜBERSICHT CRAFTY+

1.2 Funktionselemente

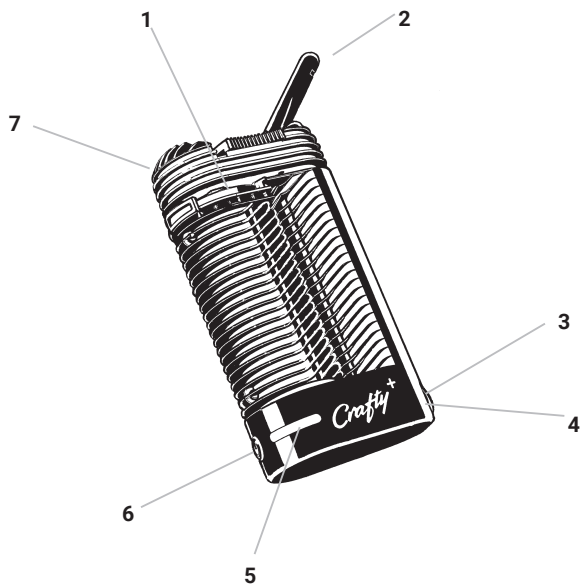

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 Füllkammer | 5 LED-Anzeige |
| 2 Mundstück | 6 Ein-/Ausschalter (ON/OFF) |
| 3 Füllkammerwerkzeug | 7 Kühlinheit |
| 4 USB-C Ladebuchse (hinter dem Füllkammerwerkzeug) | |

1.3 Service

Bei unvollständiger Lieferung, technischen Problemen, Fragen zum Gerät und dessen Entsorgung sowie in Gewährleistungsfällen unser Service Center kontaktieren: www.storz-bickel.com/contact

Für Serviceanfragen starten Sie bitte eine RMA (Return merchandise authorization) über unsere Homepage starten: www.storz-bickel.com/rma.

de

en

fr

es

it

nl

2.1 Zeichenerklärung

| | |
|---|--------------------|
|  | Aufzählungszeichen |
|  | Gefahrensymbol |
|  | Handlungsanweisung |
|  | Hinweis |

2.2 Symbolerklärung



Gebrauchsanweisung beachten!



Symbol für Hersteller - neben dem Symbol stehen Name und Adresse des Herstellers



Das Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Der Verdampfer enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der bei der Entsorgung entladen sein soll.



EU-Konformitätszeichen: Mit diesem Zeichen bestätigt der Hersteller die Übereinstimmung des Produkts mit den geltenden Richtlinien und Normen der Europäischen Union.

2 ZU IHRER SICHERHEIT



Sicherheit überprüft und Herstellung überwacht vom TÜV SÜD nach EN 60335-1, UL 499 und CAN/CSA 22.2 No. 64-M91.



Vorsicht! Heiße Oberfläche!



Vor Sonneneinstrahlung schützen.



Vor Nässe und Feuchtigkeit schützen.



Symbol für Seriennummer



Symbol für Referenznummer/Artikelnummer/SKU



Gleichstrom



Gerät der Schutzklasse II

de

en

fr

es

it

nl

2.3 Grundlegende Regeln

Diese Anweisungen sind aufzubewahren.

- ▶ Diese Gebrauchsanweisung ist ein wesentlicher Bestandteil des Verdampfers und muss dem Benutzer zugänglich gemacht werden.
- ▶ Die aktuelle ausführliche Version der Gebrauchsanweisung unter www.storz-bickel.com herunterladen.
- ▶ Diese Hinweise sorgfältig und vollständig durchlesen, bevor Verdampfer und USB-C Kabel in Betrieb genommen werden.
- ▶ Beim Gebrauch und der Wartung immer den Anweisungen dieser Gebrauchsanweisung folgen.
- ▶ Der Verdampfer ist nicht für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Verdampfers eingewiesen. Kinder dürfen den Verdampfer nicht benutzen.
- ▶ Wenn der Anwender an Atemwegen oder Lunge erkrankt ist, darf das Gerät nur nach Absprache und mit Zustimmung des behandelnden Arztes angewendet werden. Die Dämpfe können je nach Dichte Atemwege und Lunge reizen, was zu Husten führen kann.
- ▶ Den Verdampfer während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nur in genügender Entfernung von Wärmequellen (Ofen, Herd, Kamin, etc.) und an einem trockenen Ort, an dem die Umgebungstemperatur nicht unter +5 °C (+41 °F) abfallen kann, lagern und benutzen.
- ▶ Den Verdampfer keinen extremen Schwankungen der Umgebungstemperatur aussetzen. Durch Kondensationsfeuchte könnte die Funktionsfähigkeit gestört werden.
- ▶ Ausschließlich original STORZ & BICKEL Zubehör- und Ersatzteile verwenden.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht ungeeignet, falsch oder unvernünftig benutzen, da der Hersteller für hieraus entstehende Schäden keine Verantwortung übernimmt.
- ▶ Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, suchen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe auf. Flüssigkeit, die aus der Batterie austritt, kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

2.4 Sicherheitshinweise

2.4.1 Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag

- ▶ Nach dem Gebrauch, vor jeder Wartungsarbeit und bei Gewitter den Verdampfer ausschalten und das USB-C-Kabel vom Stromnetz trennen.
- ▶ Beachten, dass das USB-C Kabel nicht durch Knicke, Quetschungen oder Zug beschädigt wird.
- ▶ Kein Einsatz von Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht benutzen, sofern diese beschädigt sind. Reparaturen dürfen nur durch unser Service Center durchgeführt werden. Der Versuch, einen Schaden selbst zu beheben, führt zum Verlust der Gewährleistung. Unser Service Center ersetzt ein defektes USB-C Kabel.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht mit Nässe und Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel von Haustieren (z. B. Nagetieren) und Schädlingen fernhalten.
- ▶ Verdampfer und USB-C Kabel nicht in explosionsgefährdeter oder entzündlicher Atmosphäre benutzen.

2.4.2 Verletzungsgefahr durch Verbrennung / Dämpfe

- ▶ Heiße Oberflächen des Verdampfers (Füllkammer und Bereich um die Füllkammer), während des Betriebs und der Abkühlphase nicht berühren.
- ▶ Heißen Verdampfer nur auf einer festen und hitzeunempfindlichen Oberfläche ablegen und darauf achten, dass dieser nicht von Gegenständen abgedeckt wird.
- ▶ Den Verdampfer nicht in der Nähe von entzündlichen Gegenständen wie z. B. Vorhängen, Tischdecken oder Papier benutzen.
- ▶ Geräteöffnungen des Verdampfers während des Betriebs und der Abkühlphase nicht zuhalten, abdecken oder verstopfen.
- ▶ Vor Einschalten des Verdampfers sicherstellen, dass alle Dämpfe, z. B. von entzündlichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verdunstet sind.

de

en

fr

es

it

nl

2 ZU IHRER SICHERHEIT

2.4.3 Verletzungsgefahr durch verschiedene Ursachen

- ▶ Die Verpackungselemente (Plastiksäcke, Styroporteile, Kartons, etc.) dürfen Kindern nicht zugänglich gemacht werden, da sie eine potenzielle Gefahr darstellen.
 - ▶ Darauf achten, dass Kleinteile des Verdampfers nicht verschluckt werden.
 - ▶ Auf die Gefahr der Strangulation durch das USB-C Kabel achten.
 - ▶ Verdampfer nur mit den empfohlenen, zu verdampfenden Kräutern und Pflanzenteilen benutzen.
- ▶ Symptome (z. B. Husten, Kurzatmigkeit, Schmerzen im Brustkorb) während oder nach der Verwendung beachten und umgehend einen Arzt aufsuchen, wenn Bedenken der Gesundheit bestehen.

3 ZWECKBESTIMMUNG

Der Verdampfer dient zur Erzeugung von Düften bzw. Aromen aus den in Kapitel 4 aufgeführten Kräutern und Pflanzenteilen.

Durch Verdampfung mittels Heißluft werden die Düfte und Aromen gelöst und können direkt eingeatmet werden.

Der Verdampfer ist kein Medizinprodukt.

4 PFLANZENÜBERSICHT

- ▶ Verdampfen Sie nur Düfte und Aromen aus den hier aufgeführten Pflanzenmaterialien und die nach den Richtlinien des Europäischen Arzneibuches (oder vergleichbar) unter anderem auf Echtheit, Reinheit und Krankheitserreger geprüft wurden.
- i** Der Verdampfer ist nicht für die Verwendung mit Tabak- oder Nikotinerzeugnissen vorgesehen.
 - ▶ Erwerben Sie diese Pflanzen bzw. Pflanzenteile in der Apotheke.
 - i** Jeder andere Einsatz ist ungeeignet und potenziell gefährlich.

4 PFLANZENÜBERSICHT

| Pflanzenname | Botanischer Name | Verwendeter Pflanzenteil | Temperatur-einstellung |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Eukalyptus | <i>Eucalyptus globulus</i> | die Blätter | 130°C |
| Hopfen | <i>Humulus lupulus</i> | die Zapfen | 154°C |
| Kamille | <i>Matriarca chamomilla</i> | die Blüten | 190°C |
| Lavendel | <i>Lavandula angustifolia</i> | die Blüten | 130°C |
| Zitronenmelisse | <i>Melissa officinalis</i> | die Blätter | 142°C |
| Salbei | <i>Salvia officinalis</i> | die Blätter | 190°C |
| Thymian | <i>Thymus vulgaris</i> | das Kraut | 190°C |

5 EINFLUSSFAKTOREN BEIM VERDAMPFEN

Beachten Sie die folgenden Hinweise, damit Sie den Verdampfer mit dem von Ihnen verwendeten Pflanzenmaterial für Ihre persönlichen Bedürfnisse optimal einstellen können.

Die Menge der gelösten Aromen und Düfte wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

1. Qualität: Der Anteil der im jeweiligen Pflanzenmaterial enthaltenen verdampfbaren Aromen und Düfte.
2. Quantität: Die Menge des in der Füllkammer durchströmten Verdampfungsgutes.
3. Oberfläche: Je feiner die Pflanzen zerkleinert sind, desto größer wird die Oberfläche von der sich die Aromen und Düfte beim Verdampfungsprozess lösen können.

4. Temperatur: Je höher die Temperatur, desto mehr Aromen und Düfte werden auf einmal gelöst. Eine Temperaturerhöhung sollte immer letztes Mittel sein, da das Pflanzenmaterial bei höheren Temperaturen einen weniger angenehmen Geschmack hat.

Sie können den Verdampfungsvergang mit gleichem Füllkammerinhalt so oft wiederholen, bis bei Höchsttemperatur keine Dämpfe mehr gebildet werden.

6.1 Auspacken

- ▶ Prüfen Sie den Verdampfer anhand des Kapitels 1.1 „Lieferumfang“, Seite 7 auf dessen Vollständigkeit.

6.2 Netzanschluss

- ▶ Prüfen Sie den Verdampfer und das USB-C Kabel auf äußerlich erkennbare Beschädigungen.

6.3 Laden des Akkus

- ▶ Laden Sie vor dem ersten Gebrauch den Akku voll auf.
- ▶ Den Verdampfer über das im Lieferumfang enthaltene USB-C Kabel mit einem USB-Ladegerät verbinden.

i Der Ladevorgang wird durch kurzes Aufleuchten der LED-Anzeige (grün/rot/blau) und Vibration quittiert.

i Der Akkuladestatus wird durch das blaue Leuchten der LED-Anzeige signalisiert.

Erläuterungen zur Akkuanzeige während des Ladevorgangs:

- ▶ Blaues Dauerlicht: Der Akku ist vollgeladen.
- ▶ Blaues langsames Blinken: Der Akku ist zu ca. 61–96 % geladen.

- ▶ Blaues schnelles Blinken: Der Akku ist zu ca. 31–60 % geladen.
- ▶ Blaues Blitzen: Der Akku ist bis zu ca. 30 % geladen.

Erläuterungen zur Akkuanzeige nach dem Ausschalten:

- ▶ Blaues Dauerlicht: Der Akku ist zu ca. 64–100 % geladen.
- ▶ Blaues langsames Blinken: Der Akku ist zu ca. 32–63 % geladen.
- ▶ Blaues schnelles Blinken: Der Akku ist zu ca. 1–31 % geladen.
- ▶ Blaues Blitzen: Der Akku ist leer.
- ▶ Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs zuerst das USB-C Kabel von der Energiequelle und dann vom Verdampfer.

i Sie können den Verdampfer nicht betreiben, während er mit dem USB-C Kabel an einer Energiequelle angeschlossen ist. Erst nach erfolgter Teilladung können Sie diesen wieder einschalten.


HINWEIS

Gewährleistungsverlust / Sachschaden bei selbständigem Akkuwechsel


Bei unsachgemäßem Öffnen
des Verdampfers wird dieser
beschädigt.

- **Akku-Austausch nur durch
unser Service Center**

6.4 Befüllen der Füllkammer

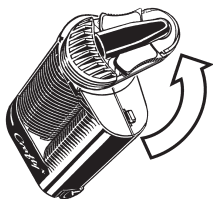

- ▶ Schrauben Sie die Kühleinheit
durch eine 90° Drehung entgegen
dem Uhrzeigersinn vom Verdampfer
ab.

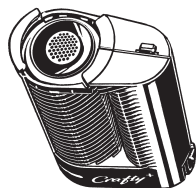

- ▶ Befüllen Sie die Füllkammer mit
zerkleinertem Pflanzenmaterial voll-
ständig bis zum Kunststoffrand.
- i** Zu stark komprimiertes Pflan-
zenmaterial oder eine überfüllte
Füllkammer erschweren das Einat-
men.
- ▶ Entfernen Sie überschüssiges
Pflanzenmaterial um den Einfüll-
stutzen herum.
- ▶ Setzen Sie die Kühleinheit durch
eine 90° Drehung im Uhrzeigersinn
auf den Verdampfer auf.

6.5 Aufheizen

6.5.1 Werkseinstellungen

Der Verdampfer bietet drei vom Werk
voreingestellte Temperaturniveaus an:

Basis-Temperatur: 180 °C (356 °F)

Booster-Temperatur: +15 °C (27 °F)
(in Bezug auf die Basis-Temperatur)
entspricht 195 °C (383 °F)

Superbooster-Temperatur: +30 °C
(54 °F) (in Bezug auf die Basis-Tempe-
ratur) entspricht 210 °C (410 °F)

de

en

fr

es

it

nl

i Basis-Temperatur, Booster-Temperatur sowie die Superbooster-Temperatur können über die Web-App geändert werden. Siehe hierzu Kapitel 8. „Storz & Bickel Web App“, Seite 25.

i Sollte ein Temperaturniveau nicht mehr ausreichend sein, wechseln Sie wie unten beschrieben auf das nächste Niveau.

6.5.2 Basis-Temperatur

► Den orangefarbenen Ein-/Ausschalter (ON/OFF) mindestens eine halbe Sekunde drücken.

i Eine Vibration quittiert das Einschalten und das rote Dauerlicht der LED-Anzeige signalisiert das Aufheizen. Bei vollgeladenem Akku dauert das Aufheizen ca. 60-80 Sekunden. Eine Doppelvibration und grünes Dauerlicht signalisieren das Erreichen der Basis-Temperatur.

6.5.3 Booster-Temperatur

► Doppelklick auf den orangefarbenen Ein-/Ausschalter (ON/OFF).

i Die LED-Anzeige signalisiert durch rotes Blinken das Aufheizen. Eine Doppelvibration und grünes Blinken signalisieren das Erreichen der Booster-Temperatur.

i Der Booster-Modus endet nach Erreichen der Booster-Temperatur

nach 90 Sekunden automatisch; die Solltemperatur ist anschließend wieder die Basis-Temperatur.


6.5.4 Superbooster-Temperatur

► Dreifachklick auf den orangefarbenen Ein-/Ausschalter (ON/OFF).

i Die LED-Anzeige signalisiert durch schnelles rotes Blinken das Aufheizen. Eine Doppelvibration und schnelles grünes Blinken signalisieren das Erreichen der Superbooster-Temperatur.

i Der Superbooster-Modus endet nach Erreichen der Superbooster-Temperatur nach 90 Sekunden automatisch; die Solltemperatur ist anschließend wieder die Basis-Temperatur.

6.6 Anwendung

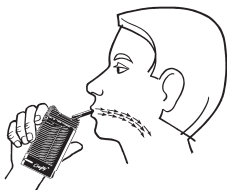

- i** Beginnen Sie nach Abschluss des Aufheizens mit der Verdampfung.
- ▶ Klappen Sie das Mundstück der Kühleinheit aus.
- ▶ Nehmen Sie das Mundstück zwischen die Lippen.
- ▶ Atmen Sie einige Sekunden gleichmäßig und nur halb so viel ein, wie Sie eigentlich könnten.
- ▶ Halten Sie die Luft einige Sekunden an und atmen Sie dann langsam aus.
- ▶ Konzentrieren Sie sich ganz bewusst auf den Atemvorgang
- i** Je intensiver der Dampf, desto mehr wird der Geschmack beeinträchtigt.

VORSICHT

Gesundheitliche Probleme durch Einatmen der Dämpfe

Husten

- **keine Anwendung bei Erkrankung der Atemwege/Lunge**

6.7 Ende der Anwendung

VORSICHT

Heiße Oberfläche der Füllkammer

Verbrennungsgefahr

- **Füllkammer nicht berühren, solange der Verdampfer noch nicht abgekühlt ist.**
- ▶ Orangefarbenen Ein-/Ausschalter (ON/OFF) mindestens eine halbe Sekunde drücken.
- i** Der Verdampfer quittiert das Ausschalten durch Vibration.
- ▶ Lassen Sie den Verdampfer vollständig abkühlen.
- ▶ Falls erforderlich, Reinigung des Verdampfers, wie in Kapitel 7 „Reinigen“ ab Seite 20 beschrieben, vornehmen.

de

en

fr

es

it

nl

6.8 Automatische Abschaltung

- i** Zwei Minuten nach dem letzten Tastendruck oder der letzten Anwendung schaltet sich der Verdampfer automatisch ab, um den Akkuladezustand zu schonen. Das Abschalten wird durch Vibration und Anzeige des Ladezustandes quittiert.
- i** Durch kurzes Drücken des Ein-/Ausschalters (ON/OFF) während des Betriebs setzen Sie die Abschaltautomatik auf zwei Minuten zurück.

6.9 Aufbewahrung

- ▶ Bewahren Sie den Verdampfer und das USB-C Kabel an einem trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern oder unbefähigten Personen auf.

7 REINIGEN

de

en

fr

es

it


nl

7.1 Kühleinheit

i Kühleinheit und Mundstück müssen frei von Ablagerungen sein. Diese entstehen durch Dampfkondensat im Innern der Kühleinheit. Kontrollieren Sie deshalb Kühleinheit und Mundstück vor jeder Anwendung.

i Reinigen Sie die Kühleinheit einschließlich Mundstück regelmäßig sowie bei Benutzung durch mehrere Personen. Sauberkeit ist eine Voraussetzung für einwandfreie Funktion.Funktion und Geschmack.


7.1.1 Produktübersicht

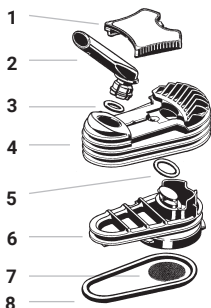

- 1 Deckelriegel
- 2 Mundstück
- 3 Mundstückdichtring
- 4 Kühleinheitdeckel
- 5 Bodendichtring klein
- 6 Kühleinheitboden
- 7 Oberes Sieb (grobe Maschenweite)
- 8 Bodendichtring groß

7.1.2 Zerlegen


i Stellen Sie sicher, dass der Vaporizer vollständig abgekühlt ist.

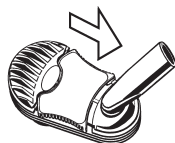

- ▶ Ziehen Sie den Deckelriegel Richtung Mundstück.



- ▶ Ziehen Sie den Kühleinheitdeckel vom Verdampfer ab.

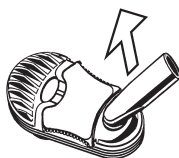

- ▶ Ziehen Sie das Mundstück unter leichtem Hin- und Herkippen aus dem Kühleinheitdeckel heraus.
- ▶ Ziehen Sie den Mundstückdichtring ab.

7 REINIGEN



- ▶ Bei Reinigung des Kühleinheitdeckels in Isopropylalkohol, den Deckelriegel entfernen.
- ▶ Zunächst den Deckelriegel an einer Seite andrücken und an der gegenüberliegenden Seite hochziehen.



- ▶ Anschließend den Deckelriegel an der hochgezogenen Seite in Richtung der gegenüberliegenden Seite schieben.


- i** Beim Signet-Hologramm auf dem Deckelriegel handelt es sich um einen Aufkleber.



- ▶ Schrauben Sie den Kühleinheitboden durch eine 90° Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn vom Verdampfer ab.



- ▶ Hebeln Sie den großen Bodendichtring mit dem Füllkammerwerkzeug an der Aussparung in der Nut aus.
- ▶ Nehmen Sie den kleinen Bodendichtring ab.

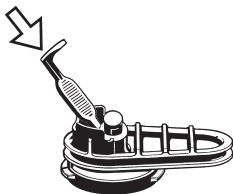

- ▶ Sieb mit Hilfe des Füllkammerwerkzeugs aus Kühleinheitboden herausdrücken.

7.1.3 Reinigen

**VORSICHT**

**Isopropylalkohol ist brennbar
und leicht entzündlich**

Verbrennungsgefahr

- **Sicherheitshinweise des Herstellers des Isopropylalkohols beachten!**

- i** Für die manuelle Reinigung eignen sich der Reinigungspinsel sowie Wattestäbchen und Papier- oder Baumwolltücher. Als Lösungsmittel empfehlen wir Isopropylalkohol oder warmes Spülwasser.



- ▶ Legen Sie alle Teile der Kühleinheit (außer Deckelriegel) sowie das Füllkammersieb max. 1/2 Stunde in Isopropylalkohol ein.
- i** Länger andauernder Kontakt mit Isopropylalkohol kann zu Farbveränderungen bzw. Versprödung der Kunststoffteile führen.

- ▶ Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen.
- ▶ Prüfen Sie alle Teile auf beschädigte Oberflächen, Rissbildung, Erweichung, Verhärtung, Verschmutzungen oder Verfärbungen.
- ▶ Beschädigte Teile ersetzen.
- ▶ Falls erforderlich, reinigen Sie den Deckelriegel mit warmem Spülwasser oder wischen diesen mit Isopropylalkohol ab.

HINWEIS**Sachschaden durch unsachgemäße Reinigung**

Aufkleber mit Signet-Hologramm kann ausbleichen und dessen Klebstoff sich auflösen

- **längerer Kontakt mit Isopropylalkohol vermeiden**

- i** Das optionale Zubehör Kräutermühle, Füllhilfe und Magazin dürfen nicht in Isopropylalkohol eingelegt werden. Reinigen Sie diese Teile mit warmem Spülwasser.

7.1.4 Zusammenbau

- ▶ Bauen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge zusammen.
- i** Achten Sie beim Zusammenbau auf den richtigen Sitz der Dichtringe. Insbesondere der kleine Bodendichtring muss vollständig und nicht mehr sichtbar im Kühleinheitdeckel sitzen.

de

en

fr

es

it

nl

- ▶ Setzen Sie das obere Sieb sorgfältig in die dafür vorgesehene Nut ein.

i Bei Nichtbeachtung können Pflanzenpartikel in die Kühleinheit gelangen, diese verstopfen oder eingeatmet werden.

7.2 Siebe

- ▶ Reinigen Sie nach jeder Nutzung die Siebe mit dem beiliegenden Reinigungspinsel.

7.3 Füllkammer

i Die Reinigung der Füllkammer ist erforderlich, sobald das untere Sieb verstopft ist.

7.3.1 Ausbau des unteren Siebs

- ▶ Entfernen Sie das untere Sieb, indem Sie es mit Hilfe des Füllkammerwerkzeugs entlang der Nut der Füllkammer eindrücken. Dadurch wird das untere Sieb gewölbt und löst sich aus der Nut.

7.3.2. Reinigen

- ▶ Reinigen Sie die Füllkammer mit einem mit Isopropylalkohol getränktem Wattestäbchen.
- i** Achten Sie darauf, dass kein Isopropylalkohol in das Innere des Geräts tropft.

7.3.3 Einbau des unteren Siebs

- ▶ Wölben Sie das untere Sieb.
- ▶ Setzen Sie das untere Sieb mit der gewölbten Seite nach oben in die Füllkammer ein.
- ▶ Drücken Sie das Sieb mit Hilfe des Füllkammerwerkzeugs flach in die vorgesehene Nut.

7.4 Verdampfer und USB-C Kabel

HINWEIS

Sachschaden durch unsachgemäße Reinigung

Wasser kann eindringen und Verdampfer oder USB-C Kabel beschädigen

- **Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.**
- **Nicht mit direktem Wasser-, Dampf- oder Druckluftstrahl reinigen**

- ▶ Trennen Sie das USB-C Kabel von der Energiequelle.
- ▶ Schalten Sie den Verdampfer aus.
- ▶ Reinigen Sie das Gehäuse des Verdampfers und das USB-C Kabel nur trocken oder allenfalls mit einem feuchten weichen Tuch.

Die Storz & Bickel Web App ist für den Betrieb des Verdampfers nicht notwendig, erlaubt jedoch individuelle Einstellungen und das Ablesen von zusätzlichen Informationen im Betrieb mit dem Verdampfer. Der Verdampfer wird hierzu per Bluetooth® mit einem Smartphone verbunden.

8.1 Werkseinstellungen

Basis-Temperatur: 180°C (356 °F)

Booster-Temperatur: +15°C (+27 °F)
(in Bezug auf die Basis-Temperatur)
entspricht 195°C (383 °F)

Superbooster-Temperatur:
+30°C (+54 °F) (in Bezug auf die
Basis-Temperatur) entspricht 210°C
(410 °F)

| | |
|-----------------------------------|------|
| LED-Anzeige | |
| Helligkeit CRAFTY ⁺ : | 100% |
| Ladeanzeige CRAFTY ⁺ : | ON |
| Vibration CRAFTY ⁺ : | ON |
| Vibration Smartphone: | OFF |
| Alarmton Smartphone: | OFF |

8.2 Verbindungsaufbau des Verdampfers mit einem Smartphone

- Schalten Sie das Smartphone ein und vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth®-Funktion eingeschaltet ist und nicht von einem anderen

Bluetooth®-Gerät blockiert wird. Schalten Sie dann den Verdampfer ein und öffnen Sie einen Browser, der Bluetooth®-Verbindungen unterstützt (mehr Informationen unter www.storz-bickel.com/app/web). Rufen Sie app.storz-bickel.com auf. Klicken Sie auf „Verbinden“ und wählen Sie Ihren Verdampfer aus.

8.3 Menüpunkte der STORZ & BICKEL Web App

Temperatur

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die eingestellten und die tatsächlichen Temperaturen abzulesen und Temperatureinstellungen durchzuführen. Außerdem finden Sie hier auch die Ladeanzeige des Verdampfers.

Gerät

In diesem Abschnitt finden Sie gerätebezogene Informationen wie Betriebsstunden, Softwareversionen usw.

Welche zusätzlichen gerätespezifischen Funktionen über die STORZ & BICKEL Web App eingestellt werden können, erfahren Sie hier: <https://www.storz-bickel.com/app/web>

Informationen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie z. B. die Pflanzenlisten, das Quick Start Manual, die Gebrauchsanweisung, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Datenschutzerklärung aber auch direkte Links auf die STORZ & BICKEL Homepage oder zum Onlineshop.

8.4 Temperatureinstellung mit der STORZ & BICKEL Web App

- i** Neben den drei vom Werk voreingestellten Temperaturniveaus können Sie auch individuell Temperaturen zwischen 40°C und 210°C einstellen (siehe Kapitel 4 „Pflanzenübersicht“, Seite 14).
- ▶ Drücken Sie kurz die obere Plus-taste, um den Soll-Wert in 1-Grad-Schritten zu erhöhen.
- ▶ Drücken Sie kurz die obere Minus-taste, um den Soll-Wert in 1-Grad-Schritten zu verringern.
- ▶ Drücken Sie die Plus- oder Minus-taste dauerhaft, damit die Soll-Werte stetig in die entsprechende Richtung laufen.
- i** Die aktuelle Temperatur (Ist-Temperatur) kann am Display in der oberen Zeile abgelesen werden.
- i** Die Booster- bzw. Superbooster-temperatur wird immer auf die Basis- bzw. Booster-Temperatur addiert. Zusätzlich kann die Graddifferenz zwischen Basis-Tem-

peratur und Booster-Temperatur durch die unteren Plus- und Minus-tasten gradgenau angepasst werden. Die Graddifferenz zwischen Booster- und Superbooster-Temperatur ist fix und beträgt immer +15°C. Dabei können insgesamt 210°C nicht überschritten werden.

Fahrenheit/Celsius

- ▶ Tippen Sie die Plus- und die Minustaste gleichzeitig an, um die Anzeige von Grad Celsius auf Grad Fahrenheit umzustellen.

Ladeanzeige



- i** Die Ladeanzeige zeigt ein Akkusymbol mit sechs Ladestatusfeldern. Je nach Ladezustand sind mehr oder weniger Ladestatusfelder zu sehen.
- ▶ voller Akku: Anzeige aller sechs Ladestatusfelder.
- ▶ fast leerer Akku: blinkender Akkurahmen
- ▶ Laden: blinkende Ladeanzeige und Anzeige des aktuellen Ladezustands.

8.5 Reset auf Werkseinstellungen

Einstellungen, welche Sie über die STORZ & BICKEL Web App geändert haben, können Sie wie folgt zurücksetzen:

- ▶ Schalten Sie den Verdampfer ein.
- ▶ Orangefarbenen Ein-/Ausschalter (ON/OFF) 10 Sekunden drücken. Der Reset wird durch Lauflicht: rot/grün/blau/rot/grün/blau/rot/grün/blau und gleichzeitiger Vibration quittiert.

Verschleißteile Set - SKU 06 02 CY

Das Verschleißteile Set enthält alle benötigten Ersatzteile, um die Kühleinheit zu erneuern.

Kühleinheiten, 3 Stück - SKU 03 05 CY /

Kühleinheit - SKU 03 04 CY

Die Kühleinheit kühlt den Dampf ab und bietet so eine angenehme Temperatur und ein optimales Aroma. Um die Sauberkeit der Kühleinheit zu gewährleisten, ist diese regelmäßig auszutauschen. Das Mundstück ist bei der Kühleinheit enthalten.

Mundstücke, 4 Stück - SKU 11 72

Das Mundstück wird auf die Kühleinheit aufgesetzt.

Deckelriegel, 3 Stück - SKU 11 53

Der Deckelriegel fixiert den Deckel mit dem Boden der Kühleinheit.

Siebe Set, klein - SKU 11 12

Das Set beinhaltet vier Siebe mit grober Maschenweite für die Kühleinheit und zwei Siebe mit normaler Maschenweite für die Füllkammer.

Grobsiebe, klein, 6 Stück - SKU 11 40

Das kleine Sieb mit grober Maschenweite wird in den Kühleinheitboden eingesetzt.

Normalsiebe, klein, 6 Stück - SKU 11 03

Das kleine Sieb mit normaler Maschenweite wird in den Kühleinheitdeckel eingesetzt.

Dichtring Set - SKU 06 01 CY

Das Set beinhaltet alle benötigten Dichtringe für die Kühleinheit und die Füllkammer.

Kräutermühle - SKU 11 84 /

Kräutermühle XL - SKU 11 85

Die Kräutermühle verfügt über extra scharfe Schneidezähne für fein gemahlene Kräuter.

Füllhilfe - SKU 11 95

Die Füllhilfe ermöglicht wie in Kapitel 8.1. beschrieben ein sauberes Einfüllen des zerkleinerten Pflanzenmaterials in die Füllkammer.

Füllkammerwerkzeuge, 5 Stück - SKU 11 59

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Füllkammerwerkzeugs sind in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben.

Dosierkapseln, 40 Stück - SKU 09 33

Zerkleinertes Pflanzenmaterial kann in die Dosierkapseln abgefüllt werden. Dosierkapseln nach Gebrauch im Hausmüll entsorgen.

Dosierkapsel-Magazin - SKU 09 32

Gefüllte Dosierkapseln werden im Magazin gelagert. Der Magazindeckel dient als Einfüllhilfe für die Dosierkapseln.

Dosierkapsel-Füllset - SKU 09 45

Mit dem Füllset können 40 Dosierkapseln gleichzeitig mit zerkleinertem Pflanzmaterial befüllt werden.

Reinigungspinsel, 3 Stück- SKU 11 24

Der Reinigungspinsel dient u.a. zur Reinigung der Füllkammer.

12 Volt Ladegerät - SKU 01 09 CY

Ladegerät zum Aufladen des Akkus.

Dieses und weiteres Zubehör sowie detaillierte Informationen hierzu finden Sie unter <https://www.storz-bickel.com>



de

en

fr

es

it

nl


9 OPTIONALES ZUBEHÖR

9.1 Kräutermühle



- ▶ Legen Sie das Pflanzenmaterial zwischen die beiden Mühlschalen der Kräutermühle.
- ▶ Schließen Sie die Kräutermühle.
- ▶ Drehen Sie die Kräutermühle mehrmals hin und her.

9.2 Füllhilfe

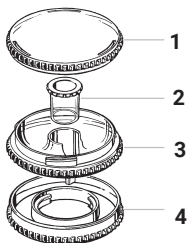

- 1 Oberer Deckel
- 2 Stopfen
- 3 Schale
- 4 Unterer Deckel

i Die Füllhilfe dient zum einfachen und sauberen Befüllen der Füllkammer. In der Schale der Füllhilfe können Sie zerkleinerte Pflanzenmaterial aufbewahren.

9.2.1 Befüllen der Füllhilfe



- ▶ Schrauben Sie den oberen Deckel entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
- ▶ Befüllen Sie die Schale inkl. Stopfen mit zerkleinertem Pflanzenmaterial.
- ▶ Setzen Sie den oberen Deckel durch eine Drehung im Uhrzeigersinn auf.

9.2.2 Befüllen der Füllkammer mit der Füllhilfe

- ▶ Schrauben Sie die Kühleinheit durch eine 90° Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn vom Verdampfer ab.
- ▶ Entfernen Sie mit Hilfe des Füllkammerwerkzeugs eventuelle Reste aus der Füllkammer.
- ▶ Schrauben Sie den unteren Deckel der Füllhilfe im Uhrzeigersinn ab.

9 OPTIONALES ZUBEHÖR

- ▶ Setzen Sie die Füllhilfe durch eine 90° Drehung im Uhrzeigersinn auf den Verdampfer auf.
- ▶ Schrauben Sie den oberen Deckel der Füllhilfe entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
- ▶ Ziehen Sie den Stopfen aus der Füllhilfe heraus.




- ▶ Schieben Sie eine Portion Pflanzenmaterial durch die zentrale Öffnung in die Füllkammer.

- i** Achten Sie darauf, dass die Füllkammer nicht überfüllt wird (siehe Kapitel 6.4 „Befüllen der Füllkammer“, Seite 17).



- i** Befüllen Sie die Füllkammer nur bis zum unteren Rand der Füllhilfe.
- ▶ Setzen Sie den Stopfen in die zentrale Öffnung ein.
- ▶ Setzen Sie den oberen Deckel durch eine Drehung im Uhrzeigersinn auf.
- ▶ Schrauben Sie die Füllhilfe durch eine 90° Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn vom Verdampfer ab.
- ▶ Setzen Sie den unteren Deckel durch eine Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Füllhilfe auf.
- ▶ Setzen Sie die Kühleinheit durch eine 90° Drehung im Uhrzeigersinn auf den Verdampfer auf.

9.3 Dosierkapseln (zur Einmalbenutzung) und Magazin

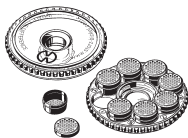

- i** Mit den als Zubehör erhältlichen Dosierkapseln können Sie auf Vorrat zerkleinertes Pflanzenmaterial abfüllen und im Magazin bis zur Verwendung aufbewahren.

de

en

fr

es

it

nl

9 OPTIONALES ZUBEHÖR

- i** Bei den Dosierkapseln handelt es sich um einen Einwegartikel. Entsorgen Sie diese nach der Benutzung im Restmüll.

9.3.1 Befüllen der Dosierkapseln



- ▶ Schrauben Sie den Magazindeckel entgegen dem Uhrzeigersinn ab.
- ▶ Setzen Sie den Magazindeckel auf die geöffnete Dosierkapsel.



- ▶ Schieben Sie eine Portion Pflanzenmaterial durch die zentrale Öffnung in die Dosierkapsel.
- ▶ Schließen Sie die Dosierkapsel mit deren Deckel.


9.3.2 Befüllen des Magazins mit Dosierkapseln

- ▶ Setzen Sie die befüllten Dosierkapseln in das Magazin ein.




- ▶ Schließen Sie das Magazin mit einer Drehung des Magazindeckels im Uhrzeigersinn.

9.3.3 Einsetzen der Dosierkapsel in die Füllkammer

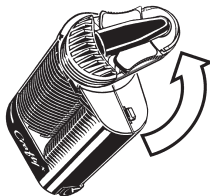

- ▶ Schrauben Sie die Kühleinheit durch eine 90° Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn vom Verdampfer ab.

9 OPTIONALES ZUBEHÖR

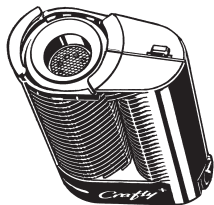

- ▶ Setzen Sie die Dosierkapsel mit dem Deckel nach oben in die Füllkammer des Verdampfers ein.
- ▶ Setzen Sie die Kühleinheit durch eine 90° Drehung im Uhrzeigersinn auf den Verdampfer auf.

de

en

fr

es

it

nl

10.1 Mögliche Störungen / Fehlerbehebung

| Störung | Mögliche Ursache / Behebung |
|--|--|
| Verdampfer lässt sich nicht einschalten | Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. |
| LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot/blau | Akkutemperatur ist entweder zu hoch oder zu niedrig. Lassen Sie den Verdampfer entweder abkühlen oder aufwärmen. |
| LED-Anzeige blitzt blau | Akku ist leer. Schließen Sie das Netzteil oder das Ladegerät an. |
| LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot/grün | Das USB-C Kabel ist nicht geeignet. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C Kabel. |
| LED-Anzeige blinkt abwechselnd rot/orange. | Der Verdampfer ist defekt. |

10.2 Nach Störungen

- ▶ Schalten Sie den Verdampfer sofort aus.
- ▶ Trennen Sie den Verdampfer von der Energiequelle.
- ▶ Wenden Sie sich direkt an unser Service Center.

10.3 Entsorgung

- ▶ Entsorgen Sie nach der Gewährleistungsfrist einen irreparablen Verdampfer über den Werkstoffkreislauf oder schicken Sie diesen zur Entsorgung an unser Service Center.

11 TECHNISCHE DATEN

CRAFTY+ Verdampfer:

Eingangsspannung: 5 V DC

Die Spannungsangabe befindet sich auch auf dem Typenschild des Verdampfers.

Leistungsaufnahme Verdampfer: 10 W max.

Betriebstemperatur: 5°C bis 35°C

Verdampfungstemperatur:

Wahlbereich zwischen ca. 40°C bis 210°C

Größe: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm

Gewicht: ca. 135 g

Technische Änderungen vorbehalten.

Patente und Geschmacksmuster: www.storz-bickel.com/patents

de

en

fr

es

it

nl

12 ERFÜLLUNG DER GESETZLICHEN UND NORMATIVEN ANFORDERUNGEN

Die Geräte erfüllen die Anforderungen folgender EG Richtlinien:

- IEC 60335
- EN 55011
- EN 61000-4-X



Hersteller:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Deutschland

13.1 Gewährleistung

Für S&B-Produkte, die direkt über S&B.com oder einen autorisierten Händler erworben wurden, gilt eine beschränkte Garantie von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum durch den Erstkäufer. Für Kunden in Kalifornien, die auf S&B.com kaufen, beginnt die beschränkte S&B-Garantie mit dem Datum der Lieferung an den Erstkäufer.

Mit Ausnahme des MIGHTY, CRAFTY+ und PLENTY gewährt S&B ein zusätzliches Jahr Garantie, wenn der Kunde das gekaufte S&B Produkt innerhalb von vier Wochen nach dem Kauf unter www.storz-bickel.com/registration registriert.

S&B gewährt nur für den MIGHTY+, CRAFTY+, VOLCANO HYBRID, VOLCANO CLASSIC, PLENTY, VENTY und MIGHTY („S&B Produkte“) eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch (wie unten definiert) für 2 Jahre ab dem Datum des Kaufs direkt auf S&B.com (oder ab dem Datum der Lieferung für Kunden in Kalifornien) oder des Kaufs bei einem autorisierten Händler (bitte besuchen Sie unsere Website).

Diese beschränkte Garantie gilt nicht für die kommerzielle Nutzung des Produkts, Schäden aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, unsachgemäßer Wartung oder Lagerung, normalem Verschleiß, generalüberholten Produkten oder nicht autorisierten Reparatu-

ren des Produkts.

Darüber hinaus erstreckt sich die beschränkte Garantie auf keinerlei andere Produkte als die S&B-Produkte und nicht auf: Zubehör oder Anbauteile oder Komponenten, insbesondere Batterien, Ballons, Kühleinheiten, Ladekabel und Adapter, die Füllkammer (VOLCANO), Schläuche, Siebe, Dosierkapseln und Zubehör, das mit diesen S&B-Produkten mitgeliefert wird.

Diese beschränkte Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

Alle Garantiebedingungen finden Sie hier: www.storz-bickel.com/legal/warranty

13.2 Haftung

STORZ & BICKEL haftet für durch unsere Produkte verursachte Schäden gegenüber dem Kunden gemäß den Vorschriften des deutschen Rechtes nach Maßgabe unserer AGB. Eine Haftung besteht demnach nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden, es sei denn, es handelt sich um Schäden an Leben, Körper und Gesundheit oder die Verletzung betrifft eine wesentlichen Vertragspflicht. In diesen Fällen haften wir dem Kunden gegenüber auch für einfache Fahrlässigkeit.

13.3 Urheberrechtliche Bestimmungen

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von STORZ & BICKEL weder ganz noch teilweise im Sinne der §§ 15 ff. UrhG verwendet werden.

de

en

fr

es

it

nl

| | |
|--|-------------|
| Table of Contents | page |
| 1 Product Overview CRAFTY+ | 41 |
| 1.1 Scope of Delivery..... | 41 |
| 1.2 Functional Elements..... | 42 |
| 1.3 Service..... | 43 |
| 2 For your Safety | 44 |
| 2.1 Symbols..... | 44 |
| 2.2 Explanation of Signs..... | 44 |
| 2.3 Basic Rules..... | 46 |
| 2.4 Safety Recommendations..... | 46 |
| 2.4.1 Risk of Injury due to electric Shock..... | 46 |
| 2.4.2 Danger of Injury due to Burning/Vapors... .. | 47 |
| 2.4.3 Risk of Injury due to various Causes..... | 47 |
| 3 Intended Use | 48 |
| 4 Overview of Plants | 48 |
| 5 Factors influencing Vaporization | 49 |
| 6 Commissioning and Operation | 50 |
| 6.1 Unpacking..... | 50 |
| 6.2 Power Connection | 50 |
| 6.3 Charging the Battery..... | 50 |
| 6.4 Filling the Filling Chamber | 51 |
| 6.5 Heating Up..... | 51 |
| 6.5.1 Default Settings..... | 51 |
| 6.5.2 Basic Temperature..... | 52 |
| 6.5.3 Booster Temperature | 52 |
| 6.5.4 Superbooster Temperature | 52 |
| 6.6 Application..... | 52 |
| 6.7 End of Application..... | 53 |
| 6.8 Automatic Switching Off | 53 |
| 6.9 Storage | 53 |

| | |
|---|-------------|
| Table of Contents | page |
| 7 Cleaning | 54 |
| 7.1 Cooling Unit..... | 54 |
| 7.1.1 Product Overview..... | 54 |
| 7.1.2 Disassembling..... | 54 |
| 7.1.3 Cleaning..... | 56 |
| 7.1.4 Reassembling..... | 56 |
| 7.2 Screens..... | 57 |
| 7.3 Filling Chamber..... | 57 |
| 7.3.1 Removing the lower Screen..... | 57 |
| 7.3.2 Cleaning..... | 57 |
| 7.3.3 Installing the lower Screen..... | 57 |
| 7.4 Vaporizer and USB-C Cable..... | 57 |
| 8 STORZ & BICKEL Web App | 58 |
| 8.1 Default Settings..... | 58 |
| 8.2 Connecting the Vaporizer with a Smartphone.... | 58 |
| 8.3 Menu Items of the STORZ & BICKEL Web App... | 58 |
| 8.4 Setting Temperature with the STORZ & BICKEL Web App..... | 58 |
| 8.5 Reset to Default Settings..... | 59 |
| 9 Optional Accessories | 63 |
| 9.1 Herb Mill..... | 62 |
| 9.2 Filling Aid..... | 62 |
| 9.2.1 Filling the Filling Aid..... | 62 |
| 9.2.2 Filling the Filling Chamber with the Filling Aid..... | 63 |

de

en

fr

es


it

nl

| | |
|--|-------------|
| Table of Contents | page |
| 9.3 Dosing Capsules (for single Use) and Magazin .. | 63 |
| 9.3.1 Filling the Dosing Capsules | 63 |
| 9.3.2 Filling the Magazine with Dosing Capsules..... | 64 |
| 9.3.3 Inserting the Dosing Capsule into the Filling Chamber..... | 64 |
| 10 Faults | 65 |
| 10.1 Possible Faults / Troubleshooting | 65 |
| 10.2 In Case of Faults..... | 65 |
| 10.3 Disposal..... | 65 |
| 11 Technical Specifications | 66 |
| 12 Compliance with legal and normative Requirements | 66 |
| 13 Warranty, Liability | 67 |
| 13.1 Warranty | 67 |
| 13.2 Liability | 67 |
| 13.3 Copyright..... | 68 |

1 PRODUCT OVERVIEW CRAFTY+

1.1 Scope of Delivery

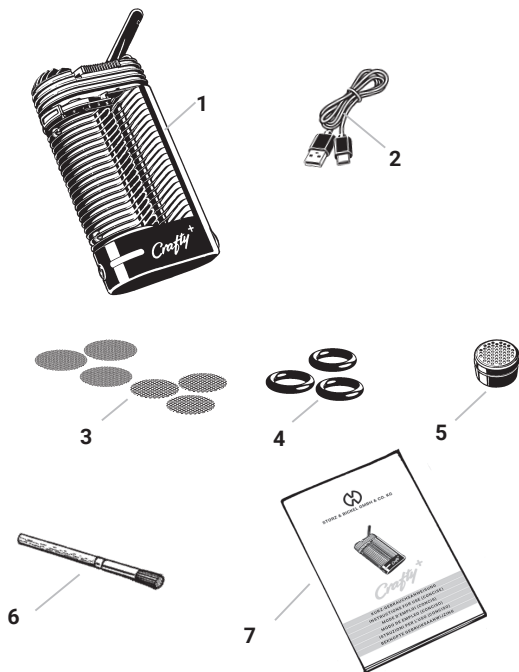

- 1 CRAFTY+ Vaporizer
- 2 1 pc. USB-C Cable
- 3 3 pcs. Normal Screen, small
3 pcs. Coarse Screen, small
- 4 3 pcs. Base Seal Ring, small

- 5 1 pc. Dosing Capsule
- 6 1 pc. Cleaning Brush
- 7 1 pc. Instruction for Use (concise)

de

en

fr


es

it

nl

1 PRODUCT OVERVIEW CRAFTY+

1.2 Functional Elements

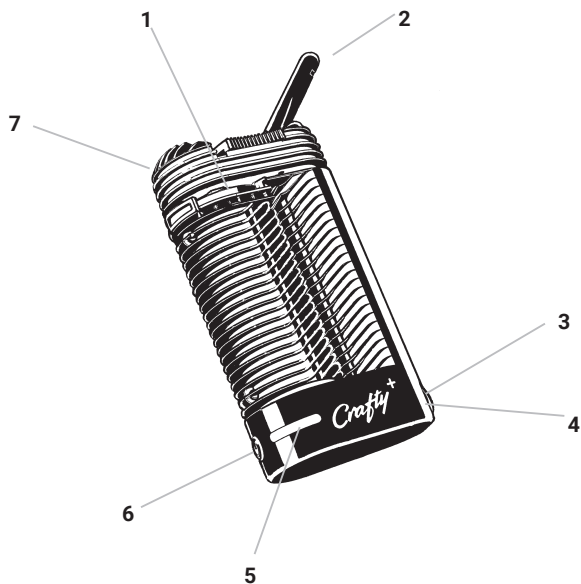

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| 1 | Filling Chamber | 5 | LED-Display |
| 2 | Mouthpiece | 6 | Power Button (ON/OFF) |
| 3 | Filling Chamber Tool | 7 | Cooling Unit |
| 4 | USB-C Charging Socket (behind the Filling Chamber Tool) | | |

1.3 Service

In case of incomplete delivery, technical problems, questions about the device and its disposal and in warranty cases please contact our Service Center: www.storz-bickel.com/contact.

For service inquiries, please start an RMA (Return merchandise authorization) via our homepage: www.storz-bickel.com/rma.

de

en

fr





es

it

nl

2 FOR YOUR SAFETY

2.1 Legend

| | |
|---|------------------------|
|  | Bullet points |
|  | Hazard symbol |
|  | Operating instructions |
|  | Note |

2.2 Explanation of Symbols



Please follow these instructions carefully!



Symbol for the manufacturer - the manufacturer's name and address are next to the symbol



The device may not be disposed of in normal household waste. The X on the trash can indicates the necessity of disposing of this device separately. The Vaporizer contains a built-in rechargeable lithium-ion battery that must be discharged before disposal.



EU conformity symbol: The manufacturer confirms with this symbol the compliance of the product with the applicable European directives and standards.

2 FOR YOUR SAFETY



Safety tested and production monitored by TÜEV SÜED according to EN 60335-1, UL 499 and CAN/CSA-22.2 No. 64-M91.



Caution! Hot surfaces!



Protect from direct sunlight.



Protect against moisture and humidity.



Symbol for serial number



Symbol for reference number/item number/sku



DC (direct current)



Safety Category II device

de

en

fr

es

it

nl

2 FOR YOUR SAFETY

2.3 Basic Rules

Save these instructions.

- ▶ These Instructions for Use are an integral part of the Vaporizer and must be made available to the user.
- ▶ Download the current detailed version of the Instructions for Use from www.storz-bickel.com.
- ▶ Read these instructions carefully and completely before operating the Vaporizer and USB-C Cable.
- ▶ Always follow the instructions in these Instructions for Use when using and servicing the device.
- ▶ This Vaporizer is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the Vaporizer by a person responsible for their safety. Children shall not handle the Vaporizer.
- ▶ If the user is suffering from respiratory tract or lung disease, the device may only be used after consultation and with the consent of the treating physician. Depending on their density, the vapors may irritate the respiratory tract and lungs, which may cause coughing.
- ▶ Do not leave the Vaporizer unattended while it is being operated.

- ▶ Store and use the Vaporize and USB-C Cable only at a sufficient distance from heat sources (oven, stove, fireplace, etc.) and in a dry place where the ambient temperature cannot drop below +5 °C (+41 °F).
- ▶ Do not expose the Vaporizer to extreme fluctuations in ambient temperature. Condensation humidity could interfere with the functionality.
- ▶ Only use original STORZ & BICKEL accessories and spare parts.
- ▶ Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

2.4 Safety Recommendations

2.4.1 Risk of Injury due to electric Shock

- ▶ The Vaporizer must be switched off and the USB-C cable must be disconnected from the power supply after use, before any maintenance work, and during thunderstorms.
- ▶ Make sure that the USB-C Cable is not damaged by bending, crushing or pulling.
- ▶ Do not use multiple sockets and/or extension cables.

2 FOR YOUR SAFETY

- ▶ Do not use the Vaporizer and USB-C Cable if they are damaged. Repairs may only be carried out by our Service Center. Attempting to repair damage yourself will invalidate the warranty. Our Service Center will replace a defective USB-C Cable.
- ▶ The Vaporizer and USB-C Cable must not be exposed to moisture and humidity.
- ▶ Keep the Vaporizer and USB-C Cable away from pets (e.g. rodents) and pests.
- ▶ Do not use the Vaporizer and USB-C Cable in a potentially explosive or flammable atmosphere.

2.4.2 Danger of Injury due to Burning/Vapors

- ▶ Do not touch hot surfaces of the Vaporizer (Filling Chamber and the area around the Filling Chamber) during operation and the cooling phase.
- ▶ Place the hot Vaporizer only on a solid and heat-resistant surface and make sure that it is not covered by any objects.
- ▶ Do not use the Vaporizer near inflammable objects such as curtains, tablecloths or paper.
- ▶ Do not close, cover or obstruct the openings of the Vaporizer during operation and the cooling phase.
- ▶ Before switching on the Vaporizer,

ensure that all vapors, e.g. from flammable cleaning agents and disinfectants, have evaporated.

2.4.3 Risk of Injury due to various Causes

- ▶ The packaging material (plastic bags, polystyrene parts, boxes etc.) must be kept out of the reach of children as it is a potential source of danger.
- ▶ Be careful that small parts of the Vaporizer are not swallowed.
- ▶ Be aware of the danger of strangulation through the USB-C Cable.
- ▶ Only use the Vaporizer with the recommended herbs and plant parts to be vaporized.
- ▶ Monitor your symptoms (e.g., cough, shortness of breath, chest pain) during or after the usage and promptly seek medical attention if you have concerns about your health.

de

en

fr

es

it

nl

3 INTENDED USE

The Vaporizer is used to produce fragrances or aromas from the herbs and plant parts listed in Chapter 4. The scents and aromas are released by means of vaporization with hot air and can be inhaled directly.

The Vaporizer is not for medical-therapeutic purposes.

4 OVERVIEW OF PLANTS

- ▶ Only vaporize fragrances and aromas from the plant materials listed here and which have been tested for authenticity, purity and pathogens according to the guidelines of the European Pharmacopoeia (or comparable).
- ▶ Purchase these plants or plant parts in your pharmacy.
- i** The Vaporizer is not intended for the use of tobacco or nicotine-related products.
- i** Any other use is inappropriate and potentially dangerous.

| Plant name | Botanical name | Portion of the plant used | Temperature setting |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Eucalyptus | <i>Eucalyptus globulus</i> | the leaves | 130°C (266°F) |
| Hops | <i>Humulus lupulus</i> | the cones | 154°C (309°F) |
| Chamomile | <i>Matriarca chamomilla</i> | the blossoms | 190°C (374°F) |
| Lavender | <i>Lavandula angustifolia</i> | the blossoms | 130°C (266°F) |
| Lemon balm | <i>Melissa officinalis</i> | the leaves | 142°C (288°F) |
| Sage | <i>Salvia officinalis</i> | the leaves | 190°C (374°F) |
| Thyme | <i>Thymus vulgaris</i> | the herb | 190°C (374°F) |

5 FACTORS INFLUENCING VAPORIZATION

Please follow these instructions so that you can adjust the Vaporizer with the plant material you use to suit your personal needs.

The amount of aromas and fragrances released can be influenced by the following factors:

1. **Quality:** The amount of aroma or fragrance contained in the respective plant material that can be vaporized.
2. **Quantity:** The amount of vaporization material in the filling chamber.
3. **Surface:** The finer the plant is ground, the greater the surface and the more aromas and fragrances can be released during the vaporization cycle.
4. **Temperature:** The higher the temperature, the more aromas and scents are released at once. An increase in temperature should always be a last resort, as the plant material has a less pleasant taste at higher temperatures.

You can repeat the vaporization process with the same contents of the filling chamber until vapor is no longer produced at maximum temperature.

de

en

fr

es

it

nl

6 COMMISSIONING AND OPERATION

6.1 Unpacking

- ▶ Check the Vaporizer according to Chapter 1.1 "Scope of Delivery", page 41 for completeness.

6.2 Power Connection

- ▶ Check the Vaporizer and the USB-C Cable for externally visible damage.

6.3 Charging the Battery

- ▶ Fully charge the battery before first use.
- ▶ Connect the Vaporizer to a USB-C charger using the USB-C cable supplied.

i The charging process is acknowledged with a short illumination of the LED display (green/red/blue) and vibration.

i The battery charge status is signaled by the blue light on the LED display.

Explanations on the battery display during the charging operation:

- ▶ Steady blue light: the battery is fully charged.
- ▶ Blue, slowly blinking: the battery is between 61 and 96% charged.
- ▶ Blue, rapidly blinking: the battery is between 31 and 60% charged.
- ▶ Blue flashing: the battery is up to 30% charged.

Explanations of the battery display following switch off:

- ▶ Steady blue light: the battery is between 64 and 100% charged.
- ▶ Blue, slowly blinking: the battery is between 32 and 63% charged.
- ▶ Blue, rapidly blinking: the battery is between 1 and 31% charged.
- ▶ Blue flashing: the battery is completely discharged.


When charging is complete, disconnect the USB-C Cable from the power source first and then disconnect it from the Vaporizer.

i You cannot operate the Vaporizer while it is connected to a power source with the USB-C Cable. You can only switch it on again after it has been partially charged.


NOTICE**Loss of warranty /
damage to property if the battery
is replaced independently**

If the Vaporizer is opened improperly, it will be damaged.

- **Battery replacement only by our Service Center**

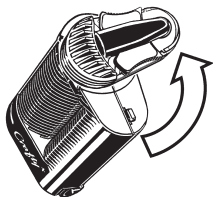6.4 Filling the Filling Chamber

- ▶ Unscrew the Cooling Unit from the Vaporizer by turning it 90° counter-clockwise.

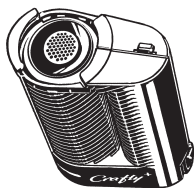

- ▶ Fill the filling chamber completely with ground plant material up to the plastic edge.

i Excessively compressed plant material or an overfilled filling chamber makes inhalation more difficult.

- ▶ Remove excess plant material around the filling connection.
- ▶ Put the Cooling Unit on the Vaporizer by turning it 90° clockwise.

6.5 Heating Up**6.5.1 Default Settings**

The Vaporizer offers three factory preset temperature levels:

- Basic temperature: 180 °C (356 °F)
- Booster temperature: + 15 °C (27 °F) (in relation to the basic temperature) corresponds to 195 °C (383 °F)
- Superbooster temperature: +30 °C (54 °F) (in relation to the basic temperature) corresponds to 210 °C (410 °F)

i Base Temperature, Booster Temperature, and Superbooster Temperature can be adjusted via the Web App. See Chapter 8. "Storz & Bickel Web App", page 58.

i If a particular temperature level is no longer sufficient, change to the next level as described below.

de

en

fr

es

it

nl

6 COMMISSIONING AND OPERATION

6.5.2 Basic Temperature

- ▶ Press the orange Power Button (ON/OFF) for at least half a second.

i A vibration acknowledges activation and the red continuous light of the LED display indicates heating. When the battery is fully charged, it takes approx. 60-80 seconds to heat up. A double vibration and green continuous light indicate that the basic temperature has been reached.

6.5.3 Booster Temperature

- ▶ Double-click on the orange Power Button (ON/OFF).

i When the LED display flashes red, it indicates that the unit is heating up. A double vibration and green flashing signal that the booster temperature has been reached.

i Booster mode ends automatically 90 seconds after the booster temperature has been reached; the set temperature is then the basic temperature again.

6.5.4 Superbooster Temperature

- ▶ Click the orange Power Button (ON/OFF) three times.

i The LED display indicates heating by flashing rapidly red. A double vibration and rapidly flashing green light signal that the super-booster temperature has been reached.

i Superbooster mode ends automatically 90 seconds after the booster temperature has been reached; the set temperature is then the basic temperature again.

6.6 Application



i Start the vaporization after heating has finished.

- ▶ Unfold the Mouthpiece of the Cooling Unit.
- ▶ Place the Mouthpiece between your lips.
- ▶ Breathe in evenly for a few seconds, but only half as much as you actually can.
- ▶ Hold your breath for a few seconds and then exhale slowly.
- ▶ Focus consciously on the breathing process.

i The more intense the vapors, the greater the impairment of the flavor.

**CAUTION****Health problems due to inhalation of vapor**

Coughing

- **Do not use if suffering from respiratory tract/lung diseases**

6.7 End of Application**CAUTION****Hot surface of the filling chamber**

Caution! Hot surface!

- **Do not touch the filling chamber until the Vaporizer has cooled down.**

- ▶ Press the orange Power Button (ON/OFF) for at least half a second.

i The Vaporizer acknowledges the switching off with a vibration.

- ▶ Allow the Vaporizer to cool completely off.
- ▶ If necessary, clean the Vaporizer as described in Chapter 7 „Cleaning“, starting on page 53

6.8 Automatic Switching Off

i Two minutes after the last key-stroke or the last application, the

Vaporizer switches off automatically to conserve battery power. The shutdown is confirmed by a vibration and display of the charge level.

i The automatic switch off can be reset to two minutes by briefly pressing the Power Button (ON/OFF) during operation.

6.9. Storage

Store the Vaporizer and USB-C Cable in a dry place away from the elements and out of reach of children or unqualified persons.

de

en

fr

es

it


nl

7 CLEANING

7.1 Cooling Unit

- i** Cooling Unit and Mouthpiece must be free of deposits. These are caused by steam condensate inside the Cooling Unit. For this reason, please check the Cooling Unit and Mouthpiece before each use.
- i** Clean the Cooling Unit including the mouthpiece regularly and when used by more than one person. Cleanliness is a prerequisite for proper function.


7.1.1 Product Overview

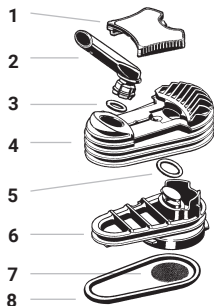

- 1 Cap Lock
- 2 Mouthpiece
- 3 Mouthpiece Seal Ring
- 4 Cooling Unit Cap
- 5 Base Seal Ring (small)
- 6 Cooling Unit Base
- 7 Upper Screen (coarse mesh width)
- 8 Base Seal Ring (large)

7.1.2 Disassembling

- i** Ensure that the Vaporizer is completely cooled down.

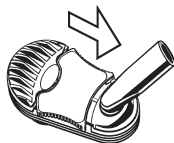

- ▶ Pull the cap lock towards the Mouthpiece.



- ▶ Pull the Cooling Unit Cap from the Vaporizer.



- ▶ Pull the Mouthpiece out of the Cooling Unit Cap by tilting it slightly back and forth.
- ▶ Pull off the Mouthpiece Seal Ring


7 CLEANING



- ▶ When cleaning the Cooling Unit Cap in isopropyl alcohol, remove the cap lock by pulling it up on one side.
- ▶ First press the cap lock on one side and pull it up on the opposite side.




- ▶ Then slide the cap lock on the raised side towards the opposite side.
- i** The signet hologram on the cap lock is a sticker.

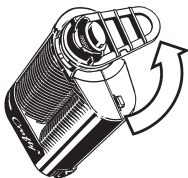

- ▶ Unscrew the Cooling Unit Base from the Vaporizer by turning it 90° counterclockwise.



- ▶ Lever out the large Base Seal Ring with the Filling Chamber Tool at the recess in the groove.
- ▶ Remove the small Base Seal Ring.

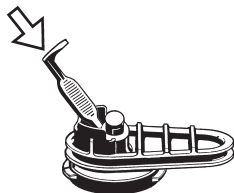

- ▶ Push out the Screen from the Cooling Unit Base with the help of the Filling Chamber Tool.

de

en

fr

es

it

nl

7 CLEANING

7.1.3 Cleaning




CAUTION

Isopropyl alcohol is flammable and may easily ignite.

Caution! Hot surface!

• **Follow the safety instructions of the isopropyl alcohol manufacturer!**

- i** The Cleaning Brush, cotton swabs and paper or cotton cloths are suitable for manual cleaning. We recommend warm rinsing water or isopropyl alcohol as solvents.

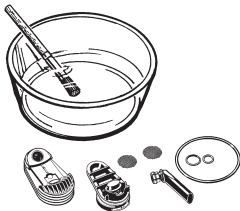

- ▶ Place all parts of the Cooling Unit (except the Cap Lock) and the Filling Chamber Screen in isopropyl alcohol for a maximum of 1/2 hour.
- i** Prolonged contact with isopropyl alcohol can lead to color changes or embrittlement of the plastic parts.
- ▶ Allow all parts to dry thoroughly.

- ▶ Check all parts for damaged surfaces, cracking, softening, hardening, soiling or discoloration.
- ▶ Replace damaged parts.
- ▶ If necessary, clean the cap lock with warm rinse water or wipe it with isopropyl alcohol.

NOTICE

Material damage caused by improper cleaning

Stickers with the signet hologram may fade and their adhesive may dissolve

• **Avoid prolonged contact with isopropyl alcohol**

- i** Do not put the optional accessories including the Herb Mill, Filling Aid and Magazine in isopropyl alcohol. Clean these parts in the dishwasher, or with warm rinsing water.

7.1.4 Reassembling

- ▶ Assemble the parts in reverse order.
- i** When assembling, make sure that Seal Rings are properly seated. The small Base Seal Ring, especially, must sit completely in the Cooling Unit Cap and be no longer visible.
- ▶ Carefully insert the upper Screen into the groove provided.

7 CLEANING

i Disregarding this may allow plant particles to enter the Cooling Unit, so blocking this or be inhaled.

7.2 Screens

► After each use, clean the Screens with the enclosed Cleaning Brush.

7.3 Filling Chamber

i It is necessary to clean the filling chamber as soon as the lower Screen is clogged.

7.3.1 Removing the lower Screen

► Remove the lower Screen by pressing it along the groove in the filling chamber using the Filling Chamber Tool. This causes the lower Screen to bulge and detach from the groove.

7.3.2 Cleaning

► Clean the filling chamber with a cotton swab soaked in isopropyl alcohol.

i Make sure that no isopropyl alcohol drips into the interior of the device.

7.3.3 Installing the lower Screen

- Curve the lower Screen. |
- Insert the lower Screen into the filling chamber with the curved side facing upwards.

► Using the Filling Chamber Tool, press the screen flat into the provided groove.

7.4 Vaporizer and USB-C Cable

NOTICE

Material damage caused by improper cleaning

Ingress of water into the Vaporizer or the USB-C Cable.

- Do not immerse in water or other liquids
- Do not clean with a direct water or steam jet or compressed air

- Disconnect the USB-C Cable from the power source.
- Switch off the Vaporizer.
- Clean the housing of the Vaporizer and the USB-C Cable only dry or at most with a damp cloth if necessary.

The Storz & Bickel Web App is not necessary for the operation of the Vaporizer, but allows individual settings and the reading of additional information during operation with the Vaporizer. To do that, connect the Vaporizer to a smartphone via Bluetooth®.

de

en

fr

es

it

nl

8.1 Default Settings

Basic temperature: 180°C (356°F)

Booster temperature: +15°C (+27°F)
(in relation to the basic temperature),
corresponds to: 195°C (383°F)

Superbooster temperature:
+30°C (+54°F) (in relation to the basic
temperature), corresponds to: 210°C
(410°F)

| | |
|---|------|
| LED indicator brightness | |
| CRAFTY ⁺ : | 100% |
| Charge indicator lamp CRAFTY ⁺ : | ON |
| Vibration CRAFTY ⁺ : | ON |
| Vibration smartphone: | OFF |
| Smartphone alarm tone: | OFF |

8.2 Connecting the Vaporizer with a Smartphone

Switch on the smartphone and ensure that the Bluetooth® function is switched on and that it is not blocked by another Bluetooth® device. Then switch on the Vaporizer and open a browser which supports Bluetooth® connectivity (more information on www.storz-bickel.com/app/web). Go to app.storz-bickel.com Click "Connect" and choose your Vaporizer.

8.3 The Menu Items of the STORZ & BICKEL Web App

Temperature

This function allows you to read the set and actual temperatures and change your temperature settings. You will also find the charge indicator of the Vaporizer.

Device

Device related information, such as operating hours, software versions etc. can be found in this section.

To find out which additional device specific features can be adjusted through the STORZ & BICKEL Web App, visit: <https://www.storz-bickel.com/app/web>

Information

Here you will find further information such as the list of plants, the Quick Start Manual, the Instructions for Use, the general Terms and Conditions, the data protection declaration, as well as direct links to the STORZ & BICKEL website or to the online shop.

8.4 Setting Temperature with the STORZ & BICKEL Web App

i In addition to the three factory-set temperature levels, you can also individually set temperatures between 40°C and 210°C (104 °F) and 410 °F) (see Chapter 4). "Overview of Plants", page 48).

- ▶ Briefly press the upper plus button to increase the target value in 1-degree increments.
- ▶ Briefly press the upper minus button to decrease the target value in 1-degree increments.
- ▶ Press the plus or minus button continuously so that the target values run continuously in the corresponding direction.

i The current actual temperature can be read from the upper line of the display.

i The booster or superbooster temperature is always added to the base or booster temperature. In addition, the degree difference between basic temperature and booster temperature can be adjusted to the degree using the lower plus and minus keys. The difference in degrees between booster and superbooster temperature is fixed and is always +15°C (+27°F). But the total cannot exceed 210°C (410°F).

Fahrenheit/Celsius

- ▶ Touch the plus and minus buttons simultaneously to change the display from degrees Celsius to degrees Fahrenheit.

Charge Indicator Lamp



i The charge indicator lamp shows a battery symbol with six fields indicating the charging status.

- ▶ Full battery: display of all six charging status fields.
- ▶ Battery almost empty: flashing battery frame.
- ▶ Charging: flashing charge display and display of the current charge level.

8.5 Reset to Default Settings

Settings which you have changed via the STORZ & BICKEL Web App can be reset as follows:

- ▶ Switch on the Vaporizer.
- ▶ Press the orange Power Button (ON/OFF) for 10 seconds. The reset is acknowledged by the following running lights: red/green/blue/red/green/blue/red/green/blue and simultaneous vibration.

de

en

fr

es

it

nl

9 OPTIONAL ACCESSORIES

Wear & Tear Set - SKU 06 02 CY

The Wear & Tear Set contains all spare parts required to replace the Cooling Unit.

Coolings Units, 3 pieces - SKU 03 05 CY / Cooling Unit - SKU 03 04 CY

The Cooling Unit cools down the vapor and thus provides a pleasant temperature and an optimal aroma. To ensure cleanliness of the Cooling Unit, it should be replaced regularly. The Mouthpiece is included with the Cooling Unit.

Mouthpieces, 4 pieces - SKU 11 72

Place the Mouthpiece on the Cooling Unit.

Cap Locks, 3 pieces - SKU 11 53

The Cap Lock fixes the Cap to the base of the Cooling Unit.

Screen Set, small - SKU 11 12

The Set contains four Screens with coarse mesh width for the Cooling Unit and two Screens with normal mesh width for the filling chamber.

Coarse Screens, small, 6 pieces - SKU 11 40

The small screen with coarse mesh width is inserted into the base of the Cooling Unit.

Normal Screens, small, 6 pieces - SKU 11 03

The small screen with normal mesh width is inserted into the Cooling Unit Cap.

Seal Ring Set - SKU 06 01 CY

The Set contains all necessary Sealing Rings for the Cooling Unit and filling chamber.

Herb Mill - SKU 11 84 / Herb Mill XL - SKU 11 85

The Herb Mill has extra sharp cutting teeth for finely ground herbs.

Filling Aid - SKU 11 95

The Filling Aid facilitates clean filling of the ground plant material into the filling chamber.

Filling Chamber Tools, 5 pieces - SKU 11 59

The various application options of the Filling Chamber Tool are described in these Instructions for Use.

Dosing Capsules, 40 pieces - SKU 09 33

Crushed plant material can be filled into the Dosing Capsules. Dispose of the Dosing Capsule after use in household waste.

Dosing Capsule Magazine - SKU 09 32

Crushed plant material can be filled into the Dosing Capsules.

9 OPTIONAL ACCESSORIES

Dosing Capsule Filling Set - SKU 09 45

Store the filled Dosing Capsules in the Magazine. The Magazine Cap serves as a filling aid for the Dosing Capsules.

Cleaning Brushes, 3 pieces - SKU 11 24

The Cleaning Brush is used to clean the Filling Chamber, among other things.

12 Volt Car Charger - SKU 01 09 CY

Car Charger for battery charging.

You can find these and other accessories as well as detailed information about these products under <https://www.storz-bickel.com>



de

en

fr

es

it

nl


9 OPTIONAL ACCESSORIES

9.1 Herb Mill



- ▶ Place plant material between the two mill bowls of the Herb Mill.
- ▶ Close the Herb Mill.
- ▶ Turn the Herb Mill back and forth several times.

9.2 Filling Aid

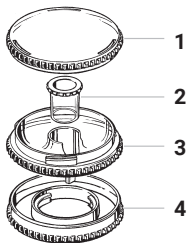

- 1 Upper Cap
- 2 Plug
- 3 Bowl
- 4 Lower Cap

i Use the Filling Aid for easy and clean filling of the filling chamber. You can store ground plant material in the bowl of the Filling Aid.

9.2.1 Filling the Filling Aid



- ▶ Unscrew the top lid counterclockwise.
- ▶ Fill the bowl incl. stopper with ground plant material.
- ▶ Put on the upper lid by turning it clockwise.

9.2.2 Filling the Filling Chamber with the Filling Aid

- ▶ Unscrew the Cooling Unit from the Vaporizer by turning it 90° counterclockwise.
- ▶ Use the Filling Chamber Tool to remove any residues from the filling chamber.
- ▶ Unscrew the lower lid of the Filling Aid clockwise.
- ▶ Put the Filling Aid on the Vaporizer by turning it 90° clockwise.
- ▶ Unscrew the top lid of the Filling Aid counterclockwise.
- ▶ Pull the plug out of the Filling Aid.

9 OPTIONAL ACCESSORIES



- ▶ Push a portion of plant material through the central opening into the filling chamber.
- i** Make sure that the filling chamber is not overfilled (see Chapter 6.4 "Filling the Filling Chamber", page 51).



- i** Fill the filling chamber only to the lower edge of the Filling Aid.
- ▶ Insert the plug into the central opening.
- ▶ Put on the upper lid by turning it clockwise.
- ▶ Unscrew the Filling Aid from the Vaporizer by turning it 90° counterclockwise.

- ▶ Put the lower lid on the Filling Aid by turning it counterclockwise.
- ▶ Put the Cooling Unit on the Vaporizer by turning it 90° clockwise.

9.3 Dosing Capsules (for single Use) and Magazin



- i** With the Dosing Capsules available as accessories, you can fill the ground plant material and store them in the magazine until use.
- i** The Dosing Capsules are disposable. After use, dispose of them in residual waste.

9.3.1 Filling the Dosing Capsules



- ▶ Unscrew the Magazine Lid counterclockwise.
- ▶ Put the Magazine Lid on the open Dosing Capsule.

de

en

fr

es

it

nl

9 OPTIONAL ACCESSORIES

- ▶ Push a portion of plant material through the central opening into the Dosing Capsule.
- ▶ Close the Dosing Capsule with its lid.




9.3.2 Filling the Magazine with Dosing Capsules


- ▶ Insert the filled Dosing Capsules into the Magazine.
- ▶ Close the Magazine by turning the Magazine Lid clockwise.



9.3.3 Inserting the Dosing Capsule into the Filling Chamber

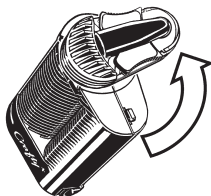

- ▶ Unscrew the Cooling Unit from the Vaporizer by turning it 90° counter-clockwise.

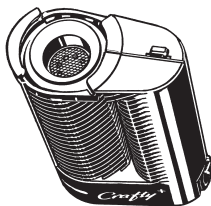

- ▶ Insert the Dosing Capsule with the lid facing up into the Filling Chamber of the Vaporizer.
- ▶ Put the Cooling Unit on the Vaporizer by turning it 90° clockwise.

10 FAULTS

de

en

fr

es

it

nl

10.1 Possible Faults / Troubleshooting

| Fault | Possible Cause/Remedy |
|---|---|
| Vaporizer cannot be switched on. | Make sure that the battery is charged. |
| LED display flashes alternately red/blue. | Battery temperature is either too high or too low. Let the Vaporizer either cool down or warm up. |
| LED display flashes blue. | Battery is empty. Connect the Power Adapter or Car Charger. |
| LED display flashes alternately red/green. | The USB-C Cable is not suitable. Use the supplied USB-C Cable. |
| LED display flashes alternately red/orange. | The Vaporizer is faulty. |

10.2 In Case of Faults

- ▶ Switch off the Vaporizer immediately.
- ▶ Disconnect the Vaporizer from the power source.
- ▶ Contact our Service Center directly.

10.3 Disposal

- ▶ After the warranty period, dispose of an irreparable Vaporizer through the material cycle or send it to our Service Center for disposal.

11 TECHNICAL SPECIFICATIONS

CRAFTY+ Vaporizer:

Supply voltage: 5 V DC

The voltage specification can be found on the Vaporizer type plate:

Power required by Vaporizer: 10 W max.

Operating temperature: 5°C - 35°C / 41°F - 95°F

Vaporization Temperature:

adjustable between approx. 40°C - 210°C / 104°F - 410°F

Size: 11.0 x 5.7 x 3.3 cm (4.3 x 2.2 x 1.3 inch)

Weight: approx. 135 g (0.3 lb)

Subject to technical changes.

Patents and designs: www.storz-bickel.com/patents

12 COMPLIANCE WITH LEGAL AND NORMATIVE REQUIREMENTS

The devices comply with the following EC Directives:

- IEC 60335
- EN 55011
- EN 61000-4-X



Manufacturer:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Germany

13.1 Warranty

S&B Products purchased through the S&B.com directly or an authorized dealer come with a two (2) year limited warranty from the date of purchase by the original purchaser. For customers located in California who purchase on S&B.com, the S&B Limited Warranty starts from the date of delivery to the original purchaser.

Other than for the MIGHTY, CRAFTY+ and PLENTY, if a customer registers the purchased S&B Product at www.storz-bickel.com/registration within four weeks of the purchase date, S&B will grant an additional year of warranty.

S&B only warrants the MIGHTY+, CRAFTY+, VOLCANO HYBRID, VOLCANO CLASSIC, PLENTY, VENTY and MIGHTY ("S&B Products") against defects in materials and workmanship under Normal Use (as defined below) for 2 years from date of retail purchase directly from S&B.com (or from the date of delivery for customers located in California), or purchase from an authorized retailer (please consult our website).

This Limited Warranty does not cover the commercial use of the product, damage due to misuse, improper maintenance or storage, normal wear and tear, refurbished products or unauthorized repairs of the product.

Furthermore, the Limited Warranty will not cover any other products other than the S&B Products and will not cover any accessories or attachments or components, including but not limited to Batteries, Balloons, Cooling Units, Charging Cables and Adapters, Filling Chamber (VOLCANO), Tube, Screens, Dosing Capsule and accessories included with such S&B Products.

This Limited Warranty is subject to the laws of the Federal Republic of Germany, excluding the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

Please find all warranty conditions here: www.storz-bickel.com/legal/warranty.

13.2 Liability

STORZ & BICKEL shall be liable for any damages caused to the customer by our products in accordance with German law and pursuant to our GTC. Under said provisions, we are only liable for damages caused by intentional action or gross negligence, unless such damages involve death, personal injury, or injury to health, or if the injury is related to a cardinal contractual obligation. In such cases, we will also be liable to the customer for simple negligence.

13.3 Copyright

This document is copyright protected, and may not be used either in whole or in part pursuant to Sections 15 et seqq. UrhG (German Copyright Act) without prior written approval of STORZ & BICKEL.

| | |
|---|-------------|
| Table de matières | page |
| 1 Description du produit CRAFTY+ | 72 |
| 1.1 Contenu de la livraison..... | 72 |
| 1.2 Eléments fonctionnels..... | 73 |
| 1.3 Service après-vente..... | 74 |
| 2 Pour votre sécurité | 75 |
| 2.1 Symboles..... | 75 |
| 2.2 Légende..... | 75 |
| 2.3 Règles fondamentales..... | 77 |
| 2.4 Consignes de sécurité..... | 78 |
| 2.4.1 Risque de blessures par choc électrique..... | 78 |
| 2.4.2 Risque de blessures par brûlure / vapeurs..... | 78 |
| 2.4.3 Risque de blessures par différentes causes..... | 78 |
| 3 Usage conforme | 79 |
| 4 Liste de plantes | 79 |
| 5 Les facteurs qui influencent la vaporisation | 80 |
| 6 Mise en service et utilisation | 81 |
| 6.1 Déballez l'appareil..... | 81 |
| 6.2 Raccordement au réseau..... | 81 |
| 6.3 Chargement de la batterie..... | 81 |
| 6.4 Remplir la chambre de remplissage..... | 82 |
| 6.5 Procédure de chauffe..... | 83 |
| 6.5.1 Réglages par défaut..... | 83 |
| 6.5.2 Température de base..... | 83 |
| 6.5.3 Booster température..... | 83 |
| 6.5.4 Superbooster température..... | 84 |
| 6.6 Application..... | 84 |
| 6.7 Fin de l'application..... | 84 |
| 6.8 Arrêt automatique..... | 85 |
| 6.9 Conservation..... | 85 |

| | |
|---|-------------|
| Table de matières | page |
| 7 Nettoyage | 86 |
| 7.1 Unité de Refroidissement..... | 86 |
| 7.1.1 Description..... | 86 |
| 7.1.2 Démontage | 86 |
| 7.1.3 Nettoyage..... | 88 |
| 7.1.4 Assemblage..... | 89 |
| 7.2 Tamis | 89 |
| 7.3 Chambre de remplissage..... | 89 |
| 7.3.1 Démontage du Tamis inférieur..... | 89 |
| 7.3.2 Nettoyage..... | 89 |
| 7.3.3 Montage du Tamis inférieur | 89 |
| 7.4 Vaporisateur et Cordon USB-C..... | 90 |
| 8 Application Web STORZ & BICKEL | 91 |
| 8.1 Réglages par défaut | 91 |
| 8.2 Etablissement de la connexion entre le Vaporisateur et un smartphone | 91 |
| 8.3 Points de menu de l'application Web Storz & Bickel | 91 |
| 8.4 Réglage de température avec l'application Web Storz & Bickel | 92 |
| 8.5 Réinitialisation aux réglages par défaut | 93 |
| 9 Accessoires facultatifs | 94 |
| 9.1 Moulin à Herbes | 96 |
| 9.2 Accessoire de Remplissage | 96 |
| 9.2.1 Remplissage de l'Accessoire de Remplissage | 96 |
| 9.2.2 Remplissage de la chambre de remplissage avec l'Accessoire de Remplissage | 96 |

| | |
|--|-------------|
| Table de matières | page |
| 9.3 Capsules de Dosage (à usage unique) et Magasin | 98 |
| 9.3.1 Remplissage des Capsules de Dosage | 98 |
| 9.3.2 Remplissage du Magasin avec les Capsules de Dosage..... | 98 |
| 9.3.3 Installation des Capsules de Dosage dans la Chambre de Remplissage..... | 99 |
| 10 Pannes | 100 |
| 10.1 Pannes éventuelles / Recherche des causes de défaillances | 100 |
| 10.2 Après une panne | 100 |
| 10.3 Réforme..... | 100 |
| 11 Caractéristiques techniques | 101 |
| 12 Respect des exigences légales et normatives | 101 |
| 13 Garantie légale, Responsabilité | 102 |
| 13.1 Garantie légale..... | 102 |
| 13.2 Responsabilité | 102 |
| 13.3 Droit d'auteur | 103 |

de

en

fr


es

it

nl

1 DESCRIPTION DU CRAFTY+


1.1 Contenu de la livraison

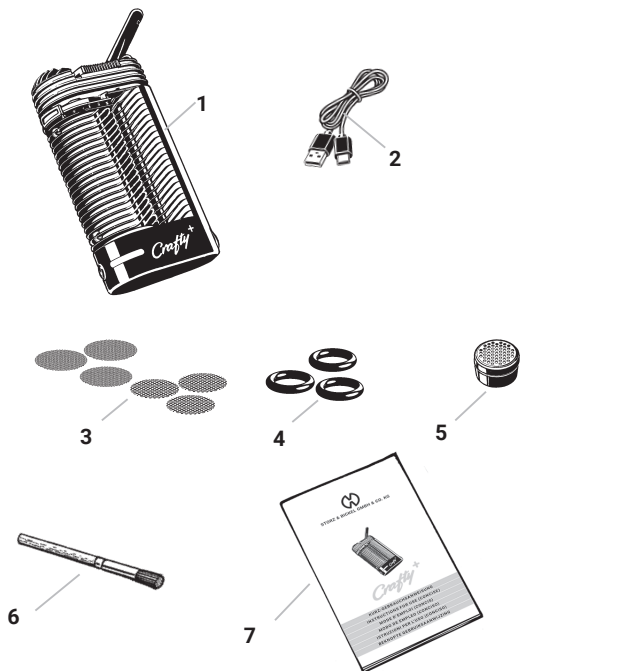

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | CRAFTY+ Vaporisateur | 5 | 1 pc. Capsule de Dosage |
| 2 | 1 pc. Cordon USB-C | 6 | 1 pc. Brosse de Nettoyage |
| 3 | 3 pc. Tamis Standard (petit) 3 pc. Tamis gros (petit) | 7 | 1 pc. Mode d'Emploi (concis) |
| 4 | 3 pc. Joint de Base (petit) | | |

1 DESCRIPTION DU CRAFTY+

1.2 Éléments fonctionnels

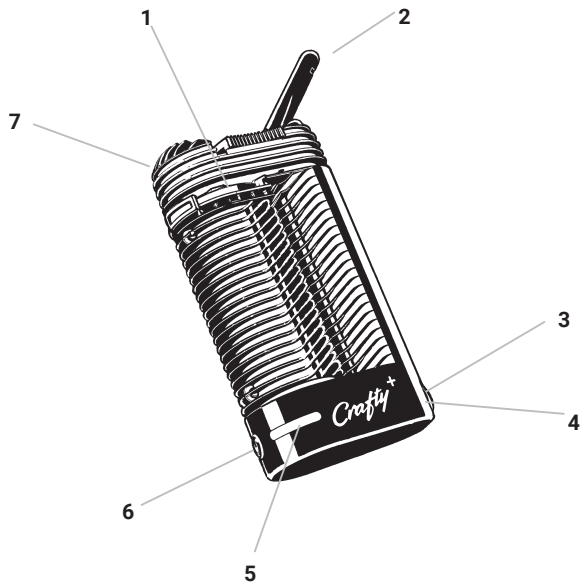

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Chambre de Remplissage | 5 | Voyant LED |
| 2 | Embout | 6 | Touche Marche / Arrêt (ON/OFF) |
| 3 | Outil pour Chambre de Remplissage | 7 | Unité de Refroidissement |
| 4 | Prise pour Chargement USB-C (derrière l'Outil pour Chambre de Remplissage) | | |

de

en

fr

es

it

nl





1.3. Service après-vente

En cas de livraison incomplète, de problèmes techniques, de questions sur l'appareil et son élimination ou sur la garantie légale, contacter notre Centre de Service : www.storz-bickel.com/contact

Pour toute demande de SAV, merci de solliciter une RMA (Return merchandise authorization) depuis notre page d'accueil : www.storz-bickel.com/rma.

2 POUR VOTRE SÉCURITÉ

2.1 Légende

| | |
|---|------------------------------|
|  | Symboles d'énumération |
|  | Symbole de danger |
|  | Instructions de manipulation |
|  | Remarque |

2.2 Symboles



Respecter le Mode d'Emploi!



Symbole du fabricant - le nom et l'adresse du fabricant sont mentionnés à côté du symbole.



L'appareil ne devra pas être jeté avec les ordures ménagères. Le symbole d'un conteneur à ordures barré d'une croix signale l'obligation d'une collecte séparée. Le Vaporisateur contient une batterie lithium-ion intégrée qui devra être déchargée avant son dépôt à un point de collecte pour recyclage.



Signe de conformité européen : Ce signe indique que le fabricant garantit la conformité aux lignes directrices applicables et les normes de l'Union européenne.

de

en

fr

es

it

nl

2 POUR VOTRE SÉCURITÉ



Sécurité et fabrication contrôlées par le centre de contrôle technique TUEV SUED selon EN 60335-1, UL 499 et CAN/CSA 22.2 n° 64-M91.



Attention! Surfaces chaudes!



Protéger contre des rayons du soleil.



Eviter d'exposer à l'eau et protéger de l'humidité.



Symbole du numéro de série



Symbole du numéro de référence/numéro d'article/sku



Courant continu



Appareil de la classe de protection II

2.3 Règles fondamentales

Conserver ces instructions.

- ▶ Ce Mode d'Emploi est un composant essentiel du Vaporisateur et doit être mis à la disposition de l'utilisateur.
- ▶ Télécharger la version détaillée actuelle du Mode d'Emploi sur www.storz-bickel.com.
- ▶ Veuillez lire scrupuleusement et entièrement les consignes suivantes avant de mettre le Vaporisateur et le Cordon USB-C en marche.
- ▶ Qu'il s'agisse de l'usage ou de l'entretien, l'utilisateur est tenu de toujours respecter les instructions de ce Mode d'Emploi.
- ▶ Ce Vaporisateur n'est pas destiné à être utilisé par des personnes ayant des handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été encadrées ou formées sur la manière d'utiliser le Vaporisateur par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas manipuler le Vaporisateur.
- ▶ Si l'utilisateur est atteint d'une maladie pulmonaire ou des voies respiratoires, l'appareil doit alors être utilisé uniquement après consultation et accord du médecin traitant. Les vapeurs peuvent, en fonction de leur densité, irriter les voies respiratoires et les poumons, ce qui peut provoquer de la toux.
- ▶ Ne laissez pas le Vaporisateur en marche sans surveillance
- ▶ Ranger et utiliser le Vaporisateur et le Cordon USB-C uniquement à une distance convenable de sources de chaleur (four, cuisinière, cheminée, etc.) et dans un endroit sec où la température ambiante ne peut pas descendre sous +5 °C (+41 °F).
- ▶ Ne pas exposer le Vaporisateur à des variations extrêmes de la température ambiante. L'humidité de la condensation risque de perturber la fonctionnalité.
- ▶ Utiliser exclusivement des accessoires et pièces de rechange d'origine de STORZ & BICKEL.
- ▶ Le fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages résultant d'une utilisation inappropriée, incorrecte ou irresponsable du Vaporisateur et du Cordon USB-C.
- ▶ Dans des conditions d'utilisation abusives, du liquide peut être expulsé de la batterie ; évitez tout contact. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez également un médecin. Le liquide expulsé de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.

de

en

fr

es

it

nl

2.4 Consignes de sécurité

2.4.1 Risque de blessures par choc électrique

- ▶ Mettre hors tension le Vaporisateur et débrancher le Cordon USB C après l'utilisation, avant chaque entretien et en cas d'orage.
- ▶ Assurez-vous que le Cordon USB-C n'est pas endommagé par des coudes, un écrasement ou une traction.
- ▶ Nous décommandons l'utilisation de multiprises et/ou de rallonges électriques.
- ▶ Ne pas utiliser le Vaporisateur et le Cordon USB-C s'il est endommagé. Les réparations ne peuvent être effectuées que par notre Centre de Service. N'essayez en aucun cas de réparer les dommages vous-même. Cela entraîne la perte de la garantie légale. Notre Centre de Service remplacera un Cordon USB-C défectueux.
- ▶ Éviter que le Vaporisateur et le Cordon USB-C n'entrent en contact avec de l'humidité.
- ▶ Tenir le Vaporisateur et le Cordon USB-C éloignés des animaux domestiques (par ex. rongeurs) et des nuisibles.
- ▶ Ne pas utiliser le Vaporisateur et le Cordon USB-C dans des atmosphères potentiellement explosives ou inflammables.

2.4.2 Risque de blessures par brûlure/vapeurs

- ▶ Ne pas toucher les surfaces chaudes du Vaporisateur (Chambre de Remplissage et zone autour de la Chambre de Remplissage) lors de l'utilisation et de la phase de refroidissement.
- ▶ Ne posez le Vaporisateur chaud que sur une surface solide résistante à la chaleur et assurez-vous qu'il n'est couvert par aucun objet.
- ▶ Ne pas utiliser le Vaporisateur à proximité d'objets inflammables tels que des rideaux, des nappes ou du papier.
- ▶ Ne jamais recouvrir, boucher ni colmater les fentes de ventilation et l'orifice de sortie d'air du Vaporisateur pendant son fonctionnement ou la phase de refroidissement.
- ▶ Avant de mettre le Vaporisateur en marche, s'assurer que toute la vapeur, par exemple de produits de nettoyage et de désinfection inflammables, se soit évaporée.

2.4.3 Risque de blessures par différentes causes

- ▶ En raison du danger potentiel qu'ils représentent, tenir les emballages (sacs plastique, éléments en styropor, cartons, etc.) hors de portée des enfants.
- ▶ Le Vaporisateur contient des petites pièces qui peuvent être avalées.

2 POUR VOTRE SÉCURITÉ

- ▶ Le Cordon USB-C présente un risque potentiel d'étranglement.
- ▶ Le Vaporisateur ne devra être utilisé qu'avec les herbes et les parties de plantes à vaporiser conseillées.
- ▶ Observer vos symptômes (par ex. : toux, essoufflement, douleurs au niveau de la poitrine) pendant ou après l'utilisation et consultez immédiatement un médecin si vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé.

3 USAGE CONFORME

Le Vaporisateur fait se dégager les arômes et les parfums des herbes et composants végétaux mentionnés au chapitre 4., page 79. La vaporisation au moyen d'air chaud libère les parfums et les arômes qui peuvent être directement inhalés.

Le Vaporisateur n'est pas un produit médical.

4 LISTE DE PLANTES

- ▶ Ne vaporiser que des parfums et des arômes provenant des matériels végétaux listés ici et qui ont été testés conformément aux règles de la pharmacopée européenne (ou similaire) pour leur authenticité, leur pureté et pour la présence d'agents pathogènes.
- ▶ On peut se procurer ces plantes, ou composants, en pharmacie.
- i** Toute utilisation en divergeant est non conforme et représente des dangers potentiels.
- i** Le Vaporisateur n'est pas conçu pour une utilisation avec des produits à base de tabac ou de nicotine.

4 LISTE DE PLANTES

| Nom de la plante | Désignation botanique | Partie de la plante utilisée | Température |
|------------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| Eucalyptus | Eucalyptus globulus | feuilles | 130°C (266°F) |
| Houblon | Humulus lupulus | cônes | 154°C (309°F) |
| Camomille | Matriarca chamomilla | fleurs | 190°C (374°F) |
| Lavande | Lavandula angustifolia | fleurs | 130°C (266°F) |
| Mélisse | Melissa officinalis | feuilles | 142°C (288°F) |
| Sauge | Salvia officinalis | feuilles | 190°C (374°F) |
| Thym | Thymus vulgaris | herbe | 190°C (374°F) |

5 LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA VAPORISATION

Veillez respecter les instructions suivantes afin de pouvoir régler le Vaporisateur de façon optimale avec le matériel végétal que vous utilisez pour vos besoins personnels.

La quantité des arômes et parfums libérés peut être influencée par les facteurs suivants :

1. Qualité : La concentration des arômes et parfums contenus dans les matières végétales utilisées.
2. Quantité : La quantité de substance à vaporiser dans la chambre de remplissage.
3. Surface : Plus les plantes sont finement hachées, plus on crée de surface susceptible de libérer arômes et parfums.

4. Température : Plus la température est élevée et plus les arômes et parfums sont libérés en une fois. Une augmentation de la température ne doit être envisagée qu'en dernier recours, car le matériau végétal a un goût moins agréable à des températures plus élevées.

Vous pouvez répéter le processus de vaporisation avec le même contenu de la chambre de remplissage jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vapeur qui se forme à la température maximale.

6.1 Déballez l'appareil

- ▶ Vérifiez que le Vaporisateur est complet en consultant le chapitre 1.1 « Contenu de la livraison », page 72.

6.2 Raccordement au réseau

- ▶ Vérifiez si le Vaporisateur et le Cordon USB-C présentent des dommages externes visibles.

6.3 Chargement de la batterie

- ▶ Laissez la batterie se charger complètement avant la première utilisation. Branchez le Vaporisateur à un chargeur USB avec le Cordon USB C fourni.

i Le processus de charge est signalé par un bref allumage de l’Affichage par LED (vert/rouge/bleu) et une vibration.

i L’état de charge est signalé par l’allumage du voyant LED bleu.

Signification des voyants pendant la charge de la batterie :

- ▶ Voyant bleu continu : la charge de la batterie est terminée.
- ▶ Voyant bleu clignotant lentement : niveau de charge de la batterie compris entre 61 et 96%
- ▶ Voyant bleu clignotant rapidement : niveau de charge de la batterie compris entre 31 et 60%

▶ Éclair bleu intermittent : la batterie est chargée à hauteur de 30% environ
Signification des voyants à la mise hors tension :

- ▶ Voyant bleu continu : niveau de charge de la batterie compris entre 64 et 100%
- ▶ Voyant bleu clignotant lentement : niveau de charge de la batterie compris entre 32 et 63%
- ▶ Voyant bleu clignotant rapidement : niveau de charge de la batterie compris entre 1 et 31%
- ▶ Éclair bleu intermittent : la batterie est déchargée.

▶ Une fois la charge terminée, débranchez d’abord le Cordon USB-C de la prise avant de le débrancher du Vaporisateur.

i Le Vaporisateur ne peut pas être mis en service lorsqu’il est branché à une source d’alimentation via le Cordon USB-C. Pour pouvoir le rallumer, il faut qu’il soit déjà partiellement chargé.


AVIS

Perte de la garantie légale / dommages matériels en cas de changement des piles par l'utilisateur


Une ouverture non conforme du Vaporisateur entraîne son endommagement.

- **Remplacement des piles uniquement par notre Centre de Service**

6.4 Remplir la chambre de remplissage

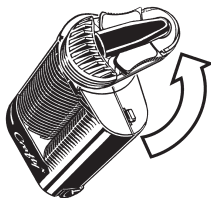

- ▶ L'Unité de Refroidissement doit être démontée du Vaporisateur en la dévissant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

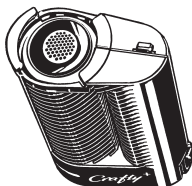

- ▶ Toujours remplir la chambre de remplissage de matériel végétal fragmenté jusqu'au bord plastique.
- i** Ne pas trop comprimer le matériel végétal ou remplir la chambre de remplissage de manière excessive pour ne pas rendre l'inhalation trop difficile.
- ▶ Retirer le matériel végétal en excédent tout autour de la tubulure de remplissage.

- Placer l'Unité de Refroidissement sur le Vaporisateur en la tournant de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

6.5 Procédure de chauffe

6.5.1 Réglages par défaut

Le Vaporisateur autorise trois niveaux de températures réglés par défaut :

- Température de base : 180 °C (356 °F)

- Booster température
(= température amplifiée) : +15 °C
(27 °F)

(par rapport à la température de base),
soit 195 °C (383 °F)

- Superbooster température
(= Température super amplifiée) :
+30 °C (54 °F)

(par rapport à la température de base),
soit 210 °C (410 °F).

i La température de base et la booster température, comme la superbooster température, peuvent être modifiées via l'application Web. Voir le chapitre 8. « Application Web Storz & Bickel », page 91.

i Si un niveau de température n'est plus suffisant, passer au niveau suivant tel que décrit ci-après.

6.5.2 Température de base

- Appuyez sur la Touche Marche / Arrêt orange (ON/OFF) pendant au moins une demi seconde.

i Une vibration signale l'allumage et la lumière rouge continue de l'Affichage LED signale le chauffage est en cours. Si la batterie est complètement chargée, le chauffage dure env. 60 à 80 secondes. Une vibration double et l'allumage continu du voyant vert signalent que la Température de base est atteinte.

6.5.3 Booster température (= température amplifiée)

- Double-clic sur la touche Marche / Arrêt orange (ON/OFF).

i L'Affichage par LED rouge clignotant signale le processus de chauffage. Une vibration double et le clignotement du voyant vert signalent que la booster température est atteinte.

i Le mode booster se termine automatiquement 90 secondes après que la booster température a été atteinte ; la température de consigne correspond de nouveau à la température de base.

de

en

fr

es

it

nl

6. MISE EN SERVICE ET UTILISATION

6.5.4 Superbooster température (= température super amplifiée)

- ▶ Triple-clic sur la Touche Marche / Arrêt orange (ON/OFF).

i L’Affichage par LED clignote rapidement en rouge pour indiquer que le processus de chauffage est en cours. Une vibration double et un clignotement vert rapide indique que la superbooster température est atteinte.

i Le mode superbooster se termine automatiquement 90 secondes après que la superbooster température a été atteinte ; la température de consigne correspond de nouveau à la température de base.

6.6 Application



- i** Commencez la vaporisation une fois le chauffage terminé.
- ▶ Déplier l’Embout de l’Unité de Refroidissement.
 - ▶ Maintenir l’Embout entre les lèvres.

- ▶ Inhalez régulièrement et pendant quelques secondes la moitié de ce que vous pourriez véritablement inhaler.
 - ▶ Retenir l’air pendant quelques secondes et expirer lentement.
 - ▶ Se concentrer consciemment sur le processus de respiration.
- i** Le goût sera d’autant plus altéré que la vapeur sera intense.

ATTENTION

Problèmes de santé provoqués par l’inhalation de la vapeur

Toux

- **Ne pas utiliser en cas de maladie des voies respiratoires/poumons**

6.7 Fin de l’application

ATTENTION

Surface chaude de la chambre de remplissage

Risque de brûlure

- **Ne pas toucher la chambre de Remplissage tant que le Vaporisateur n’est pas encore refroidi.**

6. MISE EN SERVICE ET UTILISATION

- ▶ Appuyer sur l'interrupteur la Touche Marche / Arrêt orange (ON/OFF) pendant au moins une demi-seconde.

i Le Vaporisateur signale la mise hors tension par une vibration.

- ▶ Laisser refroidir le Vaporisateur complètement.
- ▶ Si nécessaire, nettoyer le Vaporisateur tel que décrit au chapitre «Nettoyage» 7, à partir de la page 85

6.8 Arrêt automatique

i Le Vaporisateur s'arrête automatiquement deux minutes après la dernière activation de touche ou la dernière utilisation afin d'économiser la batterie. L'arrêt est confirmé par une vibration et par l'affichage de l'état de charge.

i Une activation brève de la Touche Marche / Arrêt (ON/OFF) en cours de fonctionnement permet de ré-initialiser le dispositif d'arrêt automatique pour une durée de deux minutes.

6.9 Conservation

- ▶ Stocker le Vaporisateur et le Cordon USB-C dans un endroit sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants ou des personnes non autorisées.

de

en

fr

es

it

nl


7 NETTOYAGE

7.1 Unité de Refroidissement

i L'Unité de Refroidissement et l'Embout doivent être exempts de sédiments. Ceux-ci apparaissent à cause de la condensation de vapeur à l'intérieur de l'Unité de Refroidissement. Contrôler l'Unité de Refroidissement et l'Embout avant chaque utilisation.

i Nettoyez l'Unité de Refroidissement et l'Embout régulièrement et lorsqu'ils sont utilisés par plusieurs personnes. La propreté est une condition préalable au bon fonctionnement.


7.1.1 Description

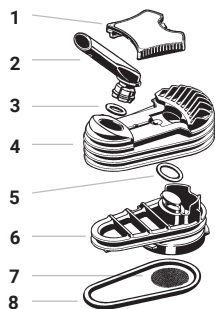

- 1 Verrou de Couvercle
- 2 Embout
- 3 Joint d'Embout
- 4 Couvercle d'Unité de Refroidissement
- 5 Joint de Base petit
- 6 Base d'Unité de Refroidissement
- 7 Tamis supérieur (maillage grossier)
- 8 Joint de Base grand

7.1.2 Démontage

i S'assurer que le Vaporisateur a entièrement refroidi.

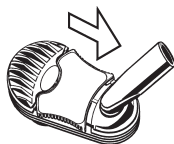

► Tirer le Verrou de Couvercle dans le sens de l'Embout.



► Démontez le Couvercle d'Unité de Refroidissement du Vaporisateur.



- Démontez l'Embout du couvercle de l'Unité de Refroidissement en le tournant légèrement dans les deux sens.
- Retirer le Joint d'Embout.

7 NETTOYAGE




- ▶ Pour nettoyer le couvercle de l'Unité de Refroidissement avec de l'alcool isopropylique, démonter le Verrou de Couvercle en le soulevant d'un côté.
- ▶ Pour commencer, appuyez sur le Verrou de Couvercle d'un côté et tirez-le vers le haut et vers le côté opposé.



- ▶ Faites ensuite glisser le Verrou de Couvercle sur le côté relevé en direction du côté opposé.


i Beim Signet-Hologramm auf dem Deckelriegel handelt es sich um einen Aufkleber.

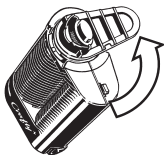

- ▶ Démonter la base de l'Unité de Refroidissement du Vaporisateur en le dévissant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



- ▶ Dégager le grand Joint de Base sur l'évidement de rainure à l'aide de l'Outil de Chambre de Remplissage.
- ▶ Retirer le petit Joint de Base.

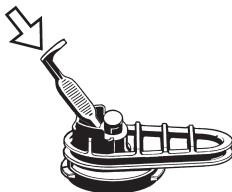

- ▶ Pousser le Tamis, pour l'éloigner de la Base de l'Unité de Refroidissement, à l'aide de l'outil pour Chambre de Remplissage.

de

en

fr

es

it

nl

7.1.3 Nettoyage

**ATTENTION****L'alcool isopropylique est facilement inflammable**

Risque de brûlure

- **Respecter les consignes de sécurité du producteur de l'alcool isopropylique !**

- i** Pour le nettoyage manuel, utiliser la Brosse de Nettoyage ainsi que des cotons-tiges et un chiffon en coton ou une serviette en papier. Comme solvant, nous recommandons de l'eau de rinçage chaude ou de l'alcool isopropylique.



- Laisser toutes les pièces de l'Unité de Refroidissement (sauf le Verrou de Couvercle) ainsi que le Tamis de la Chambre de Remplissage pendant une demi-heure au maximum dans l'alcool isopropylique.

- i** Un contact plus long avec l'alcool isopropylique peut entraîner des décolorations ou la friabilité des pièces en plastique.

- Bien laisser sécher tous les composants.
- Contrôler la présence de surfaces endommagées, de fissures, de parties amollies ou durcies, de salissures ou de décolorations sur toutes les différentes pièces
- Remplacer les pièces abîmées.

- i** Si nécessaire, nettoyer le verrou de couvercle avec de l'eau de rinçage chaude ou l'essuyer avec de l'alcool isopropylique.

AVIS**Dommages matériels provoqués par un nettoyage non conforme !**

L'autocollant avec signet hologramme peut se décolorer et l'adhésif peut se dissoudre

- **Éviter tout contact prolongé avec l'alcool isopropylique**

- i** Le Moulin à Herbes, l'Accessoire de Remplissage et le Magasin disponibles en option ne doivent pas être trempés dans de l'alcool isopropylique. Nettoyer ces pièces au lave-vaisselle ou dans de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle.

7.1.4 Assemblage

- ▶ Remonter les pièces dans l'ordre inverse des opérations de démontage.

i Veiller au positionnement correct des Joints de Base lors du remontage. Le petit Joint de Base en particulier devra bien être mis en place dans le couvercle de l'Unité de Refroidissement et ne plus être visible.

- ▶ Le Tamis supérieur doit être soigneusement mis en place dans la rainure prévue à cet effet.

i Une mise en place incorrecte peut entraîner la pénétration de particules végétales dans l'Unité de Refroidissement, avec un risque d'encrassement, ou d'inhalation de ces particules.

7.2 Tamis

- ▶ Nettoyer les Tamis avec la Brosse de Nettoyage fournie après chaque utilisation.

7.3 Nettoyage de la chambre de remplissage

i Si le Tamis inférieur est bouché, un nettoyage de la chambre de remplissage est obligatoire.

7.3.1 Démontage du Tamis inférieur

- ▶ Retirer le Tamis inférieur en le poussant le long de la rainure de la chambre de remplissage à l'aide

de l'Outil de Chambre de Remplissage. Cela fera se bomber le Tamis inférieur et il se détachera de la rainure.

7.3.2 Nettoyage

- ▶ Nettoyer la chambre de remplissage à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

i Veiller à ce que l'alcool isopropylique ne coule pas à l'intérieur de l'appareil.

7.3.3 Montage du Tamis inférieur

- ▶ Bombez le Tamis inférieur.
- ▶ Poser le Tamis inférieur dans la chambre de remplissage avec le côté bombé vers le haut.
- ▶ Appuyer sur le Tamis à l'aide de l'Outil pour Chambre de remplissage pour le mettre à plat dans la Rainure prévue.

7.4 Vaporisateur et Cordon USB-C

AVIS

Dommages matériels provoqués par un nettoyage non conforme !

De l'eau peut pénétrer à l'intérieur et endommager le Vaporisateur ou le Cordon USB-C

- **Ne pas plonger dans l'eau ou dans d'autres liquides**
- **Ne pas nettoyer avec un jet direct d'eau, de vapeur ou d'air comprimé**

- ▶ Débrancher le Cordon USB-C de la source d'alimentation.
- ▶ Couper le Vaporisateur.
- ▶ Nettoyer le Boîtier du Vaporisateur et le Cordon USB-C exclusivement avec un chiffon sec ou éventuellement humide.

L'Application Web Storz & Bickel n'est pas nécessaire au fonctionnement du Vaporisateur mais permet toutefois des réglages séparés et la lecture d'informations supplémentaires lors du fonctionnement du Vaporisateur. Elle permet de connecter un Vaporisateur à un smartphone via Bluetooth®.

8.1 Réglages par défaut

- Température de base : 180°C (356°F)

- Booster température (= température amplifiée) : +15°C (+27°F) (par rapport à la température de base), soit 195°C (383°F)

- Superbooster température (= Température super amplifiée) : +30°C (+54°F) (par rapport à la température de base), soit 210°C (410°F).

Luminosité des voyants LED CRAFTY+ : 100%

Témoin de charge CRAFTY+ : ON

Vibration CRAFTY+ : ON

Vibration smartphone : OFF

Alarme acoustique smartphone : OFF

8.2 Etablissement de la connexion entre le Vaporisateur et un smartphone

Allumez le smartphone et assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée et qu'elle n'est pas bloquée

par un autre appareil Bluetooth®. Allumez ensuite le Vaporisateur et ouvrez un navigateur qui prend en charge la connectivité Bluetooth® (pour plus d'informations, rendez-vous sur www.storz-bickel.com/app/web).

Rendez-vous sur app.storz-bickel.com. Cliquez sur « Se connecter » et sélectionnez votre Vaporisateur.

8.3 Points de menu de l'application Web STORZ & BICKEL

Température

Vous pouvez lire ici les températures réglées et les températures effectives, et procéder aux réglages de température. Vous trouverez également ici le témoin de charge du Vaporisateur.

Appareil

Cette section contient des informations relatives à l'appareil, telles que les heures de fonctionnement, les versions du logiciel, etc.

Pour savoir quelles autres fonctionnalités spécifiques à l'appareil peuvent être réglées via l'application Web, rendez-vous sur : <https://www.storz-bickel.com/app/web>

Informations

Vous trouverez ici des informations complémentaires, par ex. les listes de plantes, le Quick Start Manual, le Mode d'Emploi, les conditions générales de vente, la déclaration de confidentialité, ainsi que des liens directs vers la page

de

en

fr

es

it

nl

d'accueil ou la boutique en ligne de STORZ & BICKEL.

8.4 Réglage de température avec l'application Web STORZ & BICKEL

- i** En plus des trois niveaux de température réglés en usine, vous pouvez également choisir des températures comprises entre 40°C et 210°C (104°F et 410°F) (voir chapitre 4. « Liste de plantes », page 79).
- ▶ En appuyant brièvement sur la touche Plus supérieure, vous augmentez la valeur de consigne de 1 degré.
- ▶ En appuyant brièvement sur la touche Moins supérieure, vous diminuez la valeur de consigne de 1 degré.
- ▶ Une activation longue de la touche Plus ou Moins fait défiler les valeurs de consigne dans le sens correspondant.
- i** La température actuelle (température réelle) peut être lue sur la première ligne en haut de l'écran.
- i** La booster température ou la superbooster température est toujours obtenue en ajoutant une valeur à la température de base ou à la booster température. En outre, la différence de degrés entre la Température de base et la booster température peut

être ajustée au degré près en appuyant sur les touches inférieures Plus et Moins. La différence de degrés entre la booster température et la superbooster température est fixe et est toujours de +15°C (+27°F). En l'occurrence, une température de 210°C (410°F) ne peut pas être dépassée.

Fahrenheit/Celsius

- ▶ Si vous appuyez en même temps le touche Plus et Moins, vous passez des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit et inversement.

Témoin de charge



- i** Le témoin de charge est indiqué par un symbole de batterie avec six champs de charge. En fonction de l'état de charge, un nombre plus ou moins élevé de champs de charge devient visible.
- ▶ Batterie pleine : affichage des six champs de statut de charge
- ▶ Batterie presque vide : cadre de batterie clignote
- ▶ Chargement : l'indicateur de charge clignote et indique l'état de charge actuel.

8.5 Réinitialisation aux réglages par défaut

Il est possible de réinitialiser les réglages modifiés au moyen de l'application Web STORZ & BICKEL :

- ▶ Mettre le Vaporisateur sous tension.
- ▶ Appuyer sur la Touche Marche / Arrêt (ON/OFF) pendant 10 secondes. La réinitialisation est confirmée par le chenillard : rouge/vert/bleu/rouge/vert/bleu/rouge/vert/bleu et par une vibration pendant le chenillard.

de

en

fr

es

it

nl

Set de Pièces d'Usures - SKU 06 02 CY

Le Set de Pièces d'Usure contient toutes les pièces de rechange nécessaires pour remettre l'Unité de Refroidissement en état.

Unités de Refroidissement, 3 pièces - SKU 03 05 CY /

Unité de Refroidissement- SKU 03 04 CY

L'Unité de Refroidissement refroidit la Vapeur et permet d'obtenir une température agréable et un arôme optimal. Remplacer régulièrement l'Unité de Refroidissement afin de garantir la propreté. L'embout est inclus avec l'unité de refroidissement.

Embouts, 4 pièces - SKU 11 72

L'embout est placé sur l'unité de refroidissement.

Verrous de Couvercle, 3 pièces - SKU 11 53

Le Verrou de Couvercle fixe le couvercle à la base de l'Unité de Refroidissement.

Set de Tamis, petit - SKU 11 12

Le Set contient quatre Tamis avec maillage grossier pour l'Unité de Refroidissement et deux Tamis avec Maillage normal pour la chambre de remplissage.

Gros Tamis, petit, 6 pièces - SKU 11 40

Le petit tamis avec maillage grossier est utilisé dans le fond de l'unité de refroidissement.

Tamis standards, petit, 6 pièces - SKU 11 03

Le petit tamis avec maillage normal est utilisé dans le couvercle de l'unité de refroidissement.

Set de Joints- SKU 06 01 CY

Le Set contient tous les joints nécessaires à l'Unité de Refroidissement et à la chambre de remplissage..

Moulin à Herbes - SKU 11 84 /

Moulin à Herbes XL - SKU 11 85

Le Moulin à Herbes dispose de dents de coupe très tranchantes permettant d'obtenir de l'herbe finement moulue.

Accessoire de Remplissage - SKU 11 95

L'Accessoire de Remplissage permet de remplir le matériel végétal broyé proprement dans la chambre de remplissage.

Outils de Chambre de Remplissage, 5 pièces - SKU 11 59

Les nombreuses possibilités d'utilisation de l'Outil de la Chambre de Remplissage sont décrites dans le présent Mode d'Emploi.

Capsules de Dosage, 40 pièces - SKU 09 33

Remplir les Capsules de Dosage de matériel végétal moulu. Jeter la Capsule de Dosage à la poubelle après son utilisation.

Magasin de Capsule de Dosage - SKU 09 32

Mettre les Capsules de Dosage remplies dans le Magasin. Le Couvercle du Magasin sert d'aide de remplissage pour les Capsules de Dosage.

Kit de Remplissage de Capsule de Dosage - SKU 09 45

Le Kit de Remplissage permet de remplir simultanément 40 Capsules de Dosage de matériel végétal broyé.

Brosses de Nettoyage, 3 pièces - SKU 11 24

La brosse de nettoyage sert entre autres à nettoyer la chambre de remplissage.

Chargeur Voiture 12 Volt - SKU 01 09 CY

Chargeur voiture pour recharger la batterie.

Vous trouverez ces produits et d'autres accessoires ainsi que des informations détaillées à ce sujet à l'adresse <https://www.storz-bickel.com>



de

en

fr

es

it

nl


9 ACCESSOIRES FACULTATIFS

9.1 Moulin à Herbes



- ▶ Placer le matériel végétal entre les deux coques du Moulin à Herbes.
- ▶ Fermer le Moulin à Herbes.
- ▶ Tourner le Moulin à Herbes plusieurs fois en avant et en arrière.

9.2 Accessoire de Remplissage

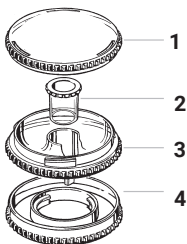

- 1 Couvercle supérieur
- 2 Bouchon
- 3 Coque
- 4 Couvercle inférieur

i L'Accessoire de Remplissage sert à remplir la chambre de remplissage simplement et proprement. Vous pouvez conserver le matériel végétal dans la Coque de l'Accessoire de Remplissage.

9.2.1 Remplir l'Accessoire de Remplissage



- ▶ Dévisser le couvercle supérieur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Remplir la coque ainsi que le Bouchon de matériel végétal haché.
- ▶ Installer le couvercle supérieur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

9.2.2 Remplissage de la chambre de remplissage avec l'Accessoire de Remplissage

- ▶ L'Unité de Refroidissement doit être démontée du Vaporisateur en la dévissant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Retirer les restes éventuels de la chambre de remplissage à l'aide de l'Outil de Chambre de Remplissage.
- ▶ Dévisser le couvercle inférieur de

9 ACCESSOIRES FACULTATIFS

l'Accessoire de Remplissage en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

- ▶ Placer l'Accessoire de Remplissage sur le Vaporisateur en le tournant de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ Dévisser le couvercle supérieur de l'Accessoire de Remplissage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Retirer le bouchon de l'Accessoire de Remplissage.



- ▶ Verser une portion de matériel végétal dans la chambre de remplissage par l'ouverture centrale.

i Veiller à ne pas trop remplir la Chambre de remplissage (voir le chapitre 6.4 « Remplir la Chambre de remplissage », page 82).

i Ne remplir la Chambre de remplissage que jusqu'au bord inférieur de l'Accessoire de Remplissage.



- ▶ Mettre le bouchon en place dans l'ouverture centrale.
- ▶ Installer le couvercle supérieur en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ Démontez l'Accessoire de Remplissage du Vaporisateur en le dévissant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Placer le Couvercle inférieur sur l'Accessoire de Remplissage en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Placer l'Unité de Refroidissement sur le Vaporisateur en la tournant de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

de

en

fr

es

it

nl

9.3 Capsules de Dosage (à usage unique) et Magasin



- i** Les Capsules de Dosage disponibles comme accessoires permettent de doser du matériel végétal haché et les conserver dans le Magasin jusqu'à l'utilisation.
- i** Les Capsules de Dosage sont des articles jetables qui doivent être jetés aux déchets résiduels après leur utilisation.

9.3.1 Remplissage des Capsules de Dosage

- ▶ Dévisser le Couvercle du Magasin



en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- ▶ Placer le Couvercle du Magasin sur la Capsule de Dosage ouverte.




- ▶ Verser une portion de matériel végétal dans la Capsule de Dosage par l'ouverture centrale.
- ▶ Fermer la Capsule de Dosage avec son couvercle.

9.3.2 Remplissage du Magasin avec les Capsules de Dosage


- ▶ Positionner les Capsules de Dosage remplies dans le Magasin.
- ▶ Fermer le Magasin en tournant le Couvercle du Magasin dans le sens des aiguilles d'une montre.



9.3.3 Installation des Capsules de Dosage dans la Chambre de Remplissage

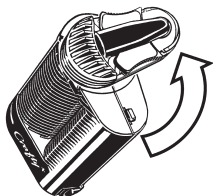

- ▶ L'Unité de Refroidissement doit être démontée du Vaporisateur en la dévissant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

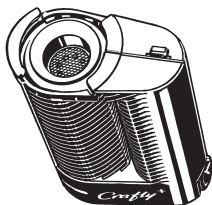

- ▶ Mettre en place la Capsule de Dosage dans la Chambre de Remplissage du Vaporisateur avec le Couvrecle vers le haut.
- ▶ Placer l'Unité de Refroidissement sur le Vaporisateur en la tournant de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre.

10.1 Pannes éventuelles / Recherche des causes de défaillances

| Panne | Cause possible / Réparation |
|---|--|
| Le Vaporisateur ne s'allume pas. | S'assurer que la batterie est bien chargée. |
| L’Affichage par LED clignote en rouge/bleu en alternance. | La température de batterie est soit trop élevée, soit trop faible. Laisser refroidir le Vaporisateur chaud, ou laisser chauffer le Vaporisateur froid. |
| L’Affichage par LED scintille en bleu. | La batterie est déchargée. Branchez le Bloc d’Alimentation ou le Chargeur Voiture. |
| L’Affichage par LED clignote en rouge/vert en alternance. | Le Cordon USB-C est inadapté. Utiliser le Cordon USB-C fourni. |
| L’Affichage par LED clignote en rouge/orange en alternance. | Le Vaporisateur est défectueux. |

10.2 Après une panne

- ▶ Mettre immédiatement le Vaporisateur hors tension.
- ▶ Débrancher le Vaporisateur de la source d'alimentation.
- ▶ Adressez-vous directement à notre Centre de Service.

10.3 Réforme

- ▶ Après l'expiration de la période de garantie légale, déposer le Vaporisateur irréparable au point de collecte pour recyclage, ou le retourner à notre Centre de Service.

11 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vaporisateur CRAFTY⁺ :

Tension d'entrée : 5 V DC

Les tensions indiquées sont postées sur la plaque signalétique du Vaporisateur.

Puissance absorbée par Vaporisateur : 10 W max.

Température de service : 5 °C - 35 °C / 41 °F - 95 °F

Température de fonctionnement :

entre env. 40 °C - 210 °C / 104 °F - 410 °F

Dimensions : 11,0 x 5,7 x 3,3 cm (4,3 x 2,2 x 1,3 inch)

Poids : env. 135 g (0,3 lb)

Sous réserve de modifications techniques.

Brevets et modèles déposés : www.storz-bickel.com/patents

12 RESPECT DES EXIGENCES LÉGALES ET NORMATIVES

Les appareils satisfont aux exigences des directives CE suivantes :

- IEC 60335
- EN 55011
- EN 61000-4-X



Fabricant:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Allemagne

13.1 Garantie légale

Les Produits S&B achetés directement sur le site storz-bickel.com ou par le biais d'un distributeur agréé sont assortis d'une Garantie Limitée de deux (2) ans à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine. Pour les clients situés en Californie qui achètent sur storz-bickel.com, la Garantie Limitée de S&B prend effet à compter de la date de livraison à l'acheteur d'origine.

Hormis les produits MIGHTY, CRAFTY+ et PLENTY, si un client enregistre un Produit S&B acheté sur www.storz-bickel.com/registration dans les quatre semaines suivant l'achat, S&B octroie une année de garantie supplémentaire.

S&B garantit uniquement les produits MIGHTY+, CRAFTY+, VOLCANO HYBRID, VOLCANO CLASSIC, PLENTY, VENTY et MIGHTY (les « Produits S&B ») contre les défauts de matériaux et de fabrication dans les Conditions Normales d'Utilisation (telles que définies ci-dessous) pendant 2 ans à compter de la date d'achat au détail directement sur S&B.com (ou de la date de livraison pour les clients situés en Californie), ou de la date d'achat auprès d'un distributeur agréé (veuillez consulter notre site Internet).

La présente Garantie Limitée ne couvre pas l'utilisation du produit à des fins commerciales, les dommages dus

à une mauvaise utilisation, à une maintenance ou un stockage incorrect ou à l'usure normale, les produits rénovés ou les réparations non autorisées du produit.

En outre, la Garantie Limitée ne couvre pas les produits autres que les Produits S&B, ni aucun accessoire, équipement annexe ou composant, y compris, sans toutefois s'y limiter, les Batteries, Ballons, Unités de Refroidissement, Chargeurs voiture et adaptateurs, Chambre de Remplissage (VOLCANO), Tubes, Tamis, Capsules de Dosage et accessoires inclus avec lesdits Produits S&B.

La présente Garantie Limitée est soumise aux lois de la République fédérale d'Allemagne, à l'exclusion de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

Vous trouverez toutes les conditions de garantie ici : www.storz-bickel.com/legal/warranty.

13.2 Responsabilité

STORZ & BICKEL est responsable des dommages encourus par le client causés par nos produits selon les dispositions du droit allemand et selon nos CGV. Une responsabilité n'existe donc que pour les dommages causés intentionnellement ou par négligence grossière à moins qu'il ne s'agisse d'une at-

teinte à la vie, à l'intégrité physique et à la santé ou si la blessure concerne des obligations essentielles du contrat.

13.3 Droit d'auteur

Ce document est protégé par la législation relative au droit d'auteur et ne peut en aucun cas être exploité, totalement ou partiellement, sans autorisation écrite préalable de STORZ & BICKEL au sens des §§ 15 et suivants de la loi allemande relative aux droits d'auteur (UrhG).

de

en

fr

es

it

nl

| | |
|---|---------------|
| Lista de Contenido | página |
| 1 Vista General del Producto CRAFTY+ | 108 |
| 1.1 Volumen de Suministro..... | 108 |
| 1.2 Elementos de Funcionamiento | 107 |
| 1.3 Servicio..... | 109 |
| 2 Por su Seguridad | 110 |
| 2.1 Símbolos..... | 110 |
| 2.2 Explicación de Símbolos..... | 110 |
| 2.3 Reglas fundamentales..... | 112 |
| 2.4 Instrucciones de Seguridad..... | 113 |
| 2.4.1 Riesgo de Lesiones por Descarga eléctrica | 113 |
| 2.4.2 Riesgo de Lesiones por Quemaduras / Vapores..... | 113 |
| 2.4.3 Riesgo de Lesiones por Causas diversas..... | 113 |
| 3 Función | 114 |
| 4 Vista General de Plantas | 114 |
| 5 Factores de Influencia sobre la Vaporización | 115 |
| 6 Puesta en Servicio y Funcionamiento | 116 |
| 6.1 Desempaquetado | 116 |
| 6.2 Alimentación Eléctrica..... | 116 |
| 6.3 Carga de la Batería..... | 116 |
| 6.4 Llenado del Depósito | 117 |
| 6.5 Calentamiento | 117 |
| 6.5.1 Ajustes de Fábrica..... | 117 |
| 6.5.2 Temperatura básica..... | 118 |
| 6.5.3 Booster temperatura | 118 |
| 6.5.4 Superbooster temperatura..... | 118 |
| 6.6 Uso | 118 |
| 6.7 Fin del Uso..... | 119 |
| 6.8 Apagado automático | 119 |
| 6.9 Almacenaje..... | 119 |

| | |
|--|---------------|
| Lista de Contenido | página |
| 7 Limpieza | 120 |
| 7.1 Unidad de Enfriamiento | 120 |
| 7.1.1 Vista general..... | 120 |
| 7.1.2 Desmontaje | 120 |
| 7.1.3 Limpieza..... | 122 |
| 7.1.4 Montaje..... | 122 |
| 7.2 Mallas | 123 |
| 7.3 Limpieza del Depósito | 123 |
| 7.3.1 Desmontaje de la Malla inferior | 123 |
| 7.3.2 Limpieza..... | 123 |
| 7.3.3 Montaje de la Malla inferior | 123 |
| 7.4 Vaporizador y Cable USB-C..... | 123 |
| 8 Aplicación Web STORZ & BICKEL | 124 |
| 8.1 Ajustes de Fábrica | 124 |
| 8.2 Establecimiento de Conexión del Vaporizador con un Teléfono inteligente..... | 124 |
| 8.3 Los Puntos del Menú de la Aplicación Web STORZ & BICKEL | 124 |
| 8.4 Ajuste de Temperatura con la Aplicación Web STORZ & BICKEL..... | 125 |
| 8.5 Reinicio a Ajustes de Fábrica | 126 |
| 9 Accesorios opcionales | 130 |
| 9.1 Molinillo de Hierbas | |
| 9.2 Dispositivo de Insuflación..... | 129 |
| 9.2.1 Llenado del Dispositivo de Insuflación | 129 |
| 9.2.2 Llenado del Depósito con el Dispositivo de Insuflación..... | 130 |

de

en

fr

es


it

nl

| | |
|---|---------------|
| Lista de Contenido | página |
| 9.3 Cápsulas Monodosis (para un único Uso) y Depósito..... | 130 |
| 9.3.1 Llenado de las Cápsulas Monodosis..... | 131 |
| 9.3.2 Llenado del Depósito con las Cápsulas Monodosis..... | 131 |
| 9.3.3 Colocación de la Cápsula Monodosis en el Depósito..... | 131 |
| 10 Fallos | 133 |
| 10.1. Posibles Problemas / Depuración..... | 133 |
| 10.2. En Caso de Problemas..... | 133 |
| 10.3. Eliminación de Desechos..... | 133 |
| 11 Datos Técnicos | 134 |
| 12 Cumplimiento de los Requisitos legales y normativos | 134 |
| 13 Garantía Legal, Responsabilidad | 135 |
| 13.1 Garantía Legal..... | 135 |
| 13.2 Responsabilidad..... | 135 |
| 13.3 Derecho autorial..... | 136 |

1 VISTA GENERAL DEL CRAFTY+

1.1 Volumen de Suministro

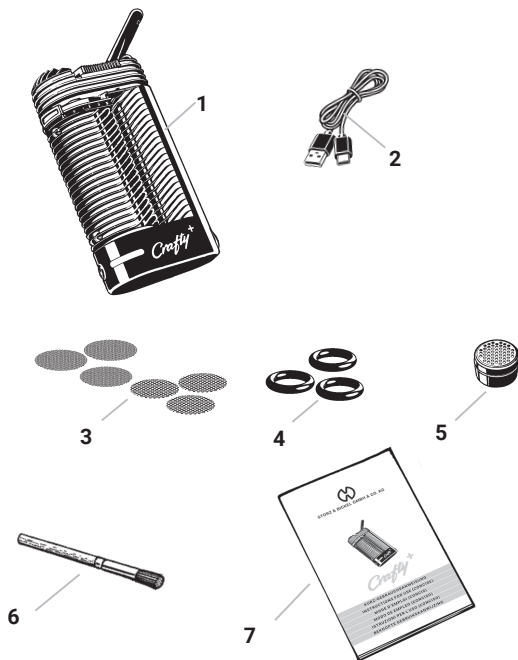

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | CRAFTY+ Vaporizador | 5 | 1 pz. Cápsula Monodosis |
| 2 | 1 pz. Cable USB-C | 6 | 1 pz. Cepillo de Limpieza |
| 3 | 3 pz. Malla normal (pequeña) 3 pz. Malla gruesa (pequeña) | 7 | 1 pz. Modo de Empleo (conciso) |
| 4 | 3 pz. Anillo de Sellado de Fondo (pequeño) | | |

de

en

fr


es

it

nl

1 VISTA GENERAL DEL CRAFTY+

1.2 Elementos de Funcionamiento

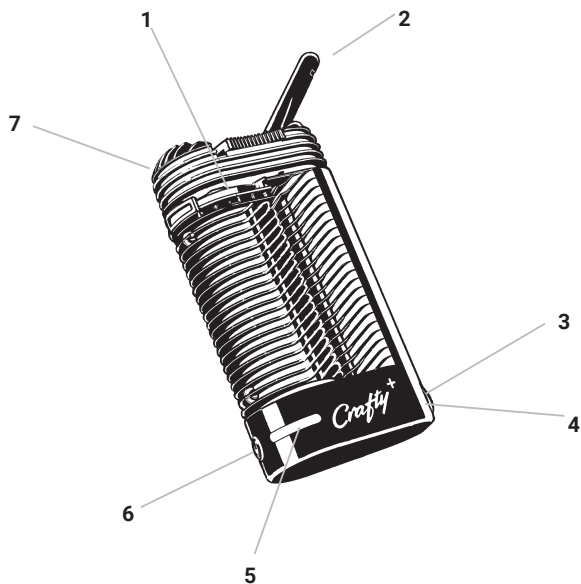

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Depósito | 5 | Visor LED |
| 2 | Boquilla | 6 | Interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF) |
| 3 | Herramienta de Depósito | 7 | Unidad de Enfriamiento |
| 4 | Enchufe de Carga USB-C (detrás de la Herramienta de Depósito) | | |

1.3 Servicio

En caso de entrega incompleta, problemas técnicos, consultas acerca del aparato y de su eliminación, así como en casos de prestación de garantía, contacte con nuestro Service Center: www.storz-bickel.com/contact

Para solicitudes de servicio inicie un RMA (Return Merchandise Authorization) en nuestra página web: www.storz-bickel.com/rma.

de

en

fr





es

it

nl

2 POR SU SEGURIDAD

2.1 Explicación de Símbolos

| | |
|---|-------------------------|
|  | Símbolo de enumeración |
|  | Símbolo de peligro |
|  | Instrucciones de manejo |
|  | Nota |

2.2 Símbolos



Tenga en cuenta el Modo de Empleo.



Símbolo del fabricante - al lado del símbolo se encuentran el nombre y la dirección del fabricante



El dispositivo no se debe eliminar el dispositivo en la basura doméstica normal. El símbolo de cubo de basura tachado indica la necesidad de una recolección separada. El Vaporizador incluye una batería incorporada de iones de litio, deberá estar descargada para su eliminación.



El distintivo europeo de conformidad: El fabricante certifica con este distintivo la conformidad del producto con las directivas y normas vigentes de la Unión Europea.

2 POR SU SEGURIDAD



Comprobación de seguridad y control de fabricación realizados por TUEV SUEDE según EN 60335-1, UL 499 y CAN/CSA 22.2 No. 64-M91.



¡Atención: superficie caliente!



Proteger de los rayos solares.



Proteger contra la humedad.



Símbolo del número de serie



Símbolo de número de referencia/número de artículo/sku



Corriente continua



Aparato de la clase de protección II

de

en

fr

es

it

nl

2.3 Reglas fundamentales

Guarde estas instrucciones.

- ▶ Este Modo de Empleo es una parte esencial del Vaporizador y ha facilitarse el acceso al usuario.
- ▶ Descargue la versión detallada actual del Modo de Empleo en www.storz-bickel.com.
- ▶ Lea estas indicaciones atentamente al completo antes de poner en funcionamiento el Vaporizador y el Cable USB-C.
- ▶ En caso de uso y de mantenimiento, siga las instrucciones de este Modo de Empleo.
- ▶ Este Vaporizador no es apto para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo la supervisión o sigan las indicaciones relacionadas con el uso del Vaporizador proporcionadas por la persona responsable de su seguridad. Los niños no deberán manipular el Vaporizador.
- ▶ Si el usuario presenta una patología de las vías respiratorias o del pulmón, sólo podrá usar este dispositivo previa consulta y consentimiento del médico que le trata. Según la densidad, los vapores pueden irritar las vías respiratorias y los pulmones, lo que puede conducir a tos.
- ▶ No deje el Vaporizador desatendido mientras está en funcionamiento.
- ▶ Almacene y utilice el Vaporizador y el Cable USB-C sólo a una distancia suficiente de las fuentes de calor (estufa, horno, chimenea, etc.) y en un lugar seco, en el cual la temperatura ambiente no pueda descender por debajo de +5 °C (+41 °F).
- ▶ No exponga el Vaporizador a oscilaciones extremas de la temperatura ambiente. La humedad de condensación puede perjudicar la capacidad de funcionamiento.
- ▶ Emplee únicamente accesorios y recambios originales de STORZ & BICKEL.
- ▶ No emplee un Vaporizador y Cable USB-C inadecuado, incorrecto o de forma insensata, dado que el fabricante no se responsabiliza en este caso de los daños resultantes.
- ▶ En caso de uso del dispositivo en condiciones abusivas, la batería podría expulsar un líquido; evitar el contacto. En caso de contacto accidental, enjuagar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicitar además asistencia médica. El líquido expulsado de la batería podría causar irritación o quemaduras.

2.4 Instrucciones de Seguridad

2.4.1 Riesgo de Lesiones por Descarga eléctrica

- ▶ Apague el Vaporizador y desconecte el Cable USB-C de la red eléctrica después de su uso, antes de realizar tareas de mantenimiento y en caso de tormenta.
- ▶ Observe que el Cable USB-C no esté dañado por dobleces, aplastamientos o tracción.
- ▶ No emplee enchufes múltiples y/o cables alargadores.
- ▶ No emplee el Vaporizador y el Cable USB-C si están dañados. Las reparaciones sólo pueden ser efectuadas por nuestro Service Center. El intento de subsanar los daños por sí solo provocará la pérdida de la prestación de garantía. Nuestro Service Center sustituye un Cable USB-C.
- ▶ Procure que el Vaporizador y el Cable USB-C entren en contacto con líquidos y humedad.
- ▶ Mantenga el Vaporizador y el Cable USB-C alejado de los animales domésticos (p. ej. roedores) y parásitos.
- ▶ No emplee el Vaporizador o el Cable USB-C en un entorno con riesgo de explosión o en atmósferas explosivas.

2.4.2 Riesgo de Lesiones por Quemaduras / Vapores

- ▶ No toque las superficies calientes del Vaporizador (Depósito y entorno del Depósito) durante el servicio y la fase de enfriamiento.
- ▶ Coloque el Vaporizador caliente sólo sobre una superficie sólida y resistente al calor y asegúrese de que no esté cubierto por ningún objeto.
- ▶ No utilice el Vaporizador cerca de objetos inflamables, como por ejemplo cortinas, manteles o papel.
- ▶ No cierre, cubra u obstruya los orificios del dispositivo del Vaporizador durante la operación y la fase de enfriamiento.
- ▶ Antes de conectar el Vaporizador, asegúrese de que se han evaporado todos los vapores de, p. ej., los productos de limpieza y desinfección inflamables.

2.4.3 Riesgo de Lesiones por Causas diversas

- ▶ Los elementos de envasado (bolsas de plástico, piezas de poliestireno expandido, cartones, etc.) se deben mantener fuera del alcance de los niños, ya que representan un riesgo potencial.
- ▶ Observe que las piezas pequeñas del Vaporizador no sean ingeridas.
- ▶ Tenga en cuenta el riesgo de estrangulamiento mediante el Cable USB-C.

de

en

fr

es

it

nl

2 POR SU SEGURIDAD

- ▶ Emplee el Vaporizador únicamente con las hierbas y vegetales que desea vaporizar.
- ▶ Observe los síntomas (p. ej. tos, dificultad respiratoria, dolor en el tórax) durante o tras el uso y consulte inmediatamente a un médico si tiene dudas relativas a la salud.

3 FUNCIÓN

El Vaporizador está destinado a la producción de aromas u olores a partir de las hierbas y plantas detalladas en el capítulo 4 , página 117. Con la vaporización mediante aire caliente se desprenden los olores y aromas y se pueden inhalar directamente.

El Vaporizador no es un producto médico.

4 VISTA GENERAL DE PLANTAS

- ▶ Vaporice sólo olores y aromas de los materiales vegetales incluidos aquí y que han sido comprobados según las directrices de la farmacopea europea (o similar) en cuanto a su autenticidad, pureza y ausencia de patógenos.
- ▶ Adquiera estas plantas o partes vegetales en la farmacia.
 - i** Cualquier uso diferente es inapropiado y constituye un riesgo potencial.
 - i** El Vaporizador no está diseñado para usarse con tabaco o productos con nicotina.

4 VISTA GENERAL DE PLANTAS

| Nombre de Planta | Nombre botánico | Parte utilizada de la planta | Regulación de temperatura |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Eucalipto | <i>Eucalyptus globulus</i> | las hojas | 130°C (266°F) |
| Lúpulo | <i>Humulus lupulus</i> | las piñas | 154°C (309°F) |
| Manzanilla | <i>Matriarca chamomilla</i> | las flores | 190°C (374°F) |
| Lavanda | <i>Lavandula angustifolia</i> | las flores | 130°C (266°F) |
| Melisa | <i>Melissa officinalis</i> | las hojas | 142°C (288°F) |
| Salvia | <i>Salvia officinalis</i> | las hojas | 190°C (374°F) |
| Tomillo | <i>Thymus vulgaris</i> | la hierba | 190°C (374°F) |

5 FACTORES DE INFLUENCIA SOBRE LA VAPORIZACIÓN

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para poder configurar el Vaporizador con el material vegetal empleado por usted para sus necesidades personales.

La cantidad de aromas y olores vaporizados se puede influir mediante los factores siguientes:

1. Calidad: La concentración de los aromas y los olores contenidos en el material vegetal correspondiente.
2. Cantidad: La cantidad del material de vaporización en el Depósito.
3. Superficie: Cuanto más trituradas estén las plantas, tanto mayor será la superficie de la que se puedan vaporizar aromas y olores durante el proceso de vaporización.

4. Temperatura: cuanto mayor es la temperatura, más aromas y olores se desprenden de una vez. El aumento de la temperatura debería ser siempre el último recurso, ya que el material vegetal tiene un sabor menos agradable a temperaturas más altas.

Puede repetir el Procedimiento de vaporización con el mismo contenido del Depósito tantas veces como sea necesario hasta que no se genere vapor a la máxima temperatura.

6.1 Desempaquetado

- ▶ Compruebe la integridad del Vaporizador conforme al capítulo 1.1 "Volumen de Entrega", página 108.

6.2 Alimentación Eléctrica

- ▶ Compruebe si el Vaporizador y el Cable USB-C presentan daños externos visibles.

6.3 Carga de la Batería

- ▶ Antes del primer uso, cargue la batería completamente.
 - ▶ Conecte el Vaporizador con un Cargador USB mediante el Cable USB-C incluido en el volumen de entrega.
- i** El proceso de carga se confirma mediante el indicador LED (iluminación breve en verde/rojo/azul) y vibración.

- i** El estado de carga de la batería se indica con luces azules del visor LED.

Explicaciones del visor de batería durante el proceso de carga:

- ▶ Luz permanente azul: la batería está cargada por completo
- ▶ Destello lento en azul: la batería está cargada a aprox. 61–96 %.
- ▶ Destello rápido azul: la batería está cargada a aprox. 31–60 %
- ▶ Destello azul: la batería está cargada a aprox. 30 %

Explicaciones del visor de batería después del apagado:

- ▶ Luz permanente azul: la batería está cargada a aprox. 64–100 %.
- ▶ Destello lento azul: la batería está cargada a aprox. 32–63 %
- ▶ Destello rápido azul: la batería está cargada a aprox. 1–31 %
- ▶ Destello azul: la batería está agotada.
- ▶ Tras finalizar el proceso de carga, desconecte primero el Cable USB-C del suministro eléctrico y luego del Vaporizador.

- i** No podrá operar el Vaporizador mientras esté conectado con el Cable USB-C a una fuente de energía. Sólo tras la carga parcial, podrá conectarlo de nuevo.


AVISO

Pérdida de garantía legal / daños materiales en caso de recambio de la batería por su propia cuenta


En caso de apertura inadecuada del Vaporizador, este resultará dañado.

- **Recambio de la batería solo por parte de nuestro Service Center**

6.4 Llenado del Depósito

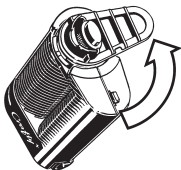

- ▶ Desenrosque la Unidad de Enfriamiento girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj del Vaporizador.

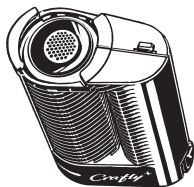

- ▶ Llene completamente el Depósito con material vegetal molido hasta el borde de plástico.
- i** El material vegetal demasiado comprimido o un Depósito excesivamente lleno dificulta la inhalación.
- ▶ Elimine el material vegetal sobrante alrededor de la tubuladura de llenado.
- ▶ Coloque la Unidad de Enfriamiento girándola 90° en sentido horario sobre el Vaporizador.

6.5 Calentamiento

6.5.1 Ajustes de Fábrica

El Vaporizador ofrece tres niveles de temperatura preestablecidos de fábrica:

- Temperatura básica: 180 °C (356 °F)
- Booster temperatura: (=temperatura de aceleración): +15°C (+27°F) (en relación a la temperatura básica) se corresponde a 195°C (383°F)
- Superbooster temperatura: Superbooster temperatura +30°C (+54°F) (en relación a la temperatura básica) corresponde a 210°C (410°F)

- i** A través de la aplicación web, puede cambiarse la temperatura básica y la temperatura Booster, así como la temperatura Superbooster. Véase para ello el capítulo 8. "Aplicación Web Storz & Bickel", página 124.

- i** Si el nivel de temperatura ya no es suficiente, pase al siguiente nivel tal como se describe abajo.

6.5.2 Temperatura básica

- ▶ Pulse el Interruptor de color naranja de Encendido/Apagado (ON/OFF) durante al menos medio segundo.
- i** Una vibración confirma el encendido y la luz roja fija del indicador LED señala que el vaporizador se está calentando. Cuando la batería está completamente cargada, el vaporizador tarda entre 60 y 80 segundos en calentarse. Una vibración doble y la luz verde permanente indican que se ha alcanzado la temperatura básica.


6.5.3 Booster temperatura (=temperatura de aceleración)

- ▶ Pulse dos veces el Interruptor de color naranja de Encendido/Apagado (ON/OFF).
- i** El indicador LED señala el calentamiento mediante un parpadeo rápido en color rojo. Una vibración doble y el parpadeo verde rápido indican que se ha alcanzado la temperatura Superbooster.
- i** El modo Booster finaliza automáticamente cuando se alcanza la temperatura Booster transcurridos 90 segundos; la temperatura nominal es posteriormente de nuevo la temperatura básica.

6.5.4 Superbooster temperatura

- ▶ Pulse tres veces el Interruptor de color naranja de Encendido/Apagado (ON/OFF).
- i** El indicador LED señala el calentamiento mediante un parpadeo rápido en color rojo. Una vibración doble y el parpadeo verde rápido indican que se ha alcanzado la temperatura Superbooster.
- i** El modo Superbooster finaliza automáticamente cuando se alcanza la temperatura Superbooster transcurridos 90 segundos; la temperatura nominal es posteriormente de nuevo la temperatura básica.

6.6 Uso

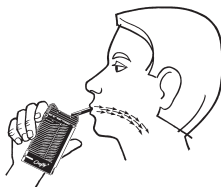

- i** Inicie la vaporización una vez que se haya completado el calentamiento.
- ▶ Despliegue la Boquilla de la Unidad de Enfriamiento.
- ▶ Tome la Boquilla entre los labios.
- ▶ Respire uniformemente durante algunos segundos a la mitad de su capacidad pulmonar real.

- ▶ Contenga el aire durante algunos segundos y exhale lentamente.
- ▶ Concéntrese enteramente en el proceso respiratorio.
- i** Cuanto más intenso es el vapor, más afectará al sabor.



ATENCIÓN

Problemas de salud provocados por la inhalación de los vapores

Tos

- **No emplear en caso de enfermedad de las vías respiratorias/los pulmones**

6.7 Fin del Uso



ATENCIÓN

Superficie caliente del Depósito

Cuidado con la superficie caliente

- **No tocar el Depósito mientras el Vaporizador aún no se haya enfriado.**

- ▶ Pulse el Interruptor de Encendido/Apagado de color naranja (ON/OFF) al menos durante medio segundo.
- i** El Vaporizador confirma el apagado con una vibración.

- ▶ Deje enfriar completamente el Vaporizador.
- ▶ En caso necesario, realice la limpieza del Vaporizador tal como se describe en el capítulo 7 "Limpieza" de la página 119.

6.8 Apagado automático

- i** Dos minutos tras la última pulsación de las teclas o la última aplicación, se desconecta el Vaporizador automáticamente para proteger el estado de carga de la batería.
- i** Pulsando brevemente el Interruptor de Encendido/Apagado (ON/OFF) durante la operación, podrá restaurarse de nuevo la desconexión automática a dos minutos.

6.9 Almacenaje

- ▶ Guarde el Vaporizador y el Cable USB-C en un lugar seco y protegido antes las inclemencias del tiempo y fuera del alcance de los niños o personas incapacitadas.

de

en

fr

es

it

nl


7 LIMPIEZA

7.1 Unidad de Enfriamiento

i La Unidad de Enfriamiento y la Boquilla deberán estar libre de deposiciones. Éstas se originan por condensado de vapor en el interior de la Unidad de Enfriamiento. Controle por eso la Unidad de Enfriamiento y la Boquilla antes de cada aplicación.

i Limpie la Unidad de Enfriamiento, incluida la boquilla, regularmente y cuando la utilicen varias personas. La limpieza es imprescindible para un funcionamiento.


7.1.1 Vista general

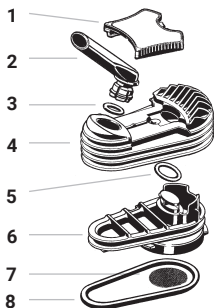

- 1 Cierre de Tapa
- 2 Boquilla
- 3 Anillo de Sellado de Boquilla
- 4 Tapa de Unidad de Enfriamiento
- 5 Anillo de Sellado de Fondo pequeño
- 6 Fondo de Unidad de Enfriamiento
- 7 Malla superior
(abertura de mallas gruesa)
- 8 Anillo de Sellado de Fondo grande

7.1.2 Desmontaje


i Asegúrese de que el Vaporizador esté completamente frío.

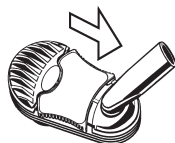

► Tire del cierre de la tapa en dirección a la Boquilla.



► Extraiga la tapa de la Unidad de Enfriamiento del Vaporizador.

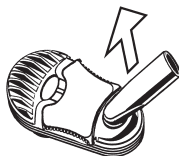

- Extraiga la Boquilla de la tapa de la Unidad de Enfriamiento tirando ligeramente en ambas direcciones.
- Retire el Anillo de Sellado de Boquilla.

7 LIMPIEZA




- ▶ En caso de limpieza de la tapa de la Unidad de Enfriamiento en alcohol isopropílico, retire el cierre de la tapa levantando en un lateral.
- ▶ En primer lugar, presione el cierre de la Tapa en un lateral y levántelo en el lado opuesto.



- ▶ A continuación, deslice el cierre de la Tapa en el lado levantado en dirección al lado opuesto.


i El holograma de signet en el cierre de la tapa es un adhesivo.

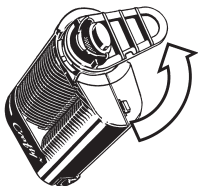

- ▶ Desenrosque el fondo de la Unidad de Enfriamiento girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj del Vaporizador.



- ▶ Levante el Anillo de Sellado de Fondo grande con la Herramienta del Depósito en la muesca de la ranura.
- ▶ Retire el pequeño Anillo de Sellado de Fondo.

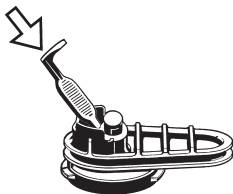

- ▶ Extraiga la Malla de la Base de la Unidad de Enfriamiento con ayuda de la Herramienta de la Cámara de Relleno.

de

en

fr

es

it

nl

7.1.3 Limpieza

**ATENCIÓN****El alcohol isopropílico es combustible y fácilmente inflamable**

Cuidado con la superficie caliente

- **¡Observe las indicaciones de seguridad del fabricante del alcohol isopropílico!**

- i** Para la limpieza manual son adecuados los Cepillos de Limpieza, así como los bastoncillos y los paños de papel o algodón. Recomendamos usar agua jabonosa tibia o alcohol isopropílico como disolvente.



- ▶ Sumerja todas las piezas de la Unidad de Enfriamiento (excepto el cierre de la Tapa), así como la Malla del Depósito como máximo 1/2 hora en alcohol isopropílico.
- i** Un contacto prolongado con alcohol isopropílico puede conducir a cambios de color o bien fragilidad de las piezas plásticas.

- ▶ Deje secar bien todas las piezas.
- ▶ Revise si las piezas están deterioradas, presentan grietas, reblandecimiento, endurecimiento, suciedad o decoloración.
- ▶ Sustituya las piezas deterioradas.
- ▶ Si es necesario, limpie el cierre de la tapa con agua jabonosa tibia o con alcohol isopropílico.

AVISO**¡Daños materiales provocados por una limpieza inadecuada!**

El adhesivo con el holograma signet puede decolorarse y disolverse su pegamento

- **Evite el contacto prolongado con alcohol isopropílico**

- i** El accesorio especial Molinillo de Hierbas, el Dispositivo de Insuflación y el Depósito no se pueden introducir en alcohol isopropílico. Lave estas piezas en el lavavajillas o con agua caliente de enjuague.

7.1.4 Montaje

- ▶ Monte las piezas en el orden inverso.
- i** Tenga en cuenta durante el montaje que el Anillo de Sellado debe tener un asiento correcto. En particular, el Anillo de Sellado de Fondo pequeño debe encajar en la tapa de la Unidad de Enfriamiento por completo y no estar visible.

7 LIMPIEZA

- ▶ Coloque cuidadosamente la Malla superior en la ranura prevista para ello.

i En caso de inobservancia, pueden entrar partículas vegetales en la Unidad de Enfriamiento, obstruirla e inhalarse.

7.2 Mallas

- ▶ Limpie la Malla del Depósito y la Malla de la Unidad de Enfriamiento después de cada uso con el Cepillo de Limpieza.

7.3 Limpieza del Depósito

i Es necesario realizar la limpieza del Depósito en cuanto la Malla inferior esté obstruida.

7.3.1 Desmontaje de la Malla inferior

- ▶ Retire la Malla del Depósito inferior presionando a lo largo de la ranura del Depósito con ayuda de la Herramienta del Depósito. De este modo, la Malla del Depósito se aboveda y se desprende de la ranura.

7.3.2 Limpieza

- ▶ Limpie el Depósito con un bastoncillo empapado en el alcohol isopropilo.

i Observe que no gotee alcohol isopropilo en el interior del dispositivo.

7.3.3 Montaje de la Malla inferior

- ▶ Curve la Malla inferior.
- ▶ Inserte la Malla inferior en el Depósito con el lado curvo hacia arriba.
- ▶ Presione la Malla al ras en la ranura provista usando la Herramienta de Depósito.

7.4 Vaporizador y Cable USB-C

AVISO

¡Daños materiales provocados por una limpieza inadecuada!

El agua puede penetrar y dañar el Vaporizador o el Cable USB-C

- **No sumergir en agua o en otros líquidos**
- **No limpiar con un chorro de agua directo, chorro de vapor directo o chorro de aire comprimido**

- ▶ Desconecte el Cable USB-C del suministro eléctrico.
- ▶ Desconecte el Vaporizador.
- ▶ Limpie la carcasa del Vaporizador y el Cable USB-C sólo en seco o, en el mejor de los casos, con un paño húmedo.

de

en

fr

es

it

nl

La Aplicación Web de Storz & Bickel no es necesaria para el servicio del Vaporizador, sin embargo permite configuraciones individuales y la lectura de información adicional en el servicio con el Vaporizador. El Vaporizador se conecta aquí por Bluetooth® a través de un smartphone.

8.1 Ajustes de Fábrica

- Temperatura básica: 180°C (356°F)
- Booster temperatura (=temperatura de aceleración): +15°C (27°F)
(en relación a la temperatura básica) se corresponde a 195°C (383°F)
- Superbooster temperatura: +30°C (54°F)
(en relación a la temperatura básica) corresponde a 210°C (410°F)
- Brillo de visor LED de CRAFTY+: 100%
- Visor de carga CRAFTY+: ON
- Vibración CRAFTY+: ON
- Vibración de teléfono inteligente: OFF
- Tono de alarma de teléfono inteligente: OFF

8.2 Establecimiento de Conexión del Vaporizador con un Teléfono inteligente

- ▶ Encienda el teléfono inteligente y asegúrese de que la función Bluetooth® está activada y de que no está bloqueada por otro dispositivo Bluetooth®. A continuación, encienda el Vaporizador y abra un navegador compatible con la conectividad Bluetooth® (más información en www.storz-bickel.com/app/web). Vaya a app.storz-bickel.com Haga clic en "Conectar" y seleccione su Vaporizador.

8.3 Los puntos del Menú de la Aplicación Web STORZ & BICKEL

Temperatura

Aquí puede leer las temperaturas configuradas y reales y realizar ajustes en las mismas. Además, también encontrará el visor de carga de Vaporizador.

Dispositivo

En esta sección se puede encontrar información relacionada con el dispositivo, como las horas de funcionamiento, las versiones de software, etc.

Para saber qué características adicionales específicas del dispositivo pueden ajustarse a través de la aplicación web de STORZ & BICKEL, visite: <https://www.storz-bickel.com/app/web>

Información

Aquí encontrará información detallada como p.ej. las listas de vegetales, el manual de inicio rápido, el modo de empleo, las condiciones generales comerciales, la declaración de protección de datos pero también enlaces directos a la página principal de STORZ & BICKEL o a la tienda online.

8.4 Ajuste de Temperatura con la Aplicación Web STORZ & BICKEL

i Además de los tres niveles de temperatura preconfigurados en fábrica, también puede configurar individualmente temperaturas de entre 40 °C y 210 °C (104°F y 410°F) (vea el capítulo 4, "Sinopsis de vegetales", página 114).

- ▶ Pulse brevemente la tecla (+) superior para aumentar el valor de referencia en pasos de un grado.
- ▶ Pulse brevemente la tecla (-) superior para reducir el valor de referencia en pasos de un grado.
- ▶ Mantenga pulsada esta tecla Más o Menos para que los valores de referencia marchen siempre en el sentido correspondiente.

i La temperatura actual (temperatura real) se puede leer en la línea superior de la pantalla.

i La booster temperatura siempre se añade la temperatura base. Adicionalmente se puede adaptar la diferencia de grados entre la

temperatura base y la booster temperatura con exactitud de grado a través de las teclas inferiores Más y Menos. La diferencia de grados entre la booster temperatura y la superbooster temperatura es fija y es siempre +15°C (27°F). No se debe superar un total de 210°C (410°F).

Fahrenheit/Celsius

- ▶ Presione al mismo tiempo la tecla (+) y (-) para modificar la pantalla de grados Celsius a grados Fahrenheit.

Visor de Carga



- i** El visor de carga presenta un símbolo de batería con seis campos de estado de carga. Dependiendo del estado carga, se verán más o menos campos de estado.
- ▶ Batería completa: indicador de los seis campos de estado de carga
 - ▶ Batería casi vacía: marco de batería con parpadeo
 - ▶ Carga: indicador de carga intermitente e indicación del estado de carga actual.

8.5 Reinicio a Ajustes de Fábrica

Los ajustes modificados mediante la aplicación web STORZ & BICKEL, se pueden restaurar del siguiente modo:

- ▶ Conecte el Vaporizador.
- ▶ Pulse y mantenga apretado el Interruptor de color naranja de Encendido/Apagado (ON/OFF) durante 10 segundos. El reseteo se confirma mediante una luz en movimiento: rojo/verde/azul/rojo/verde/azul/rojo/verde/azul y una vibración simultánea.

Juego de Piezas de Desgaste - SKU 06 02 CY

El Juego de Piezas de Desgaste incluye todas las piezas de repuesto necesarias para reemplazar la Unidad de Enfriamiento.

Unidades de Enfriamiento, 3 piezas - SKU 03 05 CY /**Unidad de Enfriamiento - SKU 03 04 CY**

La Unidad de Enfriamiento enfría el vapor y proporciona así una temperatura agradable y un aroma óptimo. Para garantizar la limpieza de la Unidad de Enfriamiento, ésta deberá sustituirse periódicamente. La Boquilla está incluida en la Unidad de Enfriamiento.

Boquillas, 4 piezas - SKU 11 72

La Boquilla se deposita en la Unidad de Enfriamiento.

Cierres de la Tapa, 3 piezas - SKU 11 53

El Cierre de la Tapa fija la tapa a la base de la Unidad de Refrigeración.

Juego de Mallas, pequeño - SKU 11 12

El Juego incluye cuatro Mallas de abertura gruesa para la Unidad de Enfriamiento y dos Mallas de abertura normal para la Depósito.

Mallas Gruesas, pequeño, 6 piezas - SKU 11 40

La pequeña Malla con una abertura de mallas gruesa se coloca en el suelo de la Unidad de Enfriamiento.

Mallas Normales, pequeño, 6 piezas - SKU 11 03

La pequeña Malla con una abertura de mallas normal se coloca en la tapa de la Unidad de Enfriamiento.

Juego de Anillos de Sellado - SKU 06 01 CY

El Juego incluye todos los Anillos de Sellado necesarios para la Unidad de Enfriamiento y el Depósito.

Molinillo de Hierbas - SKU 11 84 / Molinillo de Hierbas XL - SKU 11 85

El Molinillo de Hierbas tiene dientes cortantes especialmente afilados para moler hierbas finamente.

Dispositivo de Insuflación - SKU 11 95

El Dispositivo de Insuflación permite introducir limpiamente el material vegetal molido en el Depósito.

Herramientas del Depósito, 6 piezas - SKU 11 59

Los diversos usos de la Herramienta del Depósito se describen en este Modo de Empleo.

de

en

fr

es

it

nl

Cápsulas Monodosis, 40 piezas - SKU 09 33

El material vegetal triturado se puede rellenar en las Cápsulas Monodosis. Deseche las Cápsulas Monodosis tras el uso en la basura doméstica.

Depósito de Cápsula Monodosis - SKU 09 32

Guarde las Cápsulas Monodosis rellenas en el Depósito. La tapa del Depósito le sirve como ayuda de vertido para las Cápsulas Monodosis.

Juego de Llenado de Cápsula Monodosis - SKU 09 45

Con el Juego de Llenado podrá llenar 40 Cápsulas Monodosis al mismo tiempo con el material vegetal triturado.

Cepillos de Limpieza, 3 piezas - SKU 11 24

El Cepillo de Limpieza sirve, entre otras cosas, para la limpieza del Depósito.

Cargador para Coches de 12 Voltios - SKU 01 09 CY

Cargador para Coches para cargar la batería.

Encontrará éste y otros accesorios, así como información detallada al respecto en <https://www.storz-bickel.com>




9.1 Molinillo de Hierbas



- ▶ Coloque el material vegetal entre ambas bandejas del Molinillo de Hierbas.
- ▶ Cierre el Molinillo de Hierbas.
- ▶ Gire el Molinillo de Hierbas hacia delante y hacia atrás varias veces.

9.2 Dispositivo de Insuflación

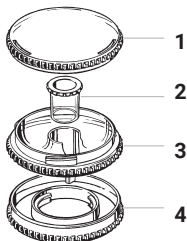

- 1 Tapa superior
- 2 Tope
- 3 Cubeta
- 4 Tapa inferior

i El Dispositivo de Insuflación permite llenar el Depósito de manera sencilla y limpia. En la cubeta del Dispositivo de Insuflación puede guardar material vegetal molido.

9.2.1 Llenado del Dispositivo de Insuflación



- ▶ Atornille la tapa superior en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- ▶ Rellene la cubeta incl. tope con material vegetal triturado.
- ▶ Coloque la tapa superior girándola en sentido de las agujas del reloj.

9.2.2 Llenado del Depósito con el Dispositivo de Insuflación

- ▶ Desenrosque la Unidad de Enfriamiento girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj del Vaporizador.
- ▶ Retire los posibles restos del Depósito con ayuda de la Herramienta de Depósito.
- ▶ Atornille la tapa inferior del Dispositivo de Insuflación en sentido de las agujas del reloj.

de

en

fr

es

it

nl

9 ACCESORIOS OPCIONALES

- ▶ Coloque el Dispositivo de Insuflación girándolo 90° en sentido horario sobre el Vaporizador.
- ▶ Atornille la tapa superior del Dispositivo de Insuflación en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- ▶ Saque los tapones del Dispositivo de Insuflación.



- ▶ Empuje una pequeña porción de material vegetal a través del orificio central en el Depósito.

- i** Observe que el Depósito no esté lleno en exceso (véase el capítulo 6.4, "Llenado del Depósito", página 117).



- i** Rellene el Depósito solo hasta el borde inferior del Dispositivo de Insuflación.

- ▶ Coloque el tope en el orificio central.
- ▶ Coloque la tapa superior girándola en sentido de las agujas del reloj.
- ▶ Desenrosque el Dispositivo de Insuflación girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj del Vaporizador.
- ▶ Coloque la tapa inferior girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj sobre el Dispositivo de Insuflación.
- ▶ Coloque la Unidad de Enfriamiento girándola 90° en sentido horario sobre el Vaporizador.

9.3 Cápsulas Monodosis (para un único Uso) y Depósito



- i** Con las Cápsulas Monodosis disponibles a modo de accesorio, podrá verter material vegetal triturado y conservar en el depósito hasta su uso.
- i** Las Cápsulas Monodosis son artículos desechables. Deséchelas tras el uso en la basura doméstica.

9 ACCESORIOS OPCIONALES

9.3.1 Llenado de las Cápsulas Monodosis



- ▶ Desatornille la tapa del compartimento en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- ▶ Coloque la tapa del compartimento sobre la Cápsula Monodosis abierta.



- ▶ Empuje una pequeña porción de material vegetal a través del orificio central en la Cápsula Monodosis.
- ▶ Cierre la Cápsula Monodosis con la tapa.


9.3.2 Llenado del Depósito con las Cápsulas Monodosis

- ▶ Coloque las Cápsulas Monodosis llenas en el depósito.



- ▶ Cierre el Depósito girando la tapa del mismo en sentido de las agujas del reloj.

9.3.3 Colocación de la Cápsula Monodosis en el Depósito

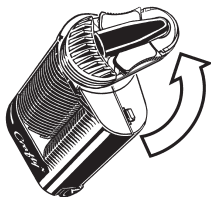

- ▶ Desenrosque la Unidad de Enfriamiento girando 90° en sentido contrario a las agujas del reloj del Vaporizador.

de

en


fr

es

it

nl

9 ACCESORIOS OPCIONALES

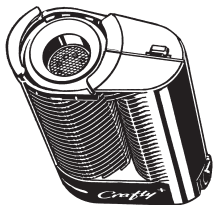

- ▶ Coloque la Cápsula Monodosis con la tapa hacia arriba en el Depósito del Vaporizador
- ▶ Coloque la Unidad de Enfriamiento girándola 90° en sentido horario sobre el Vaporizador. .

10.1 Posibles Fallos / Depuración

| Fallo | Posible Causa / Reparación |
|---|--|
| No es posible encender el Vaporizador. | Asegúrese de que la batería está cargada. |
| El indicador LED parpadea de forma alterna en rojo/azul. | La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja. Deje enfriar o calentar el Vaporizador. |
| El indicador LED parpadea en azul. | La batería está vacía. Conecte la Fuente de Alimentación o el Cargador para Coche. |
| El indicador LED parpadea de forma alterna en rojo/verde. | El Cable USB-C no es adecuado. Emplee el Cable USB-C suministrado. |
| El indicador LED parpadea de forma alterna en rojo/naranja. | El Vaporizador está defectuoso. |

10.2 En Caso de Problemas

- ▶ Desconecte inmediatamente el Vaporizador.
- ▶ Desconecte el Vaporizador del suministro eléctrico.
- ▶ Diríjase a nuestro Service Center.

10.3 Eliminación de Desechos

- ▶ Una vez transcurrido el plazo de garantía legal, si el Vaporizador no se puede reparar, deposítelo en el circuito de desechos o envíelo para que sea desechado a nuestro Service Center.

11 DATOS TÉCNICOS

Vaporizador CRAFTY⁺ :

Tensión de entrada: 5 V DC

La especificación de la tensión se encuentra en la placa de características del Vaporizador:

Potencia absorbida Vaporizador: 10 W max.

Temperatura de funcionamiento: 5°C - 35°C / 41°F - 95°F

Temperatura de Vaporización:

ajustable entre aprox. 40°C - 210°C / 104°F - 410°F

Medidas: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm (4,3 x 2,2 x 1,3 inch)

Peso: aprox. 135 g (0,3 lb)

Quedan reservadas las modificaciones técnicas.

Patentes y modelos estéticos registrados: www.storz-bickel.com/patents

12 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

Los dispositivos cumplen las siguientes directivas de la CE:

- IEC 60335
- EN 55011
- DN 61000-4-X



Fabricante:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Alemania

13.1 Garantía Legal

Los Productos S&B comprados directamente a través de storz-bickel.com o a un distribuidor autorizado cuentan con una garantía limitada de dos (2) años a partir de la fecha de compra del producto por parte del comprador original. Para los clientes residentes en California que compren en storz-bickel.com, la Garantía Limitada de S&B empieza a partir de la fecha de entrega del producto al comprador original.

Salvo en el caso de los vaporizadores MIGHTY, CRAFTY+ y PLENTY, si el cliente registra el Producto S&B comprado en www.storz-bickel.com/registration en el plazo de cuatro semanas a partir de la compra, S&B le concederá un año más de garantía.

S&B solo garantiza el MIGHTY+, CRAFTY+, VOLCANO HYBRID, VOLCANO CLASSIC, PLENTY, VENTY y MIGHTY ("Productos S&B") contra defectos en los materiales y de fabricación en condiciones de Uso normal (tal como se define más adelante) durante los 2 años siguientes a la fecha de compra minorista directamente a storz-bickel.com (o a partir de la fecha de entrega a clientes residentes en California), o de compra a un distribuidor autorizado (consulte nuestro sitio web).

Esta Garantía Limitada no cubre el uso comercial del producto, los daños ocasionados por un mal uso, un manteni-

miento o conservación inapropiados, los desgastes y los deterioros habituales, los productos reacondicionados o las reparaciones del producto no autorizadas.

Asimismo, la Garantía limitada no cubrirá ningún otro producto distinto de los Productos S&B ni los accesorios, complementos o componente, entre otros Baterías, Globos, Unidades de enfriamiento, Cables de cargador y Adaptadores, Depósito (VOLCANO), Tubos flexibles, Mallas, Cápsulas monodosis y accesorios incluidos con estos Productos S&B como.

Esta Garantía Limitada está sujeta a la legislación de la República Federal de Alemania, y no incluye la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG, por sus siglas en inglés).

Encontrará todas las condiciones de garantía aquí: www.storz-bickel.com/legal/warranty.

13.2 Responsabilidad

STORZ & BICKEL se responsabiliza de los daños causados por nuestro producto con relación al cliente de acuerdo a la normativa del derecho alemán de conformidad con nuestras condiciones generales de suministro (AGB). De acuerdo a ello solo existe una responsabilidad por daños causados por negligencia grave o intencionales, a no

ser que se trate de daños a la vida, físicos y a la salud o las lesiones afecten una obligatoriedad de contrato esencial. En este caso nos responsabilizamos ante el cliente aún por negligencia simple.

13.3 Derecho autorial

Este documento está protegido por la propiedad intelectual y no puede ser empleado ni en parte ni totalmente sin un consentimiento previo por escrito de STORZ & BICKEL en el sentido de los §§ 15 ff. UrhG (legislación de propiedad intelectual).

| | |
|--|---------------|
| Indice | pagina |
| 1 Descrizione del prodotto CRAFTY+ | 140 |
| 1.1 Contenuto della fornitura..... | 140 |
| 1.2 Elementi funzionali..... | 141 |
| 1.3 Assistenza | 142 |
| 2 Per la sicurezza dell'utilizzatore | 143 |
| 2.1 Simboli..... | 143 |
| 2.2 Legenda | 143 |
| 2.3 Regole fondamentali..... | 145 |
| 2.4 Indicazioni di sicurezza | 146 |
| 2.4.1 Pericolo di lesioni a causa di una scossa elettrica | 146 |
| 2.4.2 Pericolo di lesioni a causa dei vapori / pericolo di ustioni..... | 146 |
| 2.4.3 Pericolo di lesioni per diverse cause | 146 |
| 3 Uso previsto | 147 |
| 4 Lista piante aromatiche | 147 |
| 5 Fattori che influenzano la vaporizzazione | 148 |
| 6 Messa in funzione e funzionamento | 149 |
| 6.1 Disimballare | 148 |
| 6.2 Collegamento alla rete..... | 148 |
| 6.3 Caricamento della batteria | 148 |
| 6.4 Riempire il Contenitore | 149 |
| 6.5 Procedura di riscaldamento..... | 150 |
| 6.5.1 Impostazioni di fabbrica..... | 150 |
| 6.5.2 Temperatura di base..... | 150 |
| 6.5.3 Temperatura booster | 150 |
| 6.5.4 Temperatura superbooster..... | 151 |
| 6.6 Uso | 151 |
| 6.7 Fine dell'uso | 152 |
| 6.8 Disattivazione automatica..... | 152 |
| 6.9 Deposito..... | 152 |

de

en

fr

es

it

nl

| | |
|--|---------------|
| Indice | pagina |
| 7 Pulizia | 153 |
| 7.1 Unità di Raffreddamento..... | 153 |
| 7.1.1 Descrizione..... | 153 |
| 7.1.2 Smontaggio..... | 153 |
| 7.1.3 Pulizia..... | 155 |
| 7.1.4 Montaggio..... | 156 |
| 7.2 Filtri | 156 |
| 7.3 Pulizia del Contenitore..... | 156 |
| 7.3.1 Smontaggio del Filtro inferiore | 156 |
| 7.3.2 Pulizia..... | 156 |
| 7.3.3 Montaggio del Filtro inferiore | 156 |
| 7.4 Vaporizzatore e Cavo USB-C..... | 156 |
| 8 STORZ & BICKEL Web App | 157 |
| 8.1 Impostazioni di fabbrica | 157 |
| 8.2 Creazione del collegamento del Vaporizzatore con uno smartphone | 157 |
| 8.3 Voci di menu della STORZ & BICKEL Web App.... | 158 |
| 8.4 Regolazione della temperatura con la STORZ & BICKEL Web App | 158 |
| 8.5 Ripristino delle impostazioni di fabbrica..... | 159 |
| 9 Accessori opzionali | 163 |
| 9.1 Macinatoio per Erbe | 162 |
| 9.2 Ausilio di Riempimento..... | 162 |
| 9.2.1 Riempimento dell'Ausilio per Riempimento..... | 162 |
| 9.2.2 Riempimento del Contenitore con l'Ausilio per Riempimento..... | 162 |

| | |
|---|---------------|
| Indice | pagina |
| 9.3 Capsule dosatrici (monuso) e Caricatore | 164 |
| 9.3.1 Riempimento delle Capsule dosatric..... | 164 |
| 9.3.2 Riempimento del Caricatore di Capsule dosatrici..... | 164 |
| 9.3.3 Inserimento della Capsula dosatrice nel Contenitore | 165 |
| 10 Guasti | 166 |
| 10.1 Possibili guasti / Ricerca guasti | 166 |
| 10.2 Dopo guasti | 166 |
| 10.3 Smaltimento | 166 |
| 11 Dati tecnici | 167 |
| 12 Soddisfacimento dei requisiti legislativi e normativi | 167 |
| 13 Garanzia, Responsabilità | 168 |
| 13.1 Garanzia..... | 168 |
| 13.2 Responsabilità..... | 168 |
| 13.3 Disposizioni sul diritto d'autore | 169 |

de

en

fr


es

it

nl

1 DESCRIZIONE DEL CRAFTY+


1.1 Contenuto della fornitura

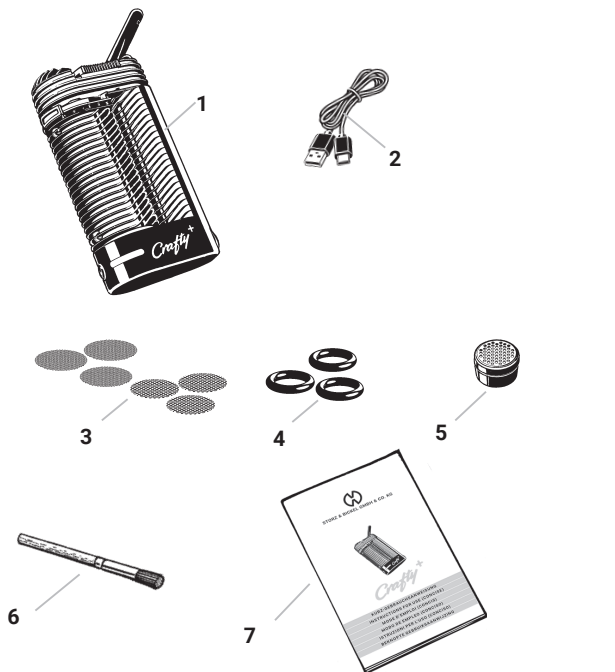

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | CRAFTY+ Vaporizzatore | 5 | 1 pz. Capsula dosatrice |
| 2 | 1 pz. Cavo USB-C | 6 | 1 pz. Pennello per la Pulizia |
| 3 | 3 pz. Filtro Standard, piccolo | 7 | 1 pz. Istruzioni per l'Uso (conciso) |
| 3 | 3 pz. Filtro a maglia grossa, piccolo | | |
| 4 | 3 pz. Anello di Tenuta piccolo del Fondo | | |

1 DESCRIZIONE DEL CRAFTY+

1.2 Elementi funzionali

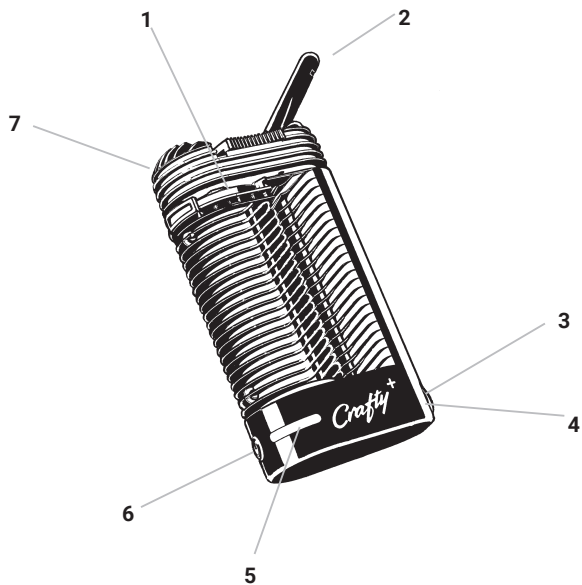

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| 1 | Contenitore | 6 | Interruttore Elettrico (ON/OFF) |
| 2 | Boccaglio | 7 | Unità di Raffreddamento |
| 3 | Utensile della Camera di Rifornimento | | |
| 4 | Presa di Carica USB-C (dietro l'Utensile del Contenitore) | | |
| 5 | Display a LED | | |

de

en

fr

es

it





nl

1.3 Assistenza

In caso di consegna incompleta, problemi tecnici, domande sull'apparecchio e sul suo smaltimento e per i casi di garanzia, contattare il nostro Centro di Assistenza: www.storz-bickel.com/contact

Per richieste di assistenza si prega di avviare una RMA (Return Merchandise Authorization) dall'apposita pagina web: www.storz-bickel.com/rma.

2.1 Legenda

| | |
|---|----------------------|
|  | Elenco puntato |
|  | Simbolo di pericolo |
|  | Istruzione operativa |
|  | Avviso |

2.2 Simboli



Rispettare le Istruzioni per l'Uso!



Simbolo del fabbricante – il nome e l'indirizzo del fabbricante sono riportati accanto al simbolo.



Il dispositivo non smaltire nei rifiuti generici. Il simbolo del cassetto barrato indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente. Il Vaporizzatore contiene una batteria agli ioni di litio incorporata in modo fisso, nel momento dello smaltimento questa deve essere scarica.



Marchio di conformità CE: con questo marchio il fabbricante attesta la conformità del prodotto alle direttive e alle norme vigenti dell'Unione Europea.

2 PER LA SICUREZZA DELL'UTILIZZATORE



Sicurezza verificata e fabbricazione controllata da TÜV SÜD a norma EN 60335-1, UL 499 e CAN/CSA 22.2 n° 64-M91.



Attenzione! Superficie calda!



Proteggere dall'irraggiamento solare.

Proteggere dal bagnato e dall'umidità.



Simbolo del número de serie



Simbolo per numero di riferimento/codice articolo/sku



Corrente continua



Apparecchio della classe di protezione II

2.3 Regole fondamentali

Salvare queste istruzioni.

- ▶ Queste Istruzioni per l'Uso costituiscono un componente fondamentale del Vaporizzatore e devono essere accessibili per l'utilizzatore.
- ▶ Scaricare la versione attuale e completa delle Istruzioni per l'Uso dalla pagina www.storz-bickel.com.
- ▶ Leggere interamente e attentamente queste indicazioni prima di mettere in funzione il Vaporizzatore e il Cavo USB-C.
- ▶ Durante l'uso del prodotto e la relativa manutenzione, seguire sempre le indicazioni contenute nelle presenti Istruzioni per l'Uso.
- ▶ Questo Vaporizzatore non è destinato all'uso da parte di persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsi esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso del Vaporizzatore da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono maneggiare il Vaporizzatore.
- ▶ Se l'utilizzatore soffre di malattie alle vie respiratorie o ai polmoni, l'apparecchio può essere utilizzato solo dopo aver consultato il medico curante e aver ottenuto la sua autorizzazione. I vapori, a seconda della densità, possono irritare le vie respiratorie e i polmoni, cioè può provocare la tosse.
- ▶ Non lasciare incustodito il Vaporizzatore mentre si trova in funzione.
- ▶ Conservare e utilizzare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C solo a una distanza sufficiente dalle fonti di calore (forni, fornelli, camini, ecc.) e in un luogo asciutto, nel quale la temperatura ambiente non possa scendere al di sotto di +5 °C (+41 °F).
- ▶ Non esporre il Vaporizzatore alle oscillazioni estreme della temperatura ambiente. La capacità di funzionamento potrebbe essere disturbata dall'umidità condensata.
- ▶ Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali STORZ & BICKEL.
- ▶ Non usare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C in modo inadeguato, errato o scriteriato, in quanto in questo caso il produttore non si assumerebbe nessuna responsabilità per gli eventuali danni.
- ▶ In caso di condizioni estreme, dalla batteria può fuoriuscire del liquido; evitare il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua. Se il liquido entra in contatto con gli occhi, consultare immediatamente un medico. Il liquido espulso dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.

de

en

fr

es

it

nl

2.4 Indicazioni di sicurezza

2.4.1 Pericolo di lesioni a causa di una scossa elettrica

- ▶ Spegnerne il Vaporizzatore e scollegare il Cavo USB-C dalla rete elettrica prima di qualsiasi lavoro di manutenzione e durante i temporali.
- ▶ Fare attenzione a non danneggiare il Cavo USB-C piegandolo, schiacciandolo o tirandolo.
- ▶ Non utilizzare prese multiple e/o cavi di prolunga.
- ▶ Non utilizzare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C se presentano danni. Le riparazioni devono essere eseguite solo dal nostro Centro di Assistenza. Il tentativo di riparare autonomamente un guasto comporta l'annullamento della garanzia. Il nostro Centro di Assistenza sostituisce il Cavo USB-C guasto.
- ▶ Il Vaporizzatore e il Cavo USB-C non devono venire a contatto con l'umidità e con i liquidi.
- ▶ Tenere il Vaporizzatore e il Cavo USB-C lontano dagli animali domestici (ad esempio i roditori) e dai parassiti.
- ▶ Non utilizzare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C nelle atmosfere potenzialmente esplosive o infiammabili.

2.4.2 Pericolo di lesioni a causa dei vapori / pericolo di ustioni

- ▶ Non toccare le superfici calde del Vaporizzatore (Contenitore e area attorno al Contenitore) durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.
- ▶ Posizionare il Vaporizzatore caldo solo su una superficie solida e resistente al calore e accertarsi che non sia coperto da nessun oggetto.
- ▶ Non usare il Vaporizzatore vicino a oggetti infiammabili quali, ad esempio, tende, tovaglie o carta.
- ▶ Non bloccare, coprire o chiudere le aperture del Vaporizzatore durante il funzionamento e la fase di raffreddamento.
- ▶ Prima dell'accensione del Vaporizzatore, accertare che tutti i vapori, ad esempio di detersivi e disinfettanti infiammabili, siano evaporati.

2.4.3 Pericolo di lesioni per diverse cause

- ▶ Le parti della confezione (sacchetti di plastica, parti di plastica espansa, cartoni ecc.) devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini, in quanto rappresentano un potenziale pericolo.
- ▶ Accertare che la minuteria del Vaporizzatore non venga ingoiata.
- ▶ Tenere conto del pericolo di strangolamento rappresentato dal Cavo USB-C.

2 PER LA SICUREZZA DELL'UTILIZZATORE

- ▶ Utilizzare il Vaporizzatore solo con le erbe e i componenti vegetali da vaporizzare raccomandati.
- ▶ Prestare attenzione ai sintomi (ad esempio tosse, fiato corto, dolori alla gabbia toracica) durante o

dopo l'uso e rivolgersi immediatamente a un medico se si hanno dubbi in merito alla salute.

3 USO PREVISTO

Il Vaporizzatore serve per la produzione di fragranze e/o aromi con le erbe e i componenti vegetali indicati al capitolo 4, pagina 147. Per effetto della vaporizzazione ottenuta tramite aria cal-

da, le fragranze e gli aromi si sciolgono e possono essere inalati direttamente.

Il Vaporizzatore non è un prodotto medicale.

4 LISTA PIANTE AROMATICHE

- ▶ Vaporizzare solo fragranze e aromi dei materiali vegetali qui indicati e testati in base alle direttive della Farmacopea Europea (o simile) per quanto concerne la genuinità, purezza ed eventuale presenza di agenti patogeni.

- ▶ Acquistare le piante e/o i componenti da vaporizzare in farmacia.

i Ogni altro tipo di uso non è idoneo ed è potenzialmente pericoloso.

i Il Vaporizzatore non è destinato all'uso con preparati a base di tabacco o nicotina.

| Nome della pianta | Nome botanico | Parte della pianta utilizzata | Temperatura |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Eucalipto | <i>Eucalyptus globulus</i> | foglie | 130°C |
| Luppolo | <i>Humulus lupulus</i> | pigne | 154°C |
| Camomilla | <i>Matriarca chamomilla</i> | fiori | 190°C |
| Lavanda | <i>Lavandula angustifolia</i> | fiori | 130°C |
| Melissa citronella | <i>Melissa officinalis</i> | foglie | 142°C |
| Salvia | <i>Salvia officinalis</i> | foglie | 190°C |
| Timo | <i>Thymus vulgaris</i> | erba | 190°C |

5 FATTORI CHE INFLUENZANO LA VAPORIZZAZIONE

Osservare le seguenti indicazioni per poter regolare il Vaporizzatore con il materiale vegetale di propria scelta in modo ottimale per le proprie esigenze personali.

La quantità degli aromi e delle fragranze liberati viene influenzata dai seguenti fattori:

1. **Qualità:** la concentrazione di aromi e fragranze contenuti nel materiale vegetale utilizzato.
2. **Quantità:** la quantità di materiale vegetale per vaporizzare nel Contenitore.
3. **Superficie:** più le piante sono sminuzzate finemente, più ampia è la superficie dalla quale si possono liberare gli aromi e le fragranze durante il processo di vaporizzazione.

4. **Temperatura:** quanto più alta è la temperatura, tanto maggiore sarà la quantità di aromi e fragranze sciolte allo stesso tempo. L'aumento della temperatura dovrebbe essere sempre l'ultima soluzione, poiché il materiale vegetale ha un sapore meno gradevole a temperature più elevate.

Il processo di vaporizzazione può essere ripetuto con lo stesso contenuto del Contenitore per più volte fino a quando, alla temperatura massima, non si sviluppano più vapori.

6 MESSA IN FUNZIONE E FUNZIONAMENTO

6.1 Disimballare

- ▶ Controllare che il Vaporizzatore sia completo in base a quanto riportato al capitolo 1.1 "Contenuto della fornitura", pagina 140

6.2 Collegamento alla rete

- ▶ Controllare che il Vaporizzatore e il Cavo USB-C non presentino danni visibili esteriormente.

6.3 Caricamento della batteria

- ▶ Prima di utilizzare il Vaporizzatore per la prima volta, caricare completamente la batteria.
- ▶ Collegare il Vaporizzatore a un Caricabatterie USB tramite il Cavo USB-C in dotazione.

i Il procedimento di ricarica verrà confermato con una breve accensione del display a LED (verde/rosso/blu) e dalla vibrazione.

i Lo stato di carica della batteria viene segnalato dall'illuminazione blu del display a LED. Legenda dell'indicatore di batteria durante il processo di ricarica:

- ▶ Luce blu fissa: batteria completamente carica.
- ▶ Lampeggio blu lento: batteria carica fino a circa il 61 - 96%.
- ▶ Lampeggio blu rapido: batteria carica fino a circa il 31 - 60%.
- ▶ Lampeggio blu flash: batteria carica fino a circa il 30%.

Legenda dell'indicatore di batteria dopo lo spegnimento:

- ▶ Luce blu fissa: batteria carica fino a circa il 64 - 100%.
- ▶ Lampeggio blu lento: batteria carica fino a circa il 32 - 63%.
- ▶ Lampeggio blu rapido: batteria carica fino a circa l'1 - 31%.
- ▶ Lampeggio blu flash: batteria scarica.
- ▶ Al termine dell'operazione di carica, scollegare il Cavo USB-C prima dalla fonte energetica, poi dal Vaporizzatore.

i Il Vaporizzatore non può essere messo in funzione mentre è collegato tramite il Cavo USB-C ad una fonte energetica. Solo una volta parzialmente caricato, questo potrà essere riacceso di nuovo.


AVVISO

Invaldazione della garanzia/ danni materiali in caso di sostituzione autonoma della batteria

In caso di apertura scorretta del Vaporizzatore questo si danneggia.

- **La Batteria può essere sostituita solo presso il nostro Centro di Assistenza.**

6.4 Riempire il Contenitore

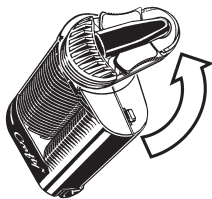

- ▶ Svitare l'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso antiorario.

de


en

fr

es

it

nl

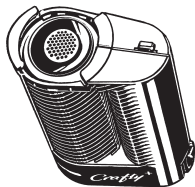

- ▶ Riempire completamente il Contenitore di materiale vegetale macinato fino al bordo di plastica.

i Un'eccessiva compressione del materiale vegetale o un eccessivo riempimento del Contenitore rende difficoltosa l'inalazione.

- ▶ Rimuovere il materiale vegetale in eccesso intorno al bocchettone di riempimento.
- ▶ Porre l'Unità di Raffreddamento, compiendo una rotazione di 90° in senso orario, sul Vaporizzatore.

6.5 Procedura di riscaldamento

6.5.1 Impostazioni di fabbrica

Il Vaporizzatore offre tre livelli di temperatura preimpostati dalla fabbrica:

- Temperatura di base: 180 °C (356 °F)
- Temperatura booster: +15 °C (27 °F) (rispetto alla temperatura di base) corrisponde 195 °C (383 °F)
- Temperatura superbooster: +30 °C (54 °F) (rispetto alla temperatura di base) corrisponde a 210 °C (410 °F)

i La temperatura di base e la temperatura booster, così come la temperatura superbooster, possono essere cambiate attraverso modificate tramite l'app web. Si veda al riguardo il capitolo 8. "Storz & Bickel Web App", pagina 157.

i Se un livello di temperatura non è più sufficiente, passare al livello successivo nel modo di seguito descritto.

6.5.2 Temperatura di base

- ▶ Premere per almeno mezzo secondo l'Interruttore Elettrico (ON/OFF) arancio.

i Una vibrazione conferma l'accensione e la luce fissa rossa del display a LED segnala il riscaldamento. Con la batteria completamente carica, il riscaldamento dura circa 60-80 secondi. Una doppia vibrazione ed una luce fissa di colore verde segnalano il raggiungimento della temperatura di base.

6.5.3 Temperatura booster

- ▶ Doppio clic sull'Interruttore Elettrico (ON/OFF) arancio.


i Il display a LED segnala il riscaldamento mediante una luce lampeggiante rossa. Una doppia vibrazione ed una luce lampeggiante di colore verde segnalano il raggiungimento della temperatura booster.

- i** La modalità booster termina automaticamente 90 secondi dopo il raggiungimento della temperatura booster; successivamente, la temperatura nominale sarà nuovamente la temperatura di base.

6.5.4 Temperatura superbooster

- ▶ Triplo clic sull'Interruttore Elettrico (ON/OFF) arancio.
- i** Il display a LED segnala il riscaldamento mediante una luce rossa lampeggiante velocemente. Una vibrazione doppia ed una luce di colore verde lampeggiante velocemente segnalano il raggiungimento della temperatura super-booster.
- i** La modalità super-booster termina automaticamente 90 secondi dopo il raggiungimento della temperatura super-booster; successivamente, la temperatura nominale sarà nuovamente la temperatura di base.

6.6 Uso

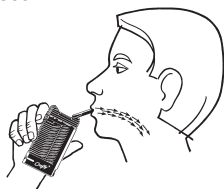

- i** Iniziare la vaporizzazione dopo la conclusione del riscaldamento.
- ▶ Aprire il Boccaglio dell'Unità di Raffreddamento.
- ▶ Prendere il Boccaglio fra le labbra.
- ▶ Inalare per alcuni secondi uniformemente solo a metà delle proprie capacità.
- ▶ Trattenere l'aria per alcuni secondi, quindi espirare lentamente.
- ▶ Concentrarsi intensamente sul processo respiratorio.
- i** Più intenso è il vapore, più il gusto viene compromesso.



ATTENZIONE

Problemi di salute causati dall'inalazione dei vapori

Tosse

- Evitare l'uso in presenza di patologie a carico delle vie respiratorie/dei polmoni

de

en

fr

es

it

nl

6.7 Fine dell'uso

**ATTENZIONE****Superficie del Contenitore molto calda**

Pericolo di ustioni

- **Non toccare il Contenitore fintanto che il Vaporizzatore non si è raffreddato.**

- ▶ Premere per almeno mezzo secondo l'Interruttore Elettrico (ON/OFF) arancione.

i Il Vaporizzatore conferma lo stato di spegnimento con una vibrazione.

- ▶ Premere per almeno mezzo secondo l'interruttore arancione di accensione/spegnimento (ON/OFF) arancione.

i Il Vaporizzatore conferma lo stato di spegnimento con una vibrazione.

- ▶ Far raffreddare completamente il Vaporizzatore.
- ▶ Se necessario, effettuare la pulizia del Vaporizzatore come descritto nel capitolo 7 "Pulizia" da pagina 152.

6.8 Disattivazione automatica

i Due minuti dopo l'ultima pressione di un tasto o dopo l'ultimo uso, il Vaporizzatore si spegnerà automaticamente per preservare lo stato di carica della batteria. Lo spegnimento viene confermato da una vibrazione e dall'indicatore dello stato di carica.

i Premendo brevemente l'Interruttore Elettrico (ON/OFF) durante il funzionamento, è possibile resettare di nuovo a due minuti la disattivazione automatica.

6.9 Deposito


- ▶ Conservare il Vaporizzatore e il Cavo USB-C in un luogo asciutto e al riparo dagli agenti atmosferici e lontano dalla portata dei bambini o di persone incapaci.

7.1 Unità di Raffreddamento

i Unità di Raffreddamento e Boccaglio devono essere privi di incrostazioni. Queste sono prodotte dalla condensazione del vapore all'interno dell'Unità di Raffreddamento. Controllare pertanto l'Unità di Raffreddamento e il Boccaglio prima di ogni utilizzo.

i Pulire l'Unità di Raffreddamento, compreso il Boccaglio, a intervalli regolari e in caso di uso da parte di più persone. La pulizia è una condizione indispensabile per un perfetto funzionamento.


7.1.1 Descrizione

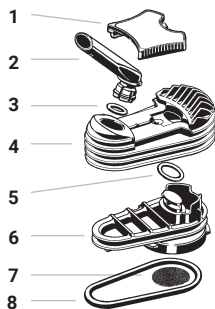

- 1 Chiavistello del Coperchio
- 2 Boccaglio
- 3 Anello di Tenuta del Boccaglio
- 4 Coperchio dell'Unità di Raffreddamento
- 5 Anello di Tenuta piccolo del Fondo
- 6 Fondo dell'Unità di Raffreddamento
- 7 Filtro superiore (maglia grosso)
- 8 Anello di Tenuta grande del Fondo

7.1.2 Smontaggio


i Assicurarsi che il Vaporizzatore sia completamente raffreddato.

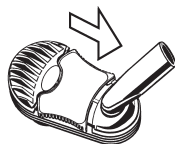

- ▶ Tirare il chiavistello del coperchio in direzione del Boccaglio.



- ▶ Estrarre il coperchio dell'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore.

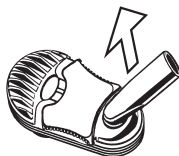

- ▶ Estrarre il Boccaglio, muovendolo leggermente avanti e indietro, dal coperchio dell'Unità di Raffreddamento.
- ▶ Togliere l'Anello di Tenuta del Boccaglio.

7 PULIZIA




- ▶ In caso di pulizia del coperchio dell'Unità di Raffreddamento nell'alcool isopropilico, smontare il chiavistello del coperchio sollevandolo da un lato.
- ▶ Spingere prima il Chiavistello del Coperchio su un lato e sollevarlo dalla parte opposta.




- ▶ Quindi, spingere il Chiavistello del Coperchio dalla parte sollevata in direzione della parte opposta.
- i** Lologramma con la sigla sul chiavistello del coperchio è costituito da un adesivo.



- ▶ Svitare il fondo dell'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso antiorario.

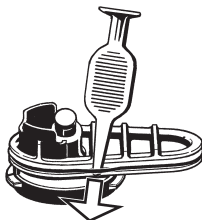

- ▶ Rimuovere l'Anello di Tenuta grande del Fondo con l'Utensile del Contenitore dall'incavo della scanalatura.
- ▶ Smontare il piccolo Anello di Tenuta del Fondo.

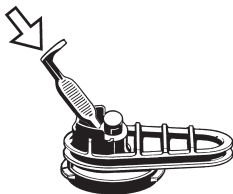

- ▶ Estrarre il Filtro dalla Base dell'Unità di Raffreddamento con l'aiuto dell'utensile del Contenitore.

7.1.3 Pulizia


**ATTENZIONE**

L'alcol isopropilico è combustibile e facilmente infiammabile.

Pericolo di ustioni

- **Rispettare le avvertenze di sicurezza del produttore dell'alcool isopropilico!**

- i** Per la pulizia manuale si possono utilizzare un Pennello per la Pulizia oppure dei bastoncini cotonati e delle salviette di carta o dei panni di cotone. Quale solvente raccomandiamo l'acqua di lavaggio calda o l'alcool isopropilico.

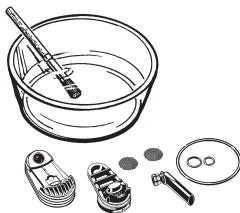

- ▶ Immergere tutti i componenti di plastica dell'Unità di Raffreddamento (eccetto il Chiavistello del Coperchio) e il Filtro del Contenitore nell'alcool isopropilico per 1/2 ora al massimo.

- i** Una durata maggiore a contatto con l'alcool isopropilico può provocare un cambiamento di colore o infragilimento delle parti di plastica.

- ▶ Fare asciugare bene tutti i componenti.
- ▶ Controllare i singoli pezzi per escludere la presenza di superfici danneggiate, fessurazioni, rammolimenti, indurimenti, contaminazioni o scolorimenti.
- ▶ Sostituire i pezzi danneggiati.
- ▶ Se necessario, pulire il chiavistello del coperchio con acqua di lavaggio calda o tergerlo con alcool isopropilico.

- i** Gli accessori opzionali Macinatoio

AVVISO**Danni materiali in caso di lavaggio scorretto!**

L'adesivo con l'ologramma della sigla può sbiadirsi e la sua colla può allentarsi

- **Evitare il contatto prolungato con l'alcool isopropilico**

per Erbe, Ausilio per Riempimento e Caricatore non si possono immergere in alcool isopropilico. Lavare questi componenti in lavastoviglie o con acqua saponata tiepida.

de

en

fr

es

it

nl

7.1.4 Montaggio

- ▶ Riassemblare i componenti nell'ordine inverso.

i Durante il montaggio verificare il corretto posizionamento degli Anelli di Tenuta. L'Anello di Tenuta piccolo del Fondo, in particolare, deve essere completamente situato a scomparsa nel coperchio dell'Unità di Raffreddamento.

- ▶ Inserire il Filtro superiore con cautela nell'apposita scanalatura.

i La mancata osservanza di questa indicazione può causare l'infiltrazione di particelle vegetali nell'Unità di Raffreddamento, l'intasamento di quest'ultima o la conseguente inalazione.

7.2 Filtri

- ▶ Pulire il Filtro del Contenitore e il Filtro dell'Unità di Raffreddamento dopo ogni utilizzo con il Pennello per la Pulizia.

7.3 Pulizia del Contenitore

i Il lavaggio del Contenitore è necessario nel momento in cui il Filtro inferiore è intasato.

7.3.1 Smontaggio del Filtro inferiore

- ▶ Rimuovere il Filtro inferiore premendolo con l'ausilio dell'Utensile del Contenitore lungo la rientranza di quest'ultima. Così facendo il Filtro inferiore si incurva staccandosi dall'incavatura.

7.3.2 Pulizia

- ▶ Pulire il Contenitore con un bastoncino cotonato imbevuto di alcool isopropilico.

i Prestare attenzione affinché l'alcool isopropilico non goccioli all'interno dell'apparecchio.

7.3.3 Montaggio del Filtro inferiore

- ▶ Curvare a volta il Filtro inferiore.
- ▶ Collocare il Filtro inferiore con la parte a volta in alto nel Contenitore.
- ▶ Spingere il Filtro appiattito nell'apposita scanalatura con l'aiuto dell'Utensile per il Contenitore.

7.4 Vaporizzatore e Cavo USB-C

AVVISO

Danni materiali in caso di lavaggio scorretto

L'acqua può penetrare all'interno e danneggiare il Vaporizzatore o il Cavo USB-C

- **Non immergere in acqua o altri liquidi**
- **Non pulire con un getto diretto di acqua, vapore o aria compressa.**

7 PULIZIA

- ▶ Scollegare il Cavo USB-C dalla fonte energetica.
- ▶ Spegnerne il Vaporizzatore.
- ▶ Pulire il alloggiamento del Vaporizzatore ed il Cavo USB-C solo a secco o eventualmente con un panno umido.

8 STORZ & BICKEL WEB APP

La Web App di Storz & Bickel non è necessaria per il funzionamento del Vaporizzatore, permette tuttavia delle impostazioni personalizzate e la visualizzazione di informazioni addizionali durante l'uso del Vaporizzatore. Il Vaporizzatore per tale scopo viene collegato via Bluetooth® con un Smartphone.

8.1 Impostazioni di fabbrica

- Temperatura di base: 180°C
 - Temperatura booster: +15°C (rispetto alla temperatura di base) corrisponde 195°C
 - Temperatura superbooster: +30°C (rispetto alla temperatura di base) corrisponde a 210°C
- Luminosità display a LED CRAFTY+: 100%
- Indicatore di carica CRAFTY+: ON
- Vibrazione CRAFTY+: ON
- Vibrazione smartphone: OFF
- Tono di allarme smartphone: OFF

8.2 Creazione del collegamento del Vaporizzatore con uno smartphone

- ▶ Accendere lo smartphone e assicurare che la funzione Bluetooth® sia accesa e che non sia bloccata da un altro dispositivo Bluetooth®. Accendere quindi il Vaporizzatore e aprire un browser che supporti la connettività Bluetooth® (maggiori informazioni su www.storz-bickel.com/app/web).
- ▶ Andare su app.storz-bickel.com
- ▶ Cliccare su "Connetti" e scegliere il proprio Vaporizzatore.
- ▶ Andare su app.storz-bickel.com
- ▶ Cliccare su "Connetti" e scegliere il proprio Vaporizzatore.

8.3 Voci di menu della STORZ & BICKEL Web App

Temperatura

Qui si possono acquisire le temperature impostate ed effettive ed eseguire la regolazione della temperatura. Qui si trova inoltre l'indicatore di carica del Vaporizzatore.

Apparecchio

Le informazioni relative al dispositivo, come ore di funzionamento, versioni del software, ecc. possono essere trovate in questa sezione.

Per scoprire quali caratteristiche specifiche aggiuntive del dispositivo possono essere regolate attraverso l'app web STORZ & BICKEL, visitare: <https://www.storz-bickel.com/app/web>

Informazioni

Qui sono riportate ulteriori informazioni – come ad esempio gli elenchi delle piante, il Quick Start Manual, le Istruzioni per l'Uso, le condizioni generali di contratto, l'informativa sulla protezione dei dati – ma anche link diretti alla Homepage STORZ & BICKEL e al negozio online.

8.4 Regolazione della temperatura con la STORZ & BICKEL Web App

i Oltre ai tre livelli di temperatura preimpostati in fabbrica, è possibile anche regolare delle temperature individuali tra 40 °C e 210 °C

(vedere il capitolo 4, "Panoramica delle piante", pagina 147).

- ▶ Premere il tasto più superiore per qualche istante per aumentare il valore nominale con incrementi di 1 grado.
- ▶ Premere il tasto meno superiore per qualche istante per diminuire il valore nominale con decrementi di 1 grado.
- ▶ Premere in modo continuo questi tasti più o meno per far scorrere i valori nominali in modo continuo nella rispettiva direzione.

i La temperatura attuale (temperatura effettiva) può essere letta sul display nella riga superiore.

i La temperatura booster o quella superbooster è sempre aggiunta alla temperatura base o a quella booster. La differenza di gradi tra la temperatura di base e la temperatura booster, inoltre, può essere regolata e adattata con precisione tramite i tasti più e meno inferiori. La differenza di gradi tra la temperatura booster e quella superbooster è fissata ed è sempre di +15°C. In tal caso, non si possono superare complessivamente i 210 °C.

Fahrenheit/Celsius

- ▶ Toccare leggermente i tasti più e meno contemporaneamente per commutare la visualizzazione da gradi Celsius a gradi Fahrenheit.

Indicatore di carica

- i** L'indicatore di carica mostra un simbolo della batteria con sei campi dello stato di carica. A seconda dello stato di carica si vedono più o meno campi dello stato di carica.



- batteria carica: visualizzazione di tutti e sei i campi dello stato di carica
- batteria quasi scarica: telaio della batteria
- Carica: indicatore di carica lampeggiante e indicatore dello stato di carica attuale.

8.5 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Le impostazioni modificate tramite la STORZ & BICKEL Web App si possono resettare nel seguente modo:

- ▶ Accendere il Vaporizzatore.
- ▶ Premere per 10 secondi l'Interruttore Elettrico (ON/OFF) arancio. Il reset viene confermato da una luce a scorrimento: rosso/verde/blu/rosso/verde/blu/rosso/verde/blu e dalla contemporanea vibrazione.

Set Parti di Consumo - SKU 06 02 CY

Il Set Parti di Consumo contiene tutti i ricambi necessari per rinnovare l'Unità di Raffreddamento.

Unità di Raffreddamento, 3 pezzi - SKU 03 05 CY /

Unità di Raffreddamento- SKU 03 04 CY

L'Unità di Raffreddamento raffredda il vapore e offre così una temperatura gradevole e un aroma ottimale. Per garantire la pulizia dell'Unità di Raffreddamento, questa deve essere sostituita regolarmente. Il Boccaglio è contenuto nell'Unità di Raffreddamento.

Boccagli, 4 pezzi - SKU 11 72

Il Boccaglio va applicato all'Unità di Raffreddamento. Il Set contiene quattro Boccagli per l'Unità di Raffreddamento.

Chiavistelli del Coperchio, 3 pezzi - SKU 11 53

Il Chiavistello del Coperchio fissa il coperchio alla base dell'Unità di Raffreddamento.

Set di Filtri, piccolo - SKU 11 12

Il Set contiene quattro Filtri con maglia larga per l'Unità di Raffreddamento e due Filtri con maglia normale per il Contenitore.

Filtri a Maglia Grossa, piccolo, 6 pezzi - SKU 11 40

Il Filtro piccolo con la maglia larga viene inserito nel fondo dell'Unità di Raffreddamento.

Filtri Standard, piccolo, 6 pezzi - SKU 11 03

Il Filtro piccolo con maglia normale viene inserito nel Coperchio dell'Unità di Raffreddamento.

Set di Anello di Tenuta - SKU 06 01 CY

Il Set contiene tutti gli anelli di tenuta necessari per l'Unità di Raffreddamento e il Contenitore.

Macinatoio per Erbe - SKU 11 84 / Macinatoio per Erbe XL - SKU 11 85

Il Macinatoio per Erbe dispone di denti taglienti molto affilati per ottenere delle erbe macinate finemente.

Ausilio per Riempimento - SKU 11 95

L'Ausilio per Riempimento consente un riempimento pulito del Contenitore con il materiale vegetale sminuzzato.

Utensili del Contenitore, 6 pezzi - SKU 11 59

Le numerose possibilità d'impiego dell'Utensile per il Contenitore sono descritte nelle presenti Istruzioni per l'Uso.

Capsule dosatrici, 40 pezzi - SKU 09 33

La Capsula dosatrice può essere riempita con il materiale vegetale sminuzzato. Smettere la Capsula dosatrice con i rifiuti domestici dopo l'uso.

Caricatore della Capsula dosatrice - SKU 09 32

Conservare la Capsula dosatrice piena nel Caricatore. Il coperchio del Caricatore funge da aiuto per il riempimento della Capsula dosatrice.

Set di Riempimento della Capsula dosatrice - SKU 09 45

Con il Set di Riempimento si possono riempire contemporaneamente 40 Capsule dosatrici di materiale vegetale.

Pennelli per la Pulizia, 3 pezzi - SKU 11 24

Il Pennello per la Pulizia serve tra le altre cose per la pulizia del Contenitore.

Cavo di Carica 12 Volt - SKU 01 09 CY

Cavo di Carica per la carica delle batterie.

Questo e altri accessori e le informazioni dettagliate in merito sono disponibili alla pagina <https://www.storz-bickel.com>



de

en

fr

es

it

nl


9 ACCESSORI OPZIONALI

9.1 Macinatoio per Erbe



- ▶ Appoggiare il materiale vegetale tra le due coppe del Macinatoio per Erbe.
- ▶ Chiudere il Macinatoio per Erbe.
- ▶ Ruotare il Macinatoio per Erbe più volte in avanti e indietro.

9.2 Ausilio di Riempimento

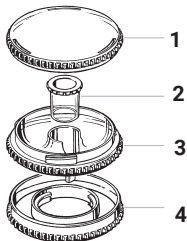

- 1 Coperchio superiore
- 2 Tappo
- 3 Coppa
- 4 Coperchio inferiore

i L'Ausilio per Riempimento serve per un riempimento semplice e pulito del Contenitore. Nella coppa dell'Ausilio per Riempimento è possibile conservare il materiale vegetale sminuzzato.

9.2.1 Riempire la Ausilio di Riempimento



- ▶ Svitare il coperchio superiore in senso antiorario.
- ▶ Riempire la coppa, compreso il tappo, di materiale vegetale macinato.
- ▶ Posizionare il coperchio superiore compiendo una rotazione in senso orario.

9.2.2 Riempimento del Contenitore con l'Ausilio per Riempimento

- ▶ Svitare l'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso antiorario.
- ▶ Con l'Ausilio dell'Utensile del Contenitore rimuovere eventuali residui dal Contenitore stessa.
- ▶ Svitare il coperchio inferiore dell'Ausilio per Riempimento in senso orario.

9 ACCESSORI OPZIONALI

- ▶ Porre l'Ausilio per Riempimento, compiendo una rotazione di 90° in senso orario, sul Vaporizzatore.
- ▶ Svitare il coperchio superiore dell'Ausilio per Riempimento in senso antiorario.
- ▶ Estrarre il Tappo dall'Ausilio per Riempimento.



- ▶ Far passare una piccola porzione di materiale vegetale attraverso l'apertura centrale verso l'interno del Contenitore.

i Fare attenzione a non riempire eccessivamente il Contenitore (vedi capitolo 6.4. "Riempimento del Contenitore", pagina 149).



- i** Riempire il Contenitore solo fino al bordo inferiore dell'Ausilio per Riempimento.
- ▶ Inserire il tappo nell'apertura centrale.
- ▶ Mettere il coperchio superiore compiendo una rotazione in senso orario.
- ▶ Svitare l'Ausilio per il Riempimento dal Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso antiorario.
- ▶ Porre il coperchio inferiore, compiendo una rotazione in senso antiorario, sull'Ausilio per Riempimento.
- ▶ Porre l'Unità di Raffreddamento, compiendo una rotazione di 90° in senso orario, sul Vaporizzatore.

de

en

fr

es

it

nl

9.3 Capsule dosatrici (monouso) e Caricatore



i Con le Capsule dosatrici, disponibili come accessori, è possibile conservare il materiale vegetale macinato rimastato immettere gli oli aromatici e conservarli nel Caricatore fino al rispettivo utilizzo.

i Le Capsule dosatrici sono un prodotto monouso. Smaltirle, una volta utilizzate, nei rifiuti residui.

9.3.1 Riempimento delle Capsule dosatrici



- ▶ Svitare il coperchio del Caricatore in senso antiorario.
- ▶ Porre il coperchio del Caricatore sulla Capsula dosatrice aperta.




- ▶ Far passare una piccola porzione di materiale vegetale attraverso l'apertura centrale verso l'interno del Capsule dosatrici.
- ▶ Chiudere la Capsula dosatrice con il relativo coperchio.




9.3.2 Riempimento del Caricatore di Capsule dosatrici

- ▶ Introdurre le Capsule dosatrici riempite nel Caricatore.
- ▶ Chiudere il Caricatore con una rotazione in senso orario del coperchio.

9.3.3 Inserimento della Capsula dosatrice nel Contenitore

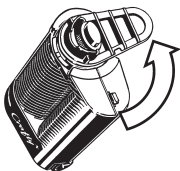

- ▶ Svitare l'Unità di Raffreddamento dal Vaporizzatore compiendo una rotazione di 90° in senso antiorario.

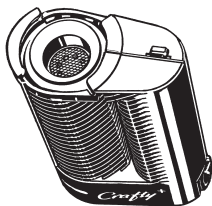

- ▶ Introdurre la Capsula dosatrice, con il coperchio rivolto verso l'alto, nel Contenitore del Vaporizzatore.
- ▶ Porre l'Unità di Raffreddamento, compiendo una rotazione di 90° in senso orario, sul Vaporizzatore.

de

en

fr

es

it

nl

10.1 Possibili guasti / Ricerca guasti

| Guasto | Possibile causa / Rimedio |
|---|--|
| Non si riesce ad accendere il Vaporizzatore. | Accertarsi che la batteria sia carica. |
| Il display a LED lampeggia in modo alternato di colore rosso e blu. | La temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa. Far raffreddare o riscaldare il Vaporizzatore. |
| Il display a LED lampeggia di colore blu. | La batteria è scarica. Collegare l'Alimentatore o il Cavo di Carica. |
| Il display a LED lampeggia in modo alternato di colore rosso e verde. | Il Cavo USB-C non è adatto. Utilizzare il Cavo USB-C fornito in dotazione. |
| Il display a LED lampeggia in modo alternato di colore rosso e arancione. | Il Vaporizzatore è difettoso. |

10.2 Dopo guasti

- ▶ Spegnere subito il Vaporizzatore.
- ▶ Scollegare il Vaporizzatore dalla fonte energetica.
- ▶ Rivolgersi direttamente al nostro Centro di Assistenza.

10.3 Smaltimento

- ▶ Una volta scaduta la copertura di garanzia, smaltire il Vaporizzatore non più riparabile tramite il circuito di riciclaggio dei materiali, oppure spedire l'apparecchio al nostro Centro di Assistenza per il regolare smaltimento.

11 DATI TECNICI

Vaporizzatore CRAFTY⁺ :

Tensione di ingresso: 5 V DC

L'indicazione della tensione è riportata sulla targhetta del Vaporizzatore:

Potenza assorbita Vaporizzatore: 10 W max.

Temperatura di funzionamento: 5°C a 35°C

Temperatura di vaporizzazione: Regolazione da circa 40°C a 210°C

Misure: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm

Peso: ca. 135 g

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Brevetti e disegni: www.storz-bickel.com/patents

de

en

fr

es

it

nl

12 SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Gli apparecchi sono conformi ai requisiti delle seguenti direttive CE:

- IEC 60335
- EN 55011
- EN 61000-4-X



Fabbricante:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Germania

13.1 Garanzia

I prodotti S&B acquistati tramite il sito storz-bickel.com o un rivenditore autorizzato sono coperti da una garanzia limitata di due (2) anni dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale. Per i clienti residenti in California che acquistano su storz-bickel.com, la Garanzia limitata S&B decorre dalla data di consegna all'acquirente originale.

Ad eccezione del MIGHTY, CRAFTY+ e PLENTY, se il cliente registra il Prodotto S&B acquistato all'indirizzo www.storz-bickel.com/registration entro quattro settimane dall'acquisto, S&B concederà un ulteriore anno di garanzia.

S&B garantisce i prodotti MIGHTY+, CRAFTY+, VOLCANO HYBRID, VOLCANO CLASSIC, PLENTY, VENTY e MIGHTY ("Prodotti S&B") solo contro i difetti di materiali e di lavorazione in condizioni di Uso normale (come definito di seguito) per 2 anni dalla data di acquisto al dettaglio direttamente da storz-bickel.com (o dalla data di consegna per i clienti situati in California) o dall'acquisto presso un rivenditore autorizzato (consultare il nostro sito web).

La presente Garanzia limitata non copre l'uso commerciale del prodotto, i danni dovuti a uso improprio, manutenzione o conservazione non corretta, normale usura, prodotti ricondizio-

nati o riparazioni non autorizzate del prodotto.

Inoltre, la Garanzia limitata non coprirà altri prodotti diversi dai Prodotti S&B e non coprirà alcun accessorio o complemento o componente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Batterie, Palloni, Unità di Raffreddamento, Cavi di carica e Adattatori, Contenitori (VOLCANO), Tubi, Filtri, Capsule dosatrici e accessori inclusi con tali Prodotti S&B.

La presente Garanzia limitata è soggetta alle leggi della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).

Tutte le condizioni di garanzia sono riportate qui: www.storz-bickel.com/legal/warranty.

13.2 Responsabilità

STORZ & BICKEL risponde dei danni causati dai propri prodotti nei confronti dei clienti ai sensi delle norme del diritto tedesco nella misura prevista dalle proprie CGC. Una responsabilità esiste solo per i danni causati in modo gravemente negligente o doloso, a meno che non si tratti di lesioni della vita, del corpo o della salute o a meno che la violazione non riguardi un importante obbligo contrattuale. In questi casi rispondiamo nei confronti dei clienti anche per la negligenza semplice.

13.3 Disposizioni sul diritto d'autore

Questo documento è protetto dal diritto d'autore e non può essere utilizzato in tutto o in parte senza il previo assenso scritto di STORZ & BICKEL ai sensi dei §§ 15 e seguenti della legge tedesca sul diritto d'autore.

de

en

fr

es

it

nl

| | |
|--|---------------|
| Inhoudsopgave | pagina |
| 1 Productoverzicht CRAFTY+ | 174 |
| 1.1 Inhoud | 174 |
| 1.2 Functionele onderdelen..... | 175 |
| 1.3 Service..... | 176 |
| 2 Voor uw veiligheid | 177 |
| 2.1 Symbolen..... | 177 |
| 2.2 Verklaring van de tekens | 177 |
| 2.3 Basisregels..... | 178 |
| 2.4 Veiligheidsinstructies..... | 179 |
| 2.4.1 Gevaar voor letsel door elektrische schokken..... | 179 |
| 2.4.2 Gevaar voor letsel door verbranding / dampen..... | 180 |
| 2.4.3 Gevaar voor letsel door verschillende oorzaken..... | 180 |
| 3 Doel | 181 |
| 4 Plantenoverzicht | 181 |
| 5 Invloedsfactoren bij het verdampen | 182 |
| 6 Ingebruikname en bediening | 183 |
| 6.1 Uitpakken..... | 183 |
| 6.2 Aansluiting stroomnet..... | 183 |
| 6.3 Opladen van de batterij..... | 183 |
| 6.4 Vullen van de vulkamer..... | 184 |
| 6.5 Opwarmen | 184 |
| 6.5.1 Fabrieksinstellingen..... | 184 |
| 6.5.2 Basistemperatuur | 185 |
| 6.5.3 Booster temperatuur | 185 |
| 6.5.4 Superbooster temperatuur | 185 |
| 6.6 Gebruik..... | 185 |
| 6.7 Einde gebruik | 186 |
| 6.8 Automatische uitschakeling..... | 186 |
| 6.9 Bewaring..... | 186 |

de

en

fr

es

it

nl

| | |
|---|---------------|
| Inhoudsopgave | pagina |
| 7 Reiniging | 187 |
| 7.1 Koeleenheid | 187 |
| 7.1.1 Productoverzicht..... | 187 |
| 7.1.2 Demontage..... | 187 |
| 7.1.3 Reiniging..... | 189 |
| 7.1.4 Montage | 189 |
| 7.2 Zeven | 190 |
| 7.3 Reinigen van de vulkamer..... | 190 |
| 7.3.1 Verwijderen van de onderste Zeef..... | 190 |
| 7.3.2 Reiniging..... | 190 |
| 7.3.3 Aanbrengen van de onderste Zeef..... | 190 |
| 7.4 Verdamp(er) en USB-C Kabel | 190 |
| 8 STORZ & BICKEL Web App | 191 |
| 8.1 Fabrieksinstellingen | 191 |
| 8.2 De verbindingsofbouw van de Verdamp(er) met een smartphone | 191 |
| 8.3 De menuonderdelen van de STORZ & BICKEL Web App..... | 191 |
| 8.4 Temperatuurinstelling met de STORZ & BICKEL Web App..... | 192 |
| 8.5 Resetten naar fabrieksinstellingen | 195 |
| 9 Optionele Accessoires | 200 |
| 9.1 Kruidenmolen | 194 |
| 9.2 Vulhulp | 194 |
| 9.2.1 Vullen met de Vulhulp..... | 195 |
| 9.2.2 Vullen van de vulkamer met de Vulhulp | 195 |

| | |
|--|---------------|
| Inhoudsopgave | pagina |
| 9.3 Doseercapsules (voor eenmalig gebruik) | |
| en Bewaardoos..... | 196 |
| 9.3.1 Vullen van de Doseercapsules | 196 |
| 9.3.2 Vullen van de Bewaardoos | |
| met Doseercapsules | 197 |
| 9.3.3 Plaatsen van de Doseercapsule | |
| in de Vulkamer | 197 |
| 10 Storingen | 198 |
| 10.1. Mogelijke storingen / Probleemoplossing..... | 198 |
| 10.2. Na storingen..... | 198 |
| 10.3. Afvoer | 198 |
| 11 Technische gegevens | 199 |
| 12 Naleving van de wettelijke eisen en normen | 199 |
| 13 Vrijwaring, Aansprakelijkheid | 200 |
| 13.1 Vrijwaring..... | 200 |
| 13.2 Aansprakelijkheid..... | 200 |
| 13.3 Copyright | 201 |

de

en

fr


es

it

nl

1 PRODUCTOVERZICHT CRAFTY+

1.1 Inhoud

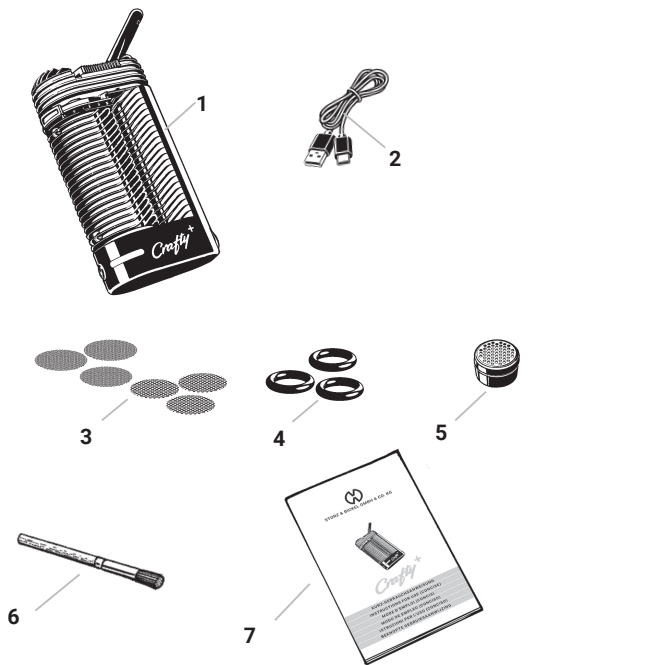

1 CRAFTY+ Verdamer

2 1 stk. USB-C Kabel

3 3 stk. Normale Zeef, klein

3 stk. Grove Zeef, klein

4 3 stk. Bodemaafdichtring, klein


5 1 stk. Doseercapsule

6 1 stk. Reinigingsborstel

7 1 stk. Beknopte Gebruiksaanwijzing

1 PRODUCTOVERZICHT CRAFTY+

1.2 Functionele onderdelen

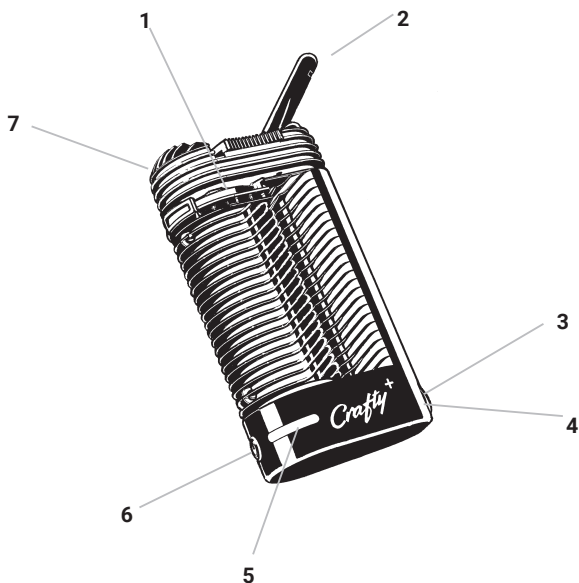

- | | | | |
|---|--|---|-----------------------|
| 1 | Vulkamer | 5 | LED-indicator |
| 2 | Mondstuk | 6 | Aan/uit-Knop (ON/OFF) |
| 3 | Vulkamerhulpmiddel | 7 | Koeleenheid |
| 4 | USB-C Laadbus (achter het Vulkamerhulpmiddel) | | |

de

en

fr

es

it

nl





1.3 Service

In geval van onvolledige levering, technische problemen, vragen over het apparaat en de verwijdering ervan en in gevallen van vrijwaring kunt u contact opnemen met ons Service Center: www.storz-bickel.com/contact

Voor serviceaanvragen kunt u een RMA (Return Merchandise Authorization) starten via onze homepage: www.storz-bickel.com/rma.

2 VOOR UW VEILIGHEID

2.1 Verklaring van de tekens

| | |
|---|---------------|
|  | Bullet |
|  | Gevaarsymbool |
|  | Behandeling |
|  | Aanwijzing |

2.2 Symbolen



Gebruiksaanwijzing opvolgen!



Symbool voor de fabrikant - naast het symbool staat naam en adres van de fabrikant



Het apparaat mag niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Het symbool van de afvalton met een kruis erdoorheen geeft aan dat er gescheiden ingezameld moet worden. Het Verdampers bevat een geïntegreerde lithium-ionbatterij. Bij de afvoer dient deze leeg te zijn.



Symbool EU-conformiteit: Met deze teken bevestigt de fabrikant de conformiteit van de producten met de geldende richtlijnen en normen van de Europese Unie.

de

en

fr

es

it

nl

2 VOOR UW VEILIGHEID



Veiligheid en productie gecontroleerd door TUEV SUED conform EN 60335-1, UL 499 en CAN/CSA 22.2 nr. 64-M91.



Voorzichtig! Heet oppervlak!



Tegen zonlicht beschermen.



Beschermen tegen nattigheid en vocht.



Symbool voor het serienummer



Symbool voor referentienummer/artikelnummer/sku



Gelijkstroom



Apparaat van beschermingsklasse II

2.3 Basisregels

Bewaar deze instructies.

- ▶ Deze Gebruiksaanwijzing is een essentieel onderdeel van de Verdamer en moet aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld.
- ▶ De actuele uitgebreide versie van de Gebruiksaanwijzing onder www.storz-bickel.com downloaden.
- ▶ Lees deze aanwijzingen zorgvuldig en volledig door voordat u de Verdamer en de USB-C Kabel in gebruik neemt.
- ▶ Volg altijd de instructies in deze Gebruiksaanwijzing voor gebruik en onderhoud.

2 VOOR UW VEILIGHEID

- ▶ Deze Verdamer is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij gebruik van de Verdamer. Kinderen mogen de Verdamer niet gebruiken.
- ▶ Als de gebruiker lijdt aan een luchtweg- of longaandoening, mag het apparaat alleen worden gebruikt na overleg en met toestemming van de behandelende arts. Afhankelijk van de dichtheid de luchtwegen en de longen kunnen de dampen tot irritatie en daarom tot hoesten leiden.
- ▶ Laat de Verdamer niet onbeheerd achter wanneer deze in werking is.
- ▶ Bewaar en gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel alleen op voldoende afstand van warmtebronnen (oven, fornuis, open haard, enz.) en op een droge plaats waar de omgevingstemperatuur niet onder +5 °C (+41° F) kan komen.
- ▶ De Verdamer niet aan extreme schommelingen van de omgevingstemperatuur blootstellen. Door condensvocht kan er een storing van de functionering optreden.
- ▶ Gebruik alleen originele STORZ & BICKEL accessoires en reserveonderdelen.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet op een ongeschikte, onjuiste of onverstandige manier, de fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.
- ▶ Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij komen; vermijd aanraking. Bij per ongeluk aanraken, met water spoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, ook een arts raadplegen. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie en brandwonden veroorzaken.

2.4 Veiligheidsinstructies

2.4.1 Gevaar voor letsel door elektrische schokken

- ▶ De Verdamer na gebruik, voor eventuele onderhoudswerkzaamheden en tijdens onweersbuien, uitschakelen en de USB-C-Kabel uit het stopcontact halen.
- ▶ Zorg ervoor dat de USB-C Kabel niet beschadigt door buigen, knellen of trekken.
- ▶ Gebruik geen meervoudige stopcontacten en/of verlengsnoeren.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet als deze beschadigt zijn. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door ons service center. Pogingen om zelf schade te herstellen, maken de vrijwaring ongeldig. Ons Service Center vangt een defecte USB-C Kabel.

de

en

fr

es

it

nl

2 VOOR UW VEILIGHEID

- ▶ Laat de Verdamer en de USB-C Kabel niet in contact komen met vocht.
- ▶ Houd de Verdamer en de USB-C Kabel uit de buurt van huisdieren (bijv. knaagdieren) en ongedierte.
- ▶ Gebruik de Verdamer en de USB-C Kabel niet in een potentieel explosieve of ontvlambare atmosfeer.

2.4.2 Gevaar voor letsel door verbranding / dampen

- ▶ Hete oppervlakken van de Verdamer (Vulkamer en het gebied rond de Vulkamer) tijdens de werking en de afkoelfase niet aanraken.
- ▶ Plaats de hete Verdamer alleen op een stevige en hittegevoelige ondergrond en let erop dat deze niet wordt afgedekt met voorwerpen.
- ▶ Gebruik de Verdamer niet in de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen, tafelkleden of papier.
- ▶ De openingen van de Verdamer niet afsluiten, niet afdekken en niet blokkeren tijdens de werking en de afkoelfase.
- ▶ Zorg er vóór het inschakelen van de Verdamer voor dat alle dampen, bijv. van brandbare reinigings- en desinfectiemiddelen, zijn verdampt.

2.4.3 Gevaar voor letsel door verschillende oorzaken

- ▶ De verpakkingselementen (plastic zakken, piepschuim, dozen enz.) mogen niet in de handen van kinderen terechtkomen, aangezien ze een potentieel gevaar vormen.
- ▶ Zorg ervoor dat kleine onderdelen van de Verdamer niet worden ingeslikt.
- ▶ Let op het gevaar van wurging door de USB-C Kabel.
- ▶ Verdamer met de aanbevolen, te verdampen kruiden en plantendelen gebruiken.
- ▶ Let op de symptomen (bijv. hoest, kortademigheid, pijn op de borst) tijdens of na gebruik en raadpleeg onmiddellijk een arts als u gezondheidsproblemen hebt.

3 DOEL

De Verdamer wordt gebruikt om geuren of aroma's te produceren van de in hoofdstuk 4, pagina 181 genoemde kruiden en plantendelen. Door verdamping met behulp van hete lucht worden de geuren en aroma's opgelost en kunnen ze direct worden ingeademd.

De Verdamer is geen medisch product.

de

en

fr

4 PLANTENOVERZICHT

- ▶ Verdamp alleen geuren en aroma's van de hier genoemde plantenmaterialen die volgens de richtlijnen van de Europese Farmacopee (of vergelijkbaar) zijn getest op authenticiteit, zuiverheid en ziekteverwekkers.
 - ▶ Koop deze planten of delen van planten in uw apotheek.
- i** Elk ander gebruik is oneigenlijk en potentieel gevaarlijk.
- i** De Verdamer is niet bedoeld voor gebruik met tabak- of nicotineproducten.

es

it

nl

| Plantennaam | Botanische naam | Gebruikt deel van de plant | Temperatuurinstelling |
|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Eucalyptus | Eucalyptus globulus | de bladeren | 130°C |
| Hop | Humulus lupulus | de kegels | 154°C |
| Kamille | Matriarca chamomilla | de bloemen | 190°C |
| Lavendel | Lavandula angustifolia | de bloemen | 130°C |
| Citroenmelisse | Melissa officinalis | de bladeren | 142°C |
| Salie | Salvia officinalis | de bladeren | 190°C |
| Tijm | Thymus vulgaris | het kruid | 190°C |

Neem de volgende aanwijzingen in acht, dan kunt u de Verdamp(er) met het gebruikte plantenmateriaal optimaal aan uw persoonlijke behoeften aanpassen.

De hoeveelheid opgeloste aroma's en geuren wordt beïnvloed door de volgende factoren:

1. Kwaliteit: Het aandeel verdampbare aroma's en geuren in het desbetreffende plantenmateriaal.
2. Kwantiteit: De hoeveelheid van het verdampingsmateriaal in de vulkamer dat wordt doorstroomt.
3. Oppervlak: Hoe fijner de planten fijngemaakt zijn, des te groter wordt het oppervlak waarvan de aroma's en geuren bij het verdampingsproces kunnen vrijkomen.
4. Temperatuur: Hoe hoger de temperatuur, hoe meer aroma's en geuren in één keer worden opgelost. Een temperatuurverhoging moet altijd een laatste middel zijn, omdat het plantenmateriaal bij hogere temperaturen een minder aangename smaak heeft.

U kunt het verdampingsproces met dezelfde vulkamerinhoud herhalen tot er bij de maximumtemperatuur geen dampen meer worden gevormd.

6.1 Uitpakken

- ▶ Controleer de Verdampers met behulp van hoofdstuk 1.1 "Leveringsomvang", pagina 174 op volledigheid.

6.2 Aansluiting stroomnet

- ▶ Controleer de Verdampers en de USB-C Kabel aan de buitenkant op zichtbare beschadigingen.

6.3 Opladen van de batterij

- ▶ Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op.
- ▶ Sluit de Verdampers met behulp van de meegeleverde USB-C-Kabel aan op een USB-Oplader.

i Het oplaadproces wordt bevestigd door kort oplichten van de LED-indicator (groen/rood/blauw) en trillingen.

i De laadtoestand van de batterij wordt aangegeven doordat de LED-indicator blauw oplicht.

Toelichting over de batterijindicator tijdens de oplaadbeurt:

- ▶ Blauw continu licht: de batterij is volledig opgeladen.
- ▶ Blauw, langzaam knipperen: de batterij is voor ca. 61–96 % opgeladen
- ▶ Blauw, snel knipperen: de batterij is voor ca. 31–60 % opgeladen.
- ▶ Blauw flitsen: de batterij is voor ca. 30 % opgeladen.

Toelichting over de batterijindicator na het uitschakelen:

- ▶ Blauw continu licht: de batterij is voor ca. 64–100 % opgeladen.
- ▶ Blauw, langzaam knipperen: de batterij is voor ca. 32–63 % opgeladen.
- ▶ Blauw, snel knipperen: de batterij is voor ca. 1–31 % opgeladen.
- ▶ Blauw flitsen: de batterij is leeg.
- ▶ Wanneer het opladen is voltooid, moet u eerst de USB-C Kabel van de stroombron en vervolgens van de Verdampers loskoppelen.

i U kunt de Verdampers niet gebruiken als deze met de USB-C Kabel op een stroombron is aangesloten. Pas nadat een gedeeltelijke lading heeft plaatsgevonden, kunt u deze weer inschakelen.

de

en

fr

es

it

nl


LET OP

Verlies van vrijwaring / schade aan eigendommen als de batterij door uzelf wordt vervangen


Als de Verdamper verkeerd wordt geopend, raakt deze beschadigd.

- **Vervanging van de batterij alleen door ons Service Center**

6.4 Vullen van de vulkamer

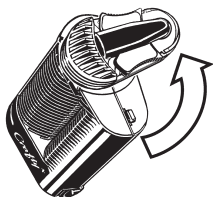

- ▶ Schroef de Koeleenheid van de Verdamper door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

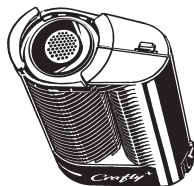

- ▶ Vul de vulkamer volledig tot aan de kunststof rand met gemalen plantenmateriaal.
- i** Te veel gecompriemd plantenmateriaal of een te volle vulkamer bemoeilijkt het inademen.
- ▶ Verwijder overtollig plantenmateriaal rond de vulopening.
- ▶ Plaats de Koeleenheid op de Verdamper door deze 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

6.5 Opwarmen

6.5.1 Fabrieksinstellingen

De Verdamper heeft drie, vooraf in de fabriek ingestelde temperatuurniveaus:

- Basistemperatuur: 180 °C (356 °F)
- Booster temperatuur: +15 °C (27 °F)
(ten opzichte van de basistemperatuur komt overeen met 195 °C (383 °F))
- Superbooster temperatuur: +30 °C (54 °F)
(ten opzichte van de basistemperatuur komt overeen met 210 °C (410 °F))

i De basistemperatuur en booster-temperatuur, zoals de superbooster-temperatuur, kunnen worden gewijzigd via de Web App. Zie hoofdstuk 8. "Storz & Bickel Web App", pagina 191.

i Als een temperatuurniveau niet meer voldoende is, gaat u naar het volgende niveau, zoals hieronder beschreven.

6.5.2 Basistemperatuur

► Houd de oranje Aan/uit-Knop (ON/OFF) minstens een halve seconde ingedrukt.

i Een trilling bevestigt het inschakelen en het rode continue licht van de LED-indicator geeft het verwarmen aan. Als de batterij volledig is opgeladen, duurt het ongeveer 60-80 seconden om op te warmen. Een dubbele trilling en groen continu licht geven aan dat de basistemperatuur is bereikt.

6.5.3 Booster temperatuur

► Dubbelklik op de oranje Aan/uit-Knop (ON/OFF).

i De LED-indicator geeft aan dat het opwarmingsproces wordt uitgevoerd door rood te knipperen. Een dubbele trilling en een groen knipperend signaal geven aan dat de temperatuur van de booster is bereikt.

i De boostermodus eindigt automatisch na 90 seconden nadat

de boostertemperatuur is bereikt; de ingestelde temperatuur is dan weer gelijk aan de Basistemperatuur.

6.5.4 Superbooster temperatuur

► Klik drie keer op de oranje Aan/uit-Knop (ON/OFF).

i De LED-indicator geeft aan dat het opwarmingsproces bezig is door snel rood te knipperen. Een dubbele trilling en snel groen knipperen geven aan dat de superbooster-temperatuur is bereikt.

i De superboostermodus eindigt automatisch na 90 seconden nadat de superboostertemperatuur is bereikt; de ingestelde temperatuur is dan weer gelijk aan de Basistemperatuur.

6.6 Gebruik



i Start de verdamping nadat de verwarming is voltooid.

► Klap het Mondstuk van de Koeleenheid open.

► Neem het Mondstuk tussen uw lippen.

- ▶ Adem een paar seconden gelijkmatig in en slechts de helft van wat u eigenlijk kan.
- ▶ Houd de lucht een paar seconden vast en adem dan langzaam uit.
- ▶ Focus bewust op het ademproces.
- i** Hoe intensiever de damp, hoe meer de smaak beïnvloed wordt.
- ▶ Laat de Verdamer volledig afkoelen.
- ▶ Indien nodig de Verdamer reinigen zoals beschreven in hoofdstuk 7 "Reiniging" vanaf pagina 187.



VOORZICHTIG

Gezondheidsproblemen als gevolg van inademing van dampen

Hoesten

- **Geen toepassing in geval van aandoeningen aan de luchtwegen/longen**

6.8 Automatische uitschakeling

- i** Twee minuten na de laatste toetsaanslag of de laatste toepassing schakelt de Verdamer automatisch uit om de accu te sparen. De uitschakeling wordt bevestigd door een trilling en indicator van het oplaadniveau.
- i** De automatische uitschakeling kan worden gereset naar twee minuten door de Aan/uit-Knop (ON/OFF) tijdens het gebruik kort in te drukken.

6.7 Einde gebruik



VOORZICHTIG

Heet oppervlak van de vulkamer

Gevaar voor verbranding

- **Raak de vulkamer niet aan totdat de Verdamer is afgekoeld**

6.9 Bewaring

- ▶ Bewaar de Verdamer en de USB-C Kabel op een droge tegen weersomstandigheden beschermde plaats en buiten het bereik van kinderen of onbevoegden.
- ▶ Houd de oranje Aan/uit-Knop (ON/OFF) minstens een halve seconde ingedrukt.
- i** De Verdamer breekt het uitschakelen met een trilling af.

7 REINIGING

de

en

fr

es

it


nl

7.1 Koeleenheid

i Koeleenheid en Mondstuk moeten vrij zijn van afzettingen. Deze worden veroorzaakt door dampcondens in de Koeleenheid. Controleer daarom de Koeleenheid en het Mondstuk voor elk gebruik.

i Reinig de Koeleenheid inclusief het mondstuk regelmatig en bij gebruik door meer dan één persoon. Hygiëne is een voorwaarde voor een goede werking. **dens** in de Koeleenheid.


7.1.1 Productoverzicht

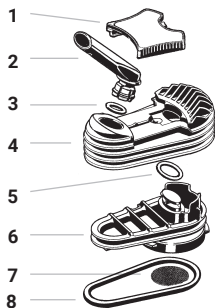

- 1 Dekselvergrendeling
- 2 Mondstuk
- 3 Afdichting Mondstuk
- 4 Koeleenheiddeksel
- 5 Bodemafdichtring klein
- 6 Koeleenheidbodem
- 7 Bovenste Zeef (grof maaswijdte)
- 8 Bodemafdichtring groot

7.1.2 Demontage


i Zorg dat de Verdamp(er) volledig is afgekoeld.

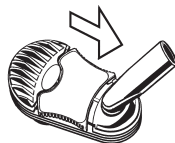

► Trek de dekselvergrendeling naar het Mondstuk toe.



► Trek de Koeleenheiddeksel van de Verdamp(er).

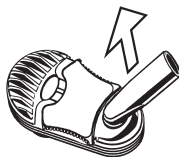

► Trek het Mondstuk uit het deksel van de Koeleenheid door het licht heen en weer te bewegen.

► Trek de afdichting van het Mondstuk af.

7 REINIGING




- ▶ Bij het reinigen van Deksel Koeleenheid in Isopropylacohol, moet u de Dekselvergrendeling verwijderen.
- ▶ Druk eerst aan één kant op de Dekselvergrendeling en trek dan de andere kant omhoog.



- ▶ Schuif vervolgens de Dekselvergrendeling aan de omhoog getrokken kant naar de tegenovergestelde kant.


i Het signet-hologram op de dekselvergrendeling is een sticker.

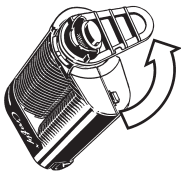

- ▶ Schroef de Koeleenheidbodem van de Verdampert door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.



- ▶ Til de grote Bodemaafdichting aan de onderzijde met het Vulkamerhulpmiddel bij de uitsparing in de groef eruit.
- ▶ Verwijder de kleine Bodemaafdichting.

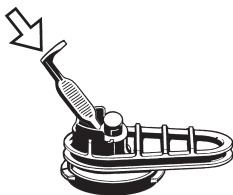

- ▶ Duw de Zeef van de Koeleenheidbodem met behulp van de Vulkamerhulp naar buiten.

7.1.3 Reiniging

**VOORZICHTIG****Isopropylalcohol is brandbaar en gemakkelijk ontvlambaar**

Gevaar voor verbranding

- **Volg de veiligheidsinstructies van de fabrikant van de isopropylalcohol!**

- i** Reinigingsborstel, wattenstaafjes en papieren of katoenen doeken zijn geschikt voor handmatige reiniging. Wij adviseren warm spoelwater of isopropylalcohol als oplosmiddel.



- ▶ Leg alle onderdelen van de Koeleenheid (behalve de Dekselvergrendeling) en de Vulkamerzeef niet langer dan 1/2 uur in isopropylalcohol.
- i** Langdurig contact met isopropylalcohol kan leiden tot verkleuringen of brosheid van de kunststof onderdelen.

- ▶ Laat alle onderdelen goed drogen.
- ▶ Controleer alle onderdelen op beschadigde oppervlakken, scheurvorming, verweking, verharding, vervuiling of verkleuring.
- ▶ Vervang beschadigde onderdelen.

- i** Reinig indien nodig de dekselvergrendeling met warm spoelwater of veeg hem af met isopropylalcohol.

LET OP**Materiële schade door ondeskundige reiniging**

Stickertjes met signet-hologram kunnen verbleken en de lijm kan oplossen

- **Langdurig contact met isopropylalcohol vermijden**

- i** De optionele toebehoren: Kruidenmolen, vulhulp en bewaardoos mogen niet in isopropylalcohol worden gelegd. Reinig deze onderdelen in de vaatwasser of met warm afwaswater.

7.1.4 Montage

- ▶ Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
- i** Let bij de montage op de juiste positie van de Afdichtringen. Vooral de klein Bodemafdichtring dient in zijn geheel en niet meer zichtbaar in het deksel Koeleenheid te zitten.

7 REINIGING

- ▶ Steek de bovenste Zeef voorzichtig in de daarvoor bestemde groef.

i Als dit niet in acht wordt genomen, kunnen plantendelen in de Koelenheid terechtkomen, deze verstopten of ingeademd worden.

7.2 Zeven

- ▶ Vulkamerzeef en Zeef van de Koelenheid na elk gebruik met de meegeleverde Reinigingsborstel reinigen.

7.3 Reinigen van de vulkamer

i De vulkamer moet worden gereinigd zodra de onderste Zeef verstopt is.

7.3.1 Verwijderen van de onderste Zeef

- ▶ Verwijder de onderste Zeef door deze met het Vulkamerhulpmiddel langs de groef van de vulkamer te drukken. Dit zorgt ervoor dat de onderste Zeef uitpuilt en loskomt van de groef.

7.3.2 Reiniging

- ▶ Reinig de vulkamer met een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol.
- i** Zorg ervoor dat er geen isopropylalcohol in het binnenste van het apparaat druppelt.

7.3.3 Aanbrengen van de onderste Zeef

- ▶ Buig de onderste Zeef.
- ▶ Plaats de onderste Zeef in de vulkamer met de bolle kant naar boven.
- ▶ Druk met het Vulkamerhulpmiddel de Zeef plat in de daarvoor bestemde groef.

7.4 Verdampert en USB-C Kabel

LET OP

Materiële schade door ondeskundige reiniging

Er kan water in de Verdampert of de USB-C Kabel binnendringen en deze beschadigen.

- **Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen**
- **Niet reinigen met irecte water-, stoom- of persluchtstraal**

- ▶ Koppel de USB-C Kabel los van de stroombron.
- ▶ Schakel de Verdampert uit.
- ▶ Reinig de behuizing van de Verdampert en de USB-C Kabel alleen met een droge doek of, indien nodig, met een vochtige doek.

De Storz & Bickel Web App is voor de werking van de Verdamer niet nodig, maar maakt echter individuele instellingen en het aflezen van aanvullende informatie in de werking met de Verdamer mogelijk. De Verdamer wordt hiertoe per Bluetooth® met een Smartphone verbonden.

8.1 Fabrieksinstellingen

Basistemperatuur: 180°C

Booster temperatuur: +15°C
(ten opzichte van de basistemperatuur)
komt overeen met 195°C

Superbooster temperatuur: +30°C
(ten opzichte van de basistemperatuur)
komt overeen met 210°C

LED-indicator helderheid
CRAFTY+: 100%

Ladingsindicator CRAFTY+: ON

Trilling CRAFTY+: ON

Trilling smartphone: OFF

Alarmsignaal smartphone: OFF

8.2 De verbindingsofbouw van de Verdamer met een smartphone

Schakel de smartphone in en controleer of de Bluetooth®-functie is ingeschakeld en niet wordt geblokkeerd door een ander Bluetooth®-apparaat. Schakel vervolgens de Verdamer in en open een browser die Bluetooth®-connectiviteit ondersteunt (meer informatie op www.storz-bickel.com/app/web).

Ga naar app.storz-bickel.com

Klik op "Verbinden" en kies uw Verdamer.

8.3 De menuonderdelen van de STORZ & BICKEL Web App

Temperatuur

Hier kunt u de ingestelde en feitelijke temperaturen aflezen en de temperatuur instellen. Bovendien vindt u hier de ladingsindicator van de Verdamer.

Apparaat

Apparaatgerelateerde informatie, zoals bedrijfsuren, softwareversies enz. vindt u in dit gedeelte.

Om te weten te komen welke extra apparaatspecifieke functies aangepast kunnen worden via de STORZ & BICKEL Web App, gaat u naar: <https://www.storz-bickel.com/app/web>

Informatie

Hier vindt u meer informatie zoals de plantenlijsten, de Quick Start Manual, de Gebruiksaanwijzing, de algemene voorwaarden, de verklaring gegevensbescherming, maar ook directe links naar de STORZ & BICKEL homepage of naar de online shop.

de

en

fr

es

it

nl

8.4 Temperatuurstelling met de STORZ & BICKEL Web App

i Naast de drie af fabriek ingestelde temperatuurniveaus kunt u ook individueel temperaturen tussen 40°C en 210°C instellen (zie hoofdstuk 4 „Plantenoverzicht”, pagina 181).

- ▶ Druk kort op de bovenste plus-toets om de streefwaarde in stappen van 1 graad te verhogen.
- ▶ Druk kort op de bovenste min-toets om de streefwaarde in stappen van 1 graad te verlagen.
- ▶ Houd deze plus- of min-toets ingedrukt, zodat de streefwaarden continu in de betreffende richting lopen.

i De huidige temperatuur is af te lezen van de bovenste regel in de display.

i De booster- resp. superbooster temperatuur wordt altijd toegevoegd aan de basis- of booster temperatuur. Bovendien kan het graadverschil tussen de basistemperatuur en de boostertemperatuur met de onderste plus- en min-toets op de graad nauwkeurig worden ingesteld. Het gradenverschil tussen booster- en superboostertemperatuur is vast en is altijd +15°C. Daarbij kan het totaal van 210°C niet overschreden worden.

Fahrenheit/Celsius

- ▶ Raak de plus- en min-toets tegelijkertijd aan om de indicator om te zetten van graden Celsius naar graden Fahrenheit.

Ladingsindicator

i De ladingsindicator toont een batterijsymbool met zes laadtoestandvelden. Afhankelijk van de laadtoestand zijn meer of minder laadtoestandvelden te zien.



- ▶ Volle batterij: indicator van alle zes oplaadstatusvelden
- ▶ bijna lege batterij: knipperend batterijframe
- ▶ Opladen: knipperende oplaadindicator en indicator van de actuele accustatus.

8.5 Resetten naar fabrieksinstellingen

Instellingen die u via de STORZ & BICKEL Web App hebt gewijzigd, kunnen als volgt worden gereset:

- ▶ Zet de Verdamp(er) aan.
- ▶ Houd de oranje Aan/uit-Knop (ON/OFF) 10 seconden ingedrukt. De reset wordt bevestigd door de volgende doorlopende verlichting: rood/groen/blauw/rood/groen/blauw/rood/groen/blauw en gelijktijdig trillen.

Slijtageset - SKU 06 02 CY

De Slijtageset bevat alle benodigde reserveonderdelen om de Koeleenheid te vervangen.

Koeleeneenheden, 3 stuks - SKU 03 05 CY / Koeleenheid - SKU 03 04 CY

De Koeleenheid koelt de damp af en zorgt zo voor een aangename temperatuur en een optimaal aroma. Om te garanderen dat de Koeleenheid schoon is, moet die regelmatig worden vervangen. Het Mondstuk wordt meegeleverd met de Koeleenheid.

Mondstukken, 4 stuks - SKU 11 72

Het Mondstuk wordt op de Koeleenheid geplaatst.

Dekselvergrendelingen, 3 stuks - SKU 11 53

De Dekselvergrendeling bevestigt het deksel aan de onderkant van de Koeleenheid.

Set Zeven, klein - SKU 11 12

De Set bestaat uit vier Zeven met grove maaswijdte voor de Koeleenheid en twee Zeven met normale maaswijdte voor de vulkamer.

Grove Zeven, klein, 6 stuks - SKU 11 40

De kleine Zeef met grove maaswijdte wordt op de bodem van de Koeleenheid geplaatst.

Normale Zeven, klein, 6 stuks - SKU 11 03

De kleine Zeef met normale maaswijdte wordt op het deksel van de Koeleenheid geplaatst.

Set Afdichting - SKU 06 01 CY

De Set bevat alle benodigde Afdichtingsringen voor de Koeleenheid en de vulkamer.

Kruیدنmolen - SKU 11 84 / Kruیدنmolen XL - SKU 11 85

De Kruیدنmolen heeft extra scherpe tanden voor fijngemalen kruiden.

Vulhulp - SKU 11 95

Met de Vulhulp kan het gemalen plantenmateriaal schoon in de vulkamer worden gedaan.

Vulkamerhulpmiddelen, 6 stuks - SKU 11 59

De verschillende toepassingsmogelijkheden van het Vulkamerhulpmiddel worden in deze Gebruiksaanwijzing beschreven.

Doseercapsules, 40 stuks - SKU 09 33

In de Doseercapsules kan geplet plantaardig materiaal worden gedaan. De Doseercapsule na gebruik weggooien meht het huishoudelijk afval.

Doseercapsule-Bewaardoos - SKU 09 32

Bewaar de gevulde Doseercapsules in de Bewaardoos. Het deksel van de Bewaardoos dient als vulhulp voor de Doseercapsules.

de

en

fr

es

it

nl

9 OPTIONELE ACCESSOIRES

Doseercapsule-Vulset - SKU 09 45

Met de Vulset kunnen 40 Doseercapsules tegelijkertijd met fijn gemaakt plantenmateriaal worden gevuld.

Reinigingsborstels, 3 stuks - SKU 11 24

De Reinigingsborstel wordt onder meer gebruikt om de Vulkamer te reinigen.

12 Volt Auto-Oplader - SKU 01 09 CY

Oplader voor de batterij.

U kunt deze en andere toebehoren en gedetailleerde informatie hierover vinden onder <https://www.storz-bickel.com>




9.1 Kruidenmolen



- ▶ Plaats plantaardig materiaal tussen de twee molenschalen van de Kruidenmolen.
- ▶ Sluit de Kruidenmolen.
- ▶ Draai de Kruidenmolen meerdere keren heen en weer.

9.2 Vulhulp

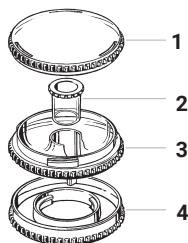

- 1 Bovenste Deksel
- 2 Stop
- 3 Kom
- 4 Onderste Deksel

i De Vulhulp wordt gebruikt voor het eenvoudig en schoon vullen van de vulkamer. In de kom van de Vulhulp kunt u gemalen plantenmateriaal opslaan.

9.2.1 Vullen van de Vulhulp



- ▶ Schroef het bovenste deksel tegen de wijzers van de klok in los.
- ▶ Vul de kom inclusief stop met fijn-gemaakt plantenmateriaal.
- ▶ Zet het bovenste deksel erop door het met de wijzers van de klok mee te draaien.

- ▶ Schroef het bovenste deksel van de Vulhulp tegen de wijzers van de klok in los.
- ▶ Trek de stop uit de Vulhulp.



- ▶ Duw een deel van het plantenmateriaal door de centrale opening in de vulkamer.
- i** Let erop dat de vulkamer niet te vol is (zie hoofdstuk 6.4 "Vullen van de vulkamer", pagina 184).

9.2.2 Vullen van de vulkamer met de Vulhulp

- ▶ Schroef de Koeleenheid van de Verdamer door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Gebruik het Vulkamerhulpmiddel om eventuele resten uit de vulkamer te verwijderen.
- ▶ Schroef het onderste deksel van de Vulhulp met de wijzers van de klok mee los.
- ▶ Plaats de Vulhulp op de Verdamer door hem 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.




- i** Vul de vulkamer alleen tot aan de onderrand van de Vulhulp.
- ▶ Duw de stop in de centrale opening.

9 OPTIONELE ACCESSOIRES

- ▶ Zet het bovenste deksel erop door het met de wijzers van de klok mee te draaien.
- ▶ Schroef de Vulhulp los van de Verdampjer door hem 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Plaats het onderste deksel op de Vulhulp door hem tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- ▶ Plaats de Koeleenheid op de Verdampjer door deze 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

9.3 Doseercapsules (voor eenmalig gebruik) en Bewaardoos

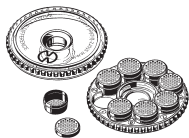

i Met de als accessoire verkrijgbare Doseercapsules kunt u met het op voorraad fijngemaakte plantenmateriaal toevoegen en in de Bewaardoos bewaren tot u het gebruikt.

i De Doseercapsules worden slechts een maal gebruikt. Gooi ze na gebruik weg bij het restafval.

9.3.1 Vullen van de Doseercapsules



- ▶ Schroef het deksel van de Bewaardoos tegen de wijzers van de klok in los.
- ▶ Plaats het deksel van de Bewaardoos op de open Doseercapsule.
- ▶ Duw een deel van het plantenmateriaal door de centrale opening in de Doseercapsule.
- ▶ Sluit de Doseercapsule met het deksel.




9.3.2 Vullen van de Bewaardoos met Doseercapsules


- ▶ De gevulde Doseercapsules in de Bewaardoos plaatsen.
- ▶ Sluit de Bewaardoos door de klep van de doos met de wijzers van de klok mee te draaien.



9.3.3 Plaatsen van de Doseercapsule in de Vulkamer

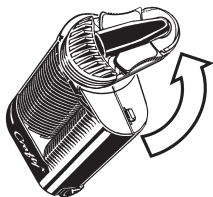

- ▶ Schroef de Koeleenheid van de Verdampert door deze 90° tegen de wijzers van de klok in te draaien.

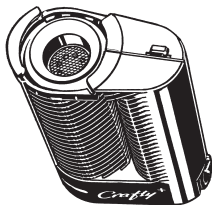

- ▶ Plaats de Doseercapsule met het deksel naar boven in de Vulkamer van de Verdampert.
- ▶ Plaats de Koeleenheid op de Verdampert door deze 90° met de wijzers van de klok mee te draaien.

de

en

fr

es

it

nl

10.1 Mogelijke storingen / Probleemoplossing

| Storing | Mogelijke oorzaken/Oplossing |
|---|--|
| De Verdampers kan niet aangezet worden. | Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. |
| LED-indicator knippert afwisselend rood/blauw. | De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Laat de Verdampers afkoelen of opwarmen. |
| LED-indicator knippert blauw. | De batterij is leeg. Sluit de Adapter of Oplader aan. |
| LED-indicator knippert afwisselend rood/groen. | De USB-C Kabel is niet geschikt. Gebruik de meegeleverde USB-C Kabel. |
| LED-indicator knippert afwisselend rood/oranje. | De Verdampers is defect. |

10.2 Na storingen

- ▶ Schakel de Verdampers onmiddellijk uit.
- ▶ Koppel de Verdampers los van de stroombron.
- ▶ Neem rechtstreeks contact op met ons Service Center.

10.3 Afvoer

- ▶ Na afloop van de vrijwaringsperiode dient u een onherstelbare Verdampers via de materiaalkringloop af te voeren of voor verwijdering naar ons Service Center te sturen.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

CRAFTY+ Verdamer:

Ingangsspanning: 5 V directstroom

De spanningsopgave staat op het typeplaatje van de Verdamer.

Energieverbruik Verdamer: 10 W max.

Bedrijfstemperatuur: 5°C bis 35°C

Verdampingstemperatuur:

Keuzebereik tussen ca. 40°C - 210°C

Maten: 11,0 x 5,7 x 3,3 cm

Gewicht: ca. 135 g

Technische wijzigingen voorbehouden.

Octrooien en modellen: www.storz-bickel.com/patents

de

en

fr

es

it

nl

12. NALEVING VAN DE WETTELIJKE EISEN EN NORMEN

De apparaten beantwoorden aan de eisen van de volgende EG-richtlijnen:

- IEC 60335
- EN 55011
- EN 61000-4-X



Fabrikant:

STORZ & BICKEL GmbH
In Grubenäcker 5-9
78532 Tuttlingen, Duitsland

13.1 Vrijwaring

Voor S&B Producten die rechtstreeks via storz-bickel.com of bij een erkende dealer zijn gekocht, geldt een beperkte garantie van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke koper. Voor in California, VS, woonachtige klanten die kopen via storz-bickel.com, gaat de Beperkte Garantie van S&B in op de datum van levering aan de oorspronkelijke koper.

Indien een klant het gekochte S&B Product binnen vier weken na aankoop registreert op www.storz-bickel.com/registration, geeft S&B een extra jaar garantie. De MIGHTY, CRAFTY+ en PLENTY zijn hiervan uitgezonderd.

S&B geeft alleen garantie op de MIGHTY+, CRAFTY+, VOLCANO HYBRID, VOLCANO CLASSIC, PLENTY, VENTY en MIGHTY ("S&B Producten") in geval van materiaal- en productiefouten bij Normaal Gebruik (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende 2 jaar na de aankoopdatum bij aankoop direct via storz-bickel.com (of vanaf de datum van levering bij klanten woonachtig in California, VS), of bij aankoop bij een erkende dealer (raadpleeg daarvoor onze website).

Deze Beperkte Garantie geldt niet voor commercieel gebruik van het product, schade vanwege verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud of verkeerd bewaren, normale slijtage, gereviseerde producten of niet geautoriseerde reparaties van het product.

Verder is de Beperkte Garantie niet van toepassing op enige andere producten dan de S&B Producten en ook niet op eventuele accessoires of hulpstukken of componenten, waaronder, maar niet beperkt tot Batterijen, Ballonnen, Koelenheden, Oplaadkabels en Adapters, Vulkamer (VOLCANO), Slang, Zeven, Doseercapsule en accessoires die bij dergelijke S&B Producten zijn inbegrepen.

Deze Beperkte Garantie is onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland, waarbij het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) niet van toepassing is.

Alle garantievoorwaarden vindt u hier: www.storz-bickel.com/legal/warranty.

13.2 Aansprakelijkheid

STORZ & BICKEL is tegenover de klant aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onze producten volgens de richtlijnen van het Duitse recht overeenkomstig onze AGB. Er is dus alleen aansprakelijkheid voor schade die door grove nalatigheid of opzettelijk is veroorzaakt, tenzij het gaat schade aan leven, lichaam en gezondheid of de schending betreft een essentiële contractuele verplichting. In dit geval zijn wij tegenover de klant ook aansprakelijk voor eenvoudige nalatigheid.

13.3 Copyright

Dit document is door het auteursrecht beschermd en mag zonder de voorafgaande toestemming van STORZ & BICKEL noch geheel noch gedeeltelijk worden gebruikt volgens §§ 15 ff. UrhG (Urheberrechtsgesetz, auteursrecht).

de

en

fr

es

it

nl



STORZ & BICKEL

STORZ & BICKEL GmbH

In Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen / Germany

© by STORZ & BICKEL GmbH · CAL-30-204-16-L 08-2025

Änderungen vorbehalten · Alle Rechte vorbehalten

Subject to alterations · All rights reserved

Sous réserve de modifications · Tous droits réservés

Reservar sujeto a modificaciones · Todos los derechos reservados

Salvo modifichie · Tutti i diritti riservati

Wijzingen voorbehouden · Alle rechten voorbehouden

